

機械器具(02) 医療用照明器  
一般医療機器 診療用照明器 12276000


## アトム検診台用ファイバーライト

### 【警告】

- 1) 長時間の連続した使用は避けること。  
[火傷をするおそれがある。]
- 2) ライトガイドの先端を直接皮膚にあてないこと。  
[火傷をするおそれがある。]
- 3) ライトガイドの先端を覗かないこと。絶対に光を目にあてないこと。  
[目に傷害を受けるおそれがある。]

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 構成

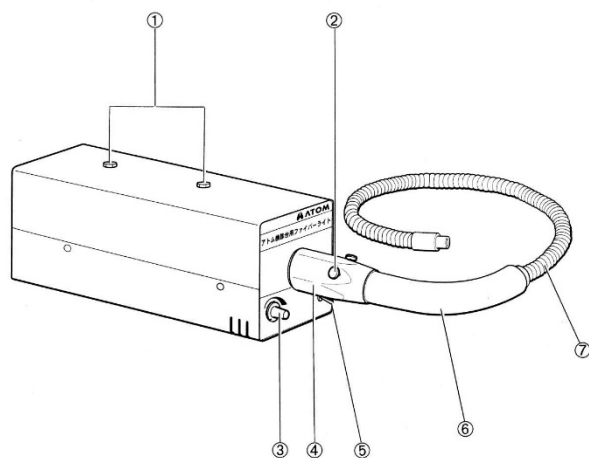

| 番号 | 名 称        | 番号 | 名 称      |
|----|------------|----|----------|
| ①  | 検診台取付孔     | ⑤  | 電源スイッチ   |
| ②  | 支管固定ネジ     | ⑥  | ライトガイド支管 |
| ③  | 光量調整ツマミ    | ⑦  | ライトガイド   |
| ④  | ライトガイドホルダー | ⑧  | *本体カバー   |

#### 2. 電氣的定格

##### [AC 電源]

定格電圧:100V  
周 波 数:50/60Hz  
消費電力:75VA

#### 3. 機器の分類

- (1) 電撃に対する保護の形式による分類 クラスⅠ機器
- (2) 電撃に対する保護の程度による装着部の分類 BF 形装着部

#### 4. 作動原理

本品は、光源からの光量を制御部で調節し、ライトガイドを通して照射する。また、照射方向はライトガイドの柔軟性を利用して任意に調整することができる。

### 【使用目的又は効果】

本品は、患者の診療および治療時に用いる医療用照明器である。本品は検診台などに固定して使用される。

### 【使用方法等】

#### \*1. 使用方法

- 1) 本体を検診台に直接取り付け、本体にライトガイドを取り付ける。

- 2) 電源コードを電源に接続する。
- 3) ライトガイドを目的の方向に曲げる。
- 4) 電源スイッチを ON にしてライトを点灯させる。
- 5) 光量調節ツマミで適切な光量に調節する。「HIGH」側に回すと光量が増し、「LOW」側に回すと光量が減る。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- 1) 本品は、検診台に取り付けて確実に固定すること。  
[落下などして、破損やけがの原因になる。]
- 2) ライトガイドホルダーの締め具合を常に確認すること。  
[ライトガイドホルダーが緩むと、目的の部分に光が照射されない。]
- 3) 電源コンセントは本品の近くで、電源コードに人が触れない位置を選び、機器 1 台ごとに専用のコンセントを用いること。また、電源コードは、正しくアースされた 3 芯接地型コンセントだけに接続し、アースを確実にとること。
- 4) 指定表示容量以外のヒューズは使用しないこと。
- 5) 絶対に延長コードを使用しないこと。
- 6) 光量調節ツマミは急激に回さないこと。
- 7) 本品が正常に動作しないときは、すぐに使用を中止すること。故障を発見したら勝手にいじらず、修理は専門家にまかせること。
- 8) 本品に衝撃を与えたり、ぶつけたりしないこと。  
[故障や破損の原因になる。]
- 9) 本品を布などで覆った状態で使用しないこと。  
[過熱して火災や感電の原因になる。]

### 【保管方法及び有効期間等】

耐用期間:6 年[自己認証データによる]  
保管条件:以下の条件下で保管すること。  
保管温度 -20～45℃  
相対湿度 10～95%(結露なきこと)

### 【保守・点検に係る事項】

#### 【使用者による保守点検事項】

- 1) 点検  
毎回の使用の前に、各 부품の基本的な機能作動を確認すること。点検項目は取扱説明書を参照すること。
- 2) 清拭・消毒  
消毒液の一例として、下記の水溶液を使用することを推奨する。  
塩化ベンザルコニウム水溶液(オスバン等)  
塩化ベンゼトニウム水溶液(ハイアミン等)  
クロルヘキシジン水溶液(ヒビテン等)  
ライトガイドは消毒液に浸した柔らかい布で清拭すること。  
消毒液は必ず希釈し、原液のまま使用しないこと。  
アルコールを含む消毒液を使用しないこと。

#### 【業者による保守点検事項】

1 年に 1 度を目安に定期点検を実施すること。  
詳細については弊社または納入業者にご相談ください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### ■製造販売業者

## アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1  
TEL: 048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)

取扱説明書を必ずご参照ください