

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
一般医療機器 単回使用体温計プローブ 35254001

ディスポ体温プローブ

再使用禁止

【警告】

- 1) 本品の近くに電気手術器等の高周波発生源があると、温度測定装置の誤表示、本品の部分的発熱及び損傷が発生することがある。
- 2) 本品を接地の不適切な高周波発生源と併用した場合、高周波電流が靱帯の静電容量を介して、温度測定装置から接地側に流れることによって、患者が火傷をすることがある。
- 3) 指定された機器以外に使用しないこと。
[正確な温度測定ができない可能性がある。]

【禁忌・禁止】


- 1) ディスポ体温プローブの再使用禁止。

＜併用医療機器＞

- 1) 電気手術器等の高周波発生源を使用するときは、本品を患者から外すこと。
- 2) MRI 装置の近く等、高磁場環境では使用しないこと。
[本品または MRI 装置等が正常に機能しないことがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成(代表図)

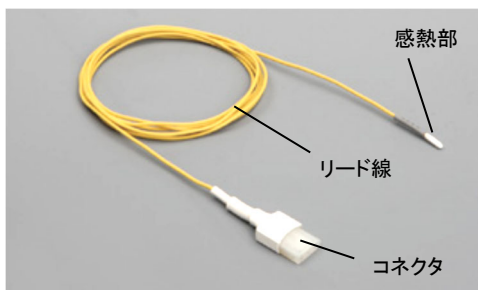

2. 仕様

コード No.	品名
21138	ディスポ体温プローブ(黄) 中心温用
21139	ディスポ体温プローブ接続ケーブル(黄) 中心温用
21140	ディスポ体温プローブ(白) 抹消温用
21141	ディスポ体温プローブ接続ケーブル(白) 抹消温用

3. 材質

感熱部:PVC、エポキシ樹脂

リード線:銅、PVC(被覆)

4. 動作原理

サーミスタにより温度変化を電気抵抗に変換し、接続した測定機器へ伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は測定器等と接続し、患者の体温を測定するためのプローブである。本品は単回使用である。

【使用方法等】

本品は、以下の機器と接続して使用する。

本品を接続して使用する機器に附属されている取扱説明書に従い使用すること。

コード No.	接続対象機器
21138	デュアル インキュ i インキュ i ラビーインキュ i アトム保育器 V-2200 アトム保育器 V-2100
21139	インファウオーマ i アトムインファウオーマ V-505 サンフラワーウオーマ アトムトランスカプセル V-808 アトムトランスカプセル V-707
21140	デュアル インキュ i インキュ i アトム保育器 V-2200
21141	アトム保育器 V-2100 インファウオーマ i アトムインファウオーマ V-505

【使用上の注意】

- 1) 本品を児の下に置いたり、直腸に使用しないこと。
- 2) ディスポ体温プローブは児の腹壁上に確実に装着すること。
- 3) ディスポ体温プローブがブランケット、おむつ、児の腕等で覆われて温められたり、尿や薬液等で濡れて冷却されないようにすること。

【保管方法及び有効期間等】

使用期限:外箱に記載[自己認証データによる]

保管条件:以下の条件下で保管すること。

保管温度 0～80℃

相対湿度 0～85%(結露なきこと)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL:048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)