

機械器具(06) 呼吸補助器
管理医療機器 CPAP キット 70579000

アトム CPAP 鼻孔カニューラ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。
[火災および爆発の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

・本品は、ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))
を使用している。

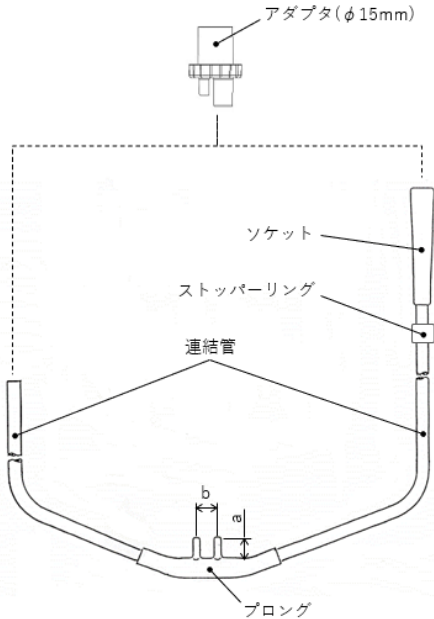

プロングサイズ	鼻孔挿入部	
	高さ a	間隔 b
L	8.0 mm	9.0 mm
M	7.5 mm	8.0 mm
S	7.0 mm	7.0 mm
SS	6.7 mm	6.4 mm

2. 体に接触する部分の組成

ポリ塩化ビニル

【使用目的又は効果】

本品は、ネーザル(経鼻式)CPAP 用回路に使用する鼻孔カニューラである。

【使用方法等】

- 1) 呼吸回路に下記のとおり本品を接続する。
 - ① 接続相手である呼吸回路が 2 本(呼気側・吸気側)の場合
本品のソケットおよび連結管に、必要に応じて適合する呼吸回路用コネクタ(本申請には含まれない)を接続した上で、それぞれの呼吸回路に接続する。
 - ② 接続相手である呼吸回路が 1 本の場合
本品のソケットおよび連結管を付属のアダプタに接続した上で、呼吸回路に接続する。
- 2) 本品のプロングを患者鼻孔に装着し、連結管を顔上方から頭側へまわす。必要に応じてストッパーリングで連結管を束ね、たるみを調節する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) ソケット、アダプタ及び連結管の接続の際は、奥まで確実に挿し込み、緩みや外れがないようにすること。
- 2) 本品の固定には絆創膏やサージカルテープ等の低刺激性のものを使用すること。また連結管と患者の肌が接触する箇所には保護剤等を使用することを推奨する。
- 3) 本品の使用前に、プロングの挿入向きが正しいことを確認すること。
- 4) 鼻孔挿入部が患者の鼻孔サイズに合わない場合は使用しないこと。
- 5) 本品使用時は定期的に患者の状態を確認すること。
- 6) 本品使用時は警報機能付きパルスオキシメータまたは警報機能付きカプノメータを併用すること。
- 7) 本品を折り曲げたり、ねじったり過度な力を加えないこと。
[破損や閉塞の原因となる。]
- 8) 定期的に本品の装着状態の確認を行うこと。
[装着部位が長時間圧迫されていると、褥瘡をおこすおそれがあるため]
- 9) 本品は 1 週間以内の使用を意図している。ただし、次の場合は新しい製品と交換すること。
 - ① 長期間の使用や薬剤の使用により硬くなった場合
 - ② 内部に凝固物が付着した場合 [閉塞のおそれがあるため]
 - ③ 本品が汚れた場合 [感染防止のため]
- 10) 使用済みのプロング鼻孔挿入部に接触した場合、接触部位を洗うこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水ぬれに注意し、高温多湿、直射日光を避けて保管する。

＜有効期間＞

使用期限は外箱に記載 [自己認証データによる。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL:048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)