

*機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 輸液ポンプ用延長チューブ 12170052

アトム延長用チューブ

再使用禁止

【警告】

- 1) 栄養ラインと輸液ラインが混在している状況下で本品を使用する場合は、誤接続しないように充分確認して使用すること。
- 2) 過度の内圧が生じるような送液は行わないこと。
[接続部の外れ、ゆるみの原因となるため。]


【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

・本品は、ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用している。

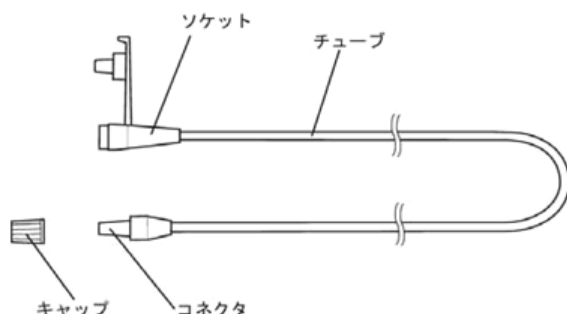

2. 体に接触する部分の組成

ポリ塩化ビニル

3. チューブ

フレンチサイズ	外径 (mm)	チューブ長 (cm)
4Fr	1.35	60
6Fr	2.0	

【使用目的又は効果】

本品は、各種輸液チューブ、吸引チューブ、カテーテル等の延長用として用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品のソケットおよびコネクタを接続相手側に確実に接続する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 1) 本品または接続相手側のコネクタおよびソケットに、異物や液体などを付着させないよう注意すること。
[接続のゆるみなどの原因となるため。]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 脂溶性の医薬品・栄養剤等ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがあるため、注意すること。なお、可塑剤としてフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)を使用しない代替品への切り替えを推奨する。
- *2) チューブを鉗子等の硬いもので挟まないこと。
- *3) チューブを注射針の先端、はさみ等の刃物、その他鋭利物等で傷つけないこと。
- *4) チューブを押し込んだり、折り曲げたりしないこと。また、チューブおよびチューブとの接続箇所は過度に引っ張らないこと。

- 5) ソケットへの接続は確実にを行い、漏れがないか定期的に確認すること。
- 6) ソケットへの着脱の際、チューブ部を引っ張って外さないこと。
- 7) キャップを閉める際は、キャップの外れや漏れが起こらぬよう確実にすること。
- 8) 使用後は、医療廃棄物として適切に処理・廃棄すること。

<妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用>

- 1) 可塑剤が溶出するおそれがあるため、可塑剤が溶出しない代替品の使用を推奨する。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、高温多湿、直射日光を避けて保管する。

<有効期間>

使用期限は外箱に記載[自己認証データによる。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL:048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)