

＊＊2025 年 10 月改訂（第 5 版）
＊2025 年 9 月改訂（第 4 版）

届出番号：13B1X00072001336

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 単回使用気管内チューブスタイレット 37469000

再使用禁止

GlideRite シングルユース スタイレット

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・再使用・再滅菌禁止。
 - ・本品の先端部を気管内チューブの遠位開口部より先に突出させないこと。[組織を損傷させるおそれがあるため。]
 - ・折り曲げたり、形状を変えて使用しないこと。[破損や事故の原因となるため。]
- <適用部位>
- ・本品が挿入された状態の気管内チューブを、声門に侵入させないこと。[声門や声帯を損傷させるおそれがあるため。]


【形状・構造及び原理等】

● 構成

- シングルユーススタイレット スモール
- シングルユーススタイレット ラージ
- シングルユーススタイレット ミディアム


● 形状、構造

- シングルユーススタイレット スモール

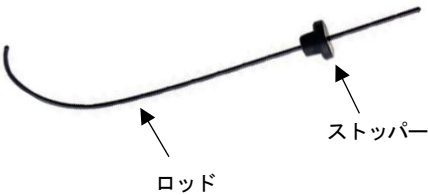


スモールは、3～4mm の気管内チューブで使用可能である。

- シングルユーススタイレット ラージ

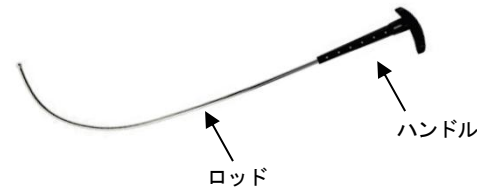

ラージは、6mm 以上の気管内チューブで使用可能である。

- シングルユーススタイレット ミディアム

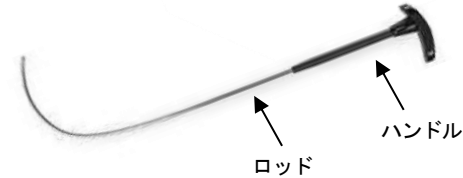

ミディアムは、4.5～5.5mm の気管内チューブで使用可能である。

● 血液・組織に接触する原材料

スモールのロッド：熱可塑性ポリアミドナイロンナイロン樹脂
ラージ/ミディアムのロッド：ステンレススチール

● 原理

本品はハンドル、ストッパーとロッドから構成され、ロッドを気管内チューブに挿入することにより、気管内チューブを安定させ、挿管を容易にする。本品のロッド部分は挿入補助に適した固有のカーブを有する。

【使用目的又は効果】

気管内チューブを安定させ、声帯の通過を容易にするため、挿管前に気管内チューブに挿入する。通過時に気管の損傷を防止するため、挿管完了後に抜去する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

*1. 使用前点検

- (1) 本品や本品の包装に損傷等の異常がないか確認する。

*2. 使用中の操作

- シングルユーススタイレット スモール


- (1) 本品を包装から取り出し、気管内チューブに挿入する。
- (2) 本品の先端が気管内チューブの先端にきたところでストッパーをスライドさせ、固定する。(下図のとおり)



- ＊＊ (3) 気管内チューブを声門手前まで挿入したら、親指でストッパーを外し、本品を気管内チューブから少し引き戻す。
- (4) 標準的な手順に従って気管内チューブを配置する。
- ＊＊ (5) 本品を気管内チューブから抜き取る。

- シングルユーススタイレット ラージ/ミディアム

- (1) 本品を包装から取り出し、気管内チューブに挿入する。この際、チューブの近位端がハンドルに固定される位置まで挿入する。
- (2) 気管内チューブを声門手前まで挿入したら、親指でハンドルを押し上げ、スタイレットを 5cm 程度引き戻す。その状態で気管内チューブを声門に通す。(下図参照)

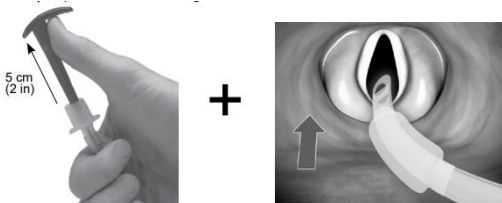

- (3) 標準的な手順に従って気管内チューブを配置する。
- (4) 本品を気管内チューブから抜き取る。

*3. 使用後の作業

スタイレットに損傷がないことを確認の上、施設のプロトコルに従い廃棄する。

<組み合わせて使用する医療機器>

本品は、下記製品又は同等な機能を有する製品と併用する。

販売名	届出、認証番号	一般的名称
グライドスコープ AVL・Titanium システム	230AIBZI00002000	ビデオ硬性挿管用喉頭鏡
グライドスコープ ディスプレイ システム	13B1X00072001331	挿管用喉頭鏡
グライドスコープ Spectrum ビデオ喉頭鏡	302AFBZX00097000	ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

【保管方法及び有効期間等】

＊ ＊ ● 保管環境

温度：18-28℃ 相対湿度：40-60%

● 有効期間

本品の包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

● 製造販売業者

株式会社アムコ

TEL：03-3265-4261

● 外国製造業者

業者名：ペラソンメディカル社 (Verathon Medical Canada ULC)

国 名：カナダ