

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 呼吸ガス混合器 36327009

エアロチャンバー 2 Go (円形 MDI 対応)

【形状・構造及び原理等】



●原材料

マウスピース：ABS 樹脂

【使用目的又は効果】

医薬品をエアロゾルとして患者が吸入する空気の中に噴霧するために用いる。

【使用方法等】

●使用方法

吸入

1. 使用前に本品に損傷や部品の欠損がないか確認する。
2. 内部に目視で確認できるほこりや残留物がないか確認し、ある場合は清掃してから使用する。
3. 初回の使用時は使用する直前に吸入器のキャップを取り外してから吸入器を振る。(図 1)
4. 吸入器をチャンバー底面の MDI 接続部から差し込む。(図 2)
5. 本品のキャップを外してからマウスピースをくわえ、ゆっくりと深く息を吸い始めながら、吸入器を押す。(図 3)
6. 吸入後、不快ではない程度に息を止めてから吐き出す。息を止めるのが難しい場合は、吸入器を押し、チャンバーを通じて 2 回呼吸を繰り返すだけでもよい。
7. 医師の指示に基づき定められた回数の吸入を繰り返す。

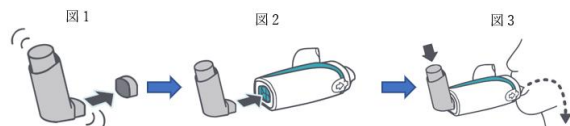


図 1

図 2

図 3

吸入器の保管

1. 本品のキャップとチャンバーを開ける。(図 4)
2. 吸入器を本品の中に入れ、開ける時とは逆の順番で閉じる。(図 5)

図 4

図 5



【使用上の注意】

●重要な基本的注意

- ・ 1 回の吸入につき 1 吸入分だけ噴霧すること。
- ・ 再度投与する際の間隔は医薬品に付属する指示に従うこと。
- ・ 1 週間に 1 回程度、本品を定期的に洗浄すること。
- ・ ソフトミスト型吸入器、ドライパウダー型吸入器、ネブライザーとは併用しないこと。[これらとの併用は想定されておらず、適切な投与量が得られない可能性があるため。]
- ・ 大人の監視がない状態で子供の手の届く範囲に置かないこと。[小さな部品が含まれており、誤飲による窒息のおそれがあるため。]
- ・ 5 歳未満の患者は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

●保管方法

- ・ 水のかからない場所に保管すること。
- ・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

●使用期間

本品の使用期間は 1 年である。1 年間使用した後には新しいものに交換すること。

【保守・点検に係る事項】

●使用前点検

- ・ 本品が清浄であること、正しく組み立てられていること、異物が混入していないこと、損傷や部品の欠落がないことを目視にて確認する。
- ・ 少しでも損傷や部品の欠落を確認した場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

●洗浄

- ・ 70℃を超える温度で煮沸、洗浄、乾燥しないこと。[本品が破損するおそれがあるため。]

<洗浄方法>

1. 本品のキャップを外してからチャンバーを開け、吸入器を取り出す。
2. 食器用の液体洗剤を加えたきれいなお湯に本品を入れてゆっくりと攪拌し、水で洗い流す。もしくは、食器洗浄機の上のラックに置き、通常または弱めの設定で洗浄させる。この際熱風による乾燥は使用しないこと。
3. 余分な水分を取り、自然乾燥させる。すぐに本品の使用が必要な場合は清潔な布で丁寧に拭くこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

●製造販売業者

株式会社アムコ
TEL：03-3265-4261

●外国製造業者

業者名：トゥルーデルメディカル社 (Trudell Medical International)
国 名：カナダ