

*2025 年 8 月改訂（第 2 版）
2025 年 7 月作成（第 1 版）

届出番号：13B1X00072001357

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 気腹用チューブ 70353000

再使用禁止

アスペンサージカル気腹チューブ

【禁忌・禁止】


● 再使用禁止。

〔気腹チューブのフィルタは、装置側から体腔内に異物が侵入することを防ぐだけでなく、体腔内のガスの逆流時に、体腔内の感染性ミストが装置側に流入し、再使用の際、装置を介して交差感染が発生するリスクを回避するために取り付けられている。従って、これを再使用した場合には重大な健康被害が発生する可能性があるため。〕

【形状・構造及び原理等】

●各部の名称及び寸法

代表例（バーブドフィッティング/オリンパス用）

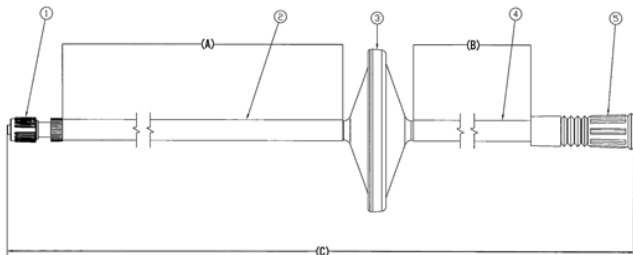

寸法 (A) チューブ（長）全長：2650mm

(B) チューブ（短）全長：150mm

番号	名称
①	ルアーコネクタ
②	チューブ（長）
③	フィルタ
④	チューブ（短）
⑤	接続コネクタ

各接続コネクタの形状（各コネクタ接続時の全長(C)）

1)ルアーフィッティング用（3139mm）



2)オムニフレータ/スミスアンドネフュー用（3133mm）



3)バーブドフィッティング/オリンパス用（3148mm）



4)ルアーフィッティング/ストルツウルフ用（3138mm）



【使用目的又は効果】

フィルタを含む柔軟なチューブであり、気腹装置と気腹針又はトロカールとの接続に用いる。

【使用方法等】

1. 本品及び本品の包装に破損又は汚損がないことを確認する。
2. 適切な接続コネクタを用いて気腹装置に接続する。
3. ルアーコネクタをトロカールカニューレに接続する。
4. 術中は気腹装置の取扱手順に従って使用する。
5. 使用後は施設の手順に従って廃棄する。

本品は一般的な気腹装置と併用する。

【使用上の注意】

●重要な基本的注意

- ・腹装置本体の点検を行い装置が正常に動作することを確認すること。
- ・使用前に、気腹装置とコネクタの互換性を確認すること。
- ・すべてのコード・チューブなどの接続が完全であることを確認すること。
- ・機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の動作を止めるなど適切な処置を講ずること。
- ・チューブの屈曲、閉塞、ねじれ等が発見した場合には、直ちにその状態を改善すること。
- ・チューブ内に血液や体液等の異物が混入した場合は、直ちに使用を止め、新品と交換すること。
- ・本品は、可燃性ガス及び可燃性ガス（亜酸化窒素ガス、酸素ガス等）のそばで使用しないこと。
- ・本品をトロカールカニューレから取り外した時又は廃棄する際は、ルアーコネクタなどが紛失していないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

●保管方法

* 保管温度：1～30℃（自社検証による）

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分を含んだ空気により悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

●使用期限

本品の包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

●製造販売業者

株式会社アムコ

TEL：03-3265-4261

●外国製造業者

業者名：アドバンスドメディカルデザイン社

(Advanced Medical Design Co., Ltd.)

国 名：台湾

気腹装置の取扱説明書を必ずご参照下さい。