

※2025 年 10 月（第6版）
※2025 年 3 月（第5版）

認証番号：223A1BZX00013000

機械器具 25 医療用鏡
管理医療機器 人工開口向け内視鏡用くもり止め 70177000
(自然開口向け内視鏡用くもり止め 70176000)

ドクターフォッグ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】


● 形状

<ドクターフォッグ>

表面



※裏面（剥離紙を剥がした状態）

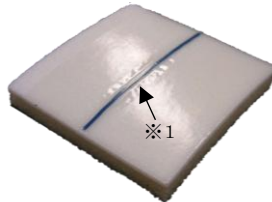

縦×横：5×5cm

※※1 X 線不透過性糸

※※<クリーナー>（非医療機器）

1. トロカールスワブ
 - (1) スモール



- (2) ラージ



シャフト・柄はX 線不透過性である。

2. マイクロファイバークロス



縦・横：150mm

● 原材料

本品は、アニオン性界面活性剤が含有されている。

● 原理

界面活性成分を内視鏡レンズ面上に塗布することにより、内視鏡と体内の温度差により生じる結露を防止する。


【使用目的又は効果】

内視鏡のレンズの結露を防止するために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

<ドクターフォッグ>

1. 本品及び本品の包装に破損、汚れ等、外観に異常が無いことを確認する。
2. 本品を包装から取り出す。
3. 裏面のシートを剥がし、清潔野の使用し易い位置に貼り付ける。
4. 使用する内視鏡のレンズ面を対角線方向へこすりつけるように移動させて界面活性成分を塗布する。（下図のとおり）

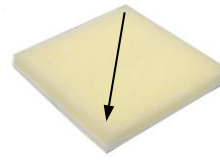

5. 使用後は、施設の protocols に従い廃棄する。

※<クリーナー>

1. 本品及び本品の包装に破損又は汚損がないことを確認する。
2. 必要に応じて内視鏡を取り出す。
3. マイクロファイバークロスでスコープレnzの汚れを拭きとる。
4. トロカールが腹腔内に完全に入っていることを確認した上で、適切なトロカールスワブ（5～8mm トロカール：スモール/8～12mm トロカール：ラージ）のフォームヘッドをトロカールへ挿入する。
5. トロカールスワブを前後に動かし、トロカール内の血液や体液等を吸収し汚れを取り除く。このとき、フォームヘッドがトロカールの先端からはみ出さないように注意する。
6. トロカール内を内視鏡がスムーズに通過するか確認する。通過しない場合は、この操作を繰り返す。
7. 使用後は、施設の protocols に従い廃棄する。

【使用上の注意】

● 使用注意

<ドクターフォッグ>

- ・ 内視鏡のレンズ面にスポンジの界面活性成分を塗布する際、レンズ面をひねりながらこすりつけないこと。[均一な防滴面が形成されないおそれがあるため。]
- ・ 本製品は保管環境によってスポンジが黄色く変色することがあるが、曇り止め成分に変化はないので、通常通り使用して差し支えない。

<クリーナー>

- ・ 内視鏡や腹腔鏡およびトロカールに、トロカールスワブやマイクロファイバークロスと干渉するような鋭利な部分がないか確認すること。[機器と干渉した場合、機器の損傷に繋がるおそれがあるため。]
- ・ トロカールスワブを斜めに挿入したり、トロカールの先端からはみ出したりさせないこと。[フォームヘッドの破片がトロカール内に残るもしくは体内に落下するおそれがあるため。]

【保管方法及び有効期間等】

● 保管方法

- ・ 水のかからない場所に保管すること。
- ・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

● 使用期限

本品の包装に貼付されているラベルに記載されている。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

● 製造販売業者

株式会社アムコ

TEL : 03-3265-4261

● 外国製造業者

製造業者：アスペンサージカル社 (Aspen Surgical Products, Inc.)

国 名：アメリカ合衆国