

類 別 : 器02 医療用照明器
一般的名称 : 移動型診療用照明器

販売名 : アミライト LED照明灯

【禁忌・禁止】

- 水滴のかかる状態、湿度の高いところ、濡れた手で使用しないこと。
- 取り付け、取り外しや器具清掃の際は必ず電源を切ること。
- 無理な力を掛けたり、急激な操作はしないこと。
- 長時間、光源を直視しないこと。
- レンズに指を触れないこと。
- レンズをアルコールで拭かないこと。

【形状・構造及び原理等】




LX-3019



LX-3000



LX-3101

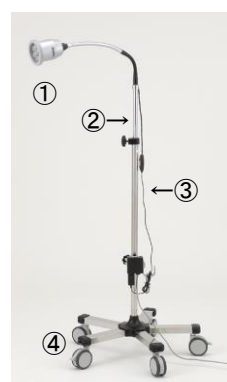

LX-3201



LX-4101



LX-4019

構成

- ① 照明部(笠部) ② 支柱内筒
③ 支柱外筒 ④ ベース部(脚部)

1) 本体の寸法及び重量

寸法 : LX-3019	520 × 520mm
: LX-3000	520 × 520mm
: LX-3101	520 × 520mm
: LX-3201	520 × 520mm
: LX-4101	460 × 460mm
: LX-4019	460 × 460mm

重量 : LX-3019	7.5kg
: LX-3000	7.5kg
: LX-3101	6.5kg
: LX-3201	6.5kg
: LX-4101	6.0kg
: LX-4019	6.7kg

高さ : LX-3019	1,100～1,900mm
: LX-3000	300～1,500mm
: LX-3101	1,100～1,800mm
: LX-3201	1,000～1,700mm
: LX-4101	800～1,600mm
: LX-4019	800～1,600mm

2) 電氣的定格

定格電圧 : AC100V(50/60Hz)

【使用目的、効果又は効能】

診療用照明器の特性を備える照明器であり、軽症の診察及び治療時に使用し、ある場所から別の場所へ容易に移動できるものである。

【品目仕様等】

1) 外観

目視検査にて表面に機能を損なうような欠陥、または汚染物を認めないこと。

2) 寸法

各部の寸法が図面交差の許容範囲内であること。

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 照明部(笠部)を持って照射光が診療に最適な位置・角度になるようにセットする。
- 2) 電源プラグを挿してスイッチを入れる。
- 3) 点灯後、照明部(笠部)の根元を持って照射光の微調整をする。

【使用上の注意】

- 1) 移動させる際は支柱外筒を持ち、転倒に注意すること。
- 2) 断線の恐れがあるので、電源コードを強く引っ張らないこと。
- 3) 長時間使用しない時には、電源コードをコンセントから外しておくこと。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 照明部(笠部)及び電源スイッチ、電源プラグは適宜ホコリをふき取ること。
- 2) 故障または異常が認められた時には、下記製造販売業者に点検(修理)を依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 : 株式会社新井製作所
住 所 : 埼玉県越谷市相模町2-122
電 話 番 号 : 048-986-2131

製 造 業 者 : 株式会社新井製作所 越谷工場

販売業者の連絡先