

NL カニユーラ S

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 本製品は 1 人の患者 1 回のみ使用し、再使用しないこと。
 - 本品に破損が認められる場合は使用しないこと。
 - 消毒液などの液体に浸して使用しないこと。
 - 直射日光のあたるところや車両の熱くなる場所で使用したり保管したりしないこと。
 - 製品ごとに定めた使用時間を超えて使用しないこと。
- <併用医療機器>
- 記載されたメーカ以外のモニタ製品では使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

本品は、患者の鼻又は口鼻から二酸化炭素をサンプリングする 24 時間連続使用可能な単回使用カニユーラである。すべて非滅菌である。

1. <構成>

名 称	使用時間 (H)	チューブ長さ (m)	品 番
NL 成人鼻カニユーラ S	24	2	7090121103
NL 小児鼻カニユーラ S	24	2	7090121104
NL 成人口鼻カニユーラ S	24	2	7090121115
NL 小児口鼻カニユーラ S	24	2	7090121116

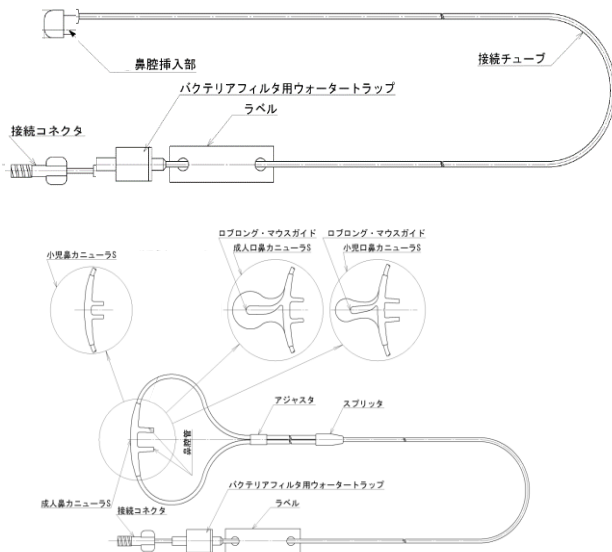

2. <各部の名称>

No.	名 称	形 状	
		成人	小児
1	鼻腔管		
2	“口” プロング及びフィルタ		
3	接続コネクタ (橙)		
4	アジャスタ		
5	スプリッタ		
6	ラベル (橙)		
7	バクテリアフィルタ用ウォータートラップ		
8	接続チューブ		
9	鼻腔挿入部		


【使用目的又は効果】

鼻又は口と鼻から非挿管患者の二酸化炭素濃度を測定するためのサンプリングチューブである。ラテックスフリーである。

*【使用方法等】

鼻及び鼻口カニユーラの使用の場合

- アジャスタ(チューブをまとめている輪)を下におろす。
- 2 本の鼻腔管を鼻又は鼻口にカニユーラを装着する。
- 鼻・鼻口の位置に合わせ調整しながらチューブを耳にかける。
- 2 本のチューブを耳にかけ、アジャスタを上にあげながら、あごの下に装着する
(鼻口カニユーラは口の部分か唇の前になるように装着する。)

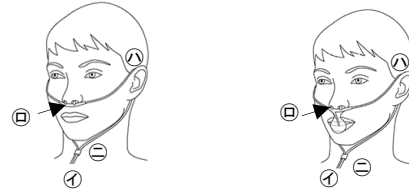

<コネクタ形状及び製品>

コネクタ形状	製品
	「パルスオキシ・カブノメータ N-85」(認証番号:218ADBZX00051000) 又はそれと同等の機器のみに接続して使用可能である。

【使用上の注意】

<重要な使用上の注意>

- ・ 本品を消毒液等に浸さないこと。
- ・ チューブをねじったり、折り曲げたりしないこと。

<一般的な使用上の注意>

- ・ 使用は 1 患者 1 回使用で、再使用しないこと。
- ・ チューブの引き回しに注意し使用すること [患者の体や首に絡まるリスクを避けるため]。また、チューブが捻じれないようにすること [チューブ閉塞の発生要因になる]。
- ・ 本品のチューブでモニタ本体を持ち上げたりしないこと。コネクタが抜けて患者に落下する恐れや、モニタの故障の原因にもなり得る。
- ・ 本品の使用可能時間内であっても、モニタに“サンプリングライン閉塞”等のチューブ閉塞によるエラーが発生した場合は、本品を交換すること。
- ・ 本品を分解、切断して使用しないこと。正しい CO₂ 測定値が得られない。
- ・ 使用済みの本品は施設あるいは地方自治体等の医療廃棄物の処理方法に従って廃棄すること。
- ・ 組み合わせて使用する医療機器又はそれと同等の機器の添付文書・取扱説明書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 気圧、温度、湿度などの悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- ・ 使用温度: 0℃~+50℃、15~95%RH
- ・ 保管温度: -20℃~+70℃、95%RH 以下
- ・ 使用期限: 外国製造所ラベル参照

【取扱い上の注意】

カニユーラの接続チューブ部分を強く引っ張ったり、曲げたりしないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用前に傷や汚れなどが無いことを確認する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社アイビジョン
電話番号: 03-5615-8612

<製造業者>

Bluepoint medical GmbH & Co. KG (Germany)
(ブルーポイント メディカル有限会社 (ドイツ連邦共和国))

※ 記載されている製品番号は、各該当製造会社の登録された名称または商標です。Bluepoint medical GmbH & Co. KG が該当各社から保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。