

**2025 年 05 月(第 4 版)
*2023 年 10 月(第 3 版)



機械器具(21)内臓機能検査用器具
一般医療機器:呼吸センサ JMDM コード: 70072000

再使用禁止

N L カブノライン

【禁忌・禁止】

- 本製品は 1 人の患者 1 回のみ使用し再使用しないこと。
- 本品を改造しないこと。
- 本製品を消毒液などの液体に浸して使用しないこと。
- 直射日光のあたる場所や車両の熱くなる場所で使用したり保管したりしないこと。
- 本製品に定めた使用可能時間を超過して使用しないこと。


*【形状・構造及び原理等】

本品は、患者の呼気ガスを採取するためのルアーロック付コネクタである。


1. <構成>

名 称	使用時間 (H)	チューブ 長さ(m)	品 番
N L カブノライン S	24	2	7090121142
N L カブノライン L	72	2	7090121143
接続チューブ (オス /オス)	—	2.5	8090121302


2. <形状及び名称>

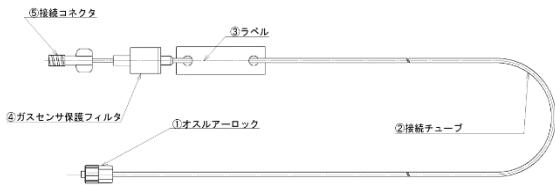

↑ NL カブノライン S

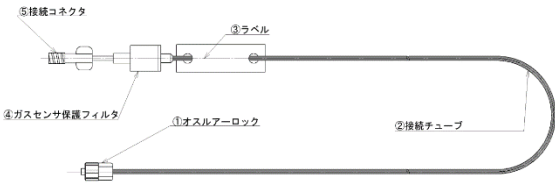

↑ NL カブノライン L

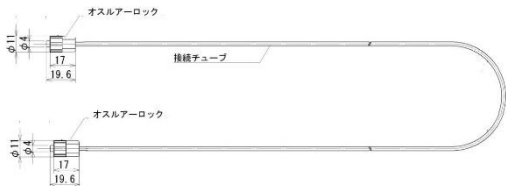

↑ 接続チューブ (オス /オス)

3. <原理>

挿管中の患者回路にアダプタを接続し、接続したアダプタのメス部分にオスルアーロックを取り付け、CO₂ガスをサンプリングする。すべて非滅菌である。

【使用目的又は効果】


本品はオスルアーロック、エアウェイアダプタのメスルアーロックにオスルアーロックを取り付け、CO₂ガスをサンプリングすることを目的とする。

【使用方法等】

[組合わせて使用する医療機器]

コネクタ形状	製品
	「パルスオキシ・カブノメータ N-85」(認証番号:218ADBZX00051000) 又はそれと同等の機器のみに接続して使用可能である。

- イ) 患者と呼吸回路等に合致するアダプタに接続する。
- ロ) 接続チューブをカブノメータに接続する。
- ハ) 挿管された人で呼吸を施されている患者に患者回路 Y ピースとスリップジョイントを外してアダプタを接続する。この際、アダプタのメスルアーロック部分が上にいくようにする。
- 二) アダプタのメスルアーロックにオスルアーロックを下記の矢印方向に接続する。
- ホ) 患者に異常がないかを確認する。

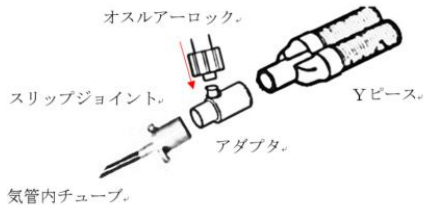

【使用上の注意】

<重要な使用上の注意>

- ・ 本品を消毒液等に浸さないこと。
- ・ チューブをねじったり、折り曲げたりしないこと。

<一般的な使用上の注意>

- ・ 使用は 1 患者 1 回使用で、再使用しないこと。
- ・ チューブの引き回しに注意し使用すること [患者の体や首に絡まるリスクを避けるため]。また、チューブが捻じれないようにすること [チューブ閉塞の発生要因になる]。
- ・ 本品のチューブでモニタ本体を持ち上げたりしないこと。コネクタが抜けて患者に落下する恐れや、モニタの故障の原因にもなり得る。
- ・ 本品の使用可能時間内であっても、モニタに“サンプリングライン閉塞”等のチューブ閉塞によるエラーが発生した場合は、本品を交換すること。
- ・ 本品を分解、切断して使用しないこと。正しい CO₂測定値が得られない。
- ・ 使用済みの本品は施設あるいは地方自治体等の医療廃棄物の処理方法に従って廃棄すること。
- ・ 組み合わせて使用する医療機器又はそれと同等の機器の添付文書・取扱説明書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

気圧、温度、湿度などの悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

- ・ 使用温度：0℃～+50℃、15～95%RH
- ・ 保管温度：-20℃～+70℃、95%RH 以下
- ・ 使用期限：外国製造所ラベル参照

【取扱い上の注意】

オスルアーロックの接続チューブ部分を強く引っ張ったり、曲げたりしないこと。

*【保守・点検に係る事項】

使用前に傷や汚れなどが無いことを確認する。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

＜製造販売業者＞

株式会社アイビジョン

電話番号：03-5615-8612

＜製造業者＞

Bluepoint medical GmbH & Co. KG(Germany)

（ブルーポイント メディカル有限会社）ドイツ連邦共和国

※ 記載されている製品番号は、各該当製造会社の登録された名称または商標です。Bluepoint medical GmbH & Co. KG が該当各社から保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。