



Teleflex®

** 2021 年 10 月改訂(第 3 版)

届出番号:13B1X00178000043

* 2015 年 7 月改訂(第 2 版 新記載要領に基づく改訂)

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 単回使用気管内チューブスタイレット(37469000)

SHERIDAN シェリスリップスタイレット

再使用禁止

**【警告】

次の患者には慎重に適用すること。
鼻腔、咽頭部に外傷、又は腫瘍がある患者。[外傷、腫瘍から出血等が生じるおそれがある。]

**【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止、再滅菌禁止
2. 本品が気管チューブの先端やマーフィー孔から飛び出ないように注意して、気管チューブに挿入すること。[気管や喉頭を損傷するおそれがある。]
3. チューブ外で曲げ伸ばしを行った時に硬く感じたり、表面に亀裂、ささくれ又はメッキのはがれが生じている場合は使用しないこと。[先端部が折損し気管内に落下するおそれがある。]

5. 気管チューブ挿管後は、本品を気管チューブから抜去する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:

水濡れ、高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管。

有効期間:

包装上に記載(自己認証データによる)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者


テレフレックスメディカルジャパン株式会社

カスタマーサービス Tel:0570-055-160

【形状・構造及び原理等】

*＜形状・構造等＞

本品は気管内チューブを気管へ挿入する際に、気管チューブの形状を安定させ、挿管を容易にするためのガイドとして用いられる器具である。

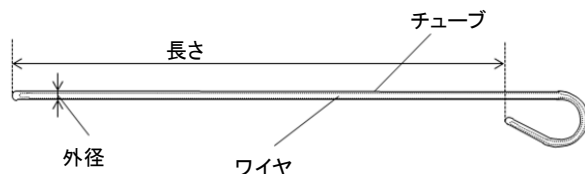

気管内チューブスタイレットの寸法表(単位:mm)

サイズ(Fr.)	品番	長さ	外径	適合チューブの内径※
5	5-15102	250	1.7	2.0-4.5
10	5-15101	340	3.3	5.0-10.0

※参考

＜原理＞

気管内チューブ内に挿入し、気管へ一緒に挿入することで気管内チューブの挿管を補助する。

＜材質＞

血液・体液・粘膜等に接触する部分の原材料を以下に示す。

チューブ: ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は気管内チューブを気管へ挿入する際に、挿管を容易にするためのガイドとして用いる。挿管完了後、抜去する。

【使用方法等】

1. 使用する気管チューブに適したサイズを選択する。
2. 使用前に本品に損傷、破損がないか確認する。
3. 本品を注意してパッケージから取り出す。
4. 本品が気管チューブの先端やマーフィー孔から飛び出ないように注意して、気管チューブに挿入すること。