



Teleflex®

** 2021 年 10 月改訂 (第 3 版)

認証番号: 222AFBZX00134000

* 2015 年 5 月改訂 (第 2 版 新記載要領に基づく改訂)

機械器具 30 結紮器及び縫合器
管理医療機器 単回使用ステープルリムーバ (16787002)
Weckstat スキンステープルリムーバ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

* <形状、構造等>

本品は、治癒過程が経過し、手術創又は切開部の縁が補助なしで結合している場合又はステープルが正しく打針されなかった場合に、ステープルを抜去するために用いるステープルリムーバである。

<各部の名称>

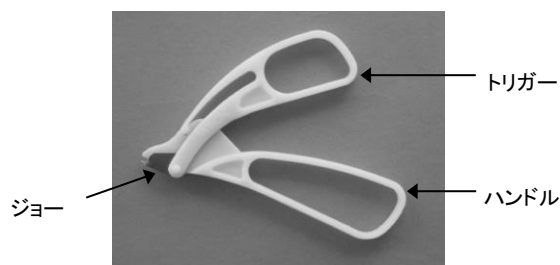

<材質>

ハンドル及びトリガー: ポリアセタール


ジョー: ステンレス鋼 (ニッケル、クロム含有)

【使用目的又は効果】

本品は、手術に使用する皮膚ステープルを抜去するために用いる。

【使用方法等】

1. ステープルリムーバの下側のジョーを、ステープルの下に差し込む。

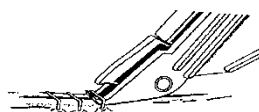

2. ハンドルとトリガーを完全に閉じるまで握り、ステープルを変形させる。
3. 変形したステープルを皮膚から持ち上げ、除去する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:

水濡れ、高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管。

有効期間:

包装上に記載 (自己認証データによる)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者

テレフレックスメディカルジャパン株式会社

カスタマーサービス Tel: 0570-055-160

製造業者

テレフレックスメディカル (米国)

Teleflex Medical