

機械器具(58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科精密アタッチメント固定用キット 70758000

マウンティングリムーバ

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ①本品や磁石構造体に、過度な応力、負荷、衝撃を与えないこと。
- ②本品を記載の使用目的以外で使用しないこと。

＜適用対象（患者）＞


- ①金属アレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。
- ②本品の使用により、発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ③本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本製品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

【形状・構造及び原理等】

〔形状、構造〕



外観写真

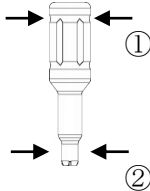

概略図

タイプ 名	寸法 (mm)	
	①	②
MRR-01	14	5.5

〔原材料〕

・ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用補綴物の作製時に、歯科用精密磁性アタッチメントを適切な位置に固定することを目的とする作業に用いる機器で、本作業中に他の機器を取り外す機器である。

【使用方法等】

対象品（販売名：マウンティングリング、医療機器製造販売届出番号：23B1X10004000004）を磁石構造体とともに通法にしたがい合着した義歯から対象品を取り外すために、本品と対象品を接触させ、反時計回りにねじり、対象品を取り出す。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品や磁石構造体に、過度な応力、負荷、衝撃を与えないこと。
- ②本品記載の使用目的以外で使用しないこと。
- ③必要に応じて、使用前に、本品を洗浄及び滅菌等の処理を行なう。

市販の研磨剤未含有かつ金属に影響を与えない医療機器洗浄剤の指示に従い適切な洗浄を行った後、流水下で十分洗浄し、完全に洗浄剤を洗い流す。その後すぐに水分を拭取り、滅菌バッグに入れて滅菌する。

滅菌法：高圧蒸気滅菌すること。

予備真空がある場合：

温度：132～134℃

暴露時間：4 分間以上

処理後すぐに水分を拭取ること

予備真空がない場合：

温度：132～134℃

暴露時間：20 分間以上

処理後すぐに水分を拭取ること

- ④使用前に本品の状態を確認し、欠損等の問題がある場合に

は使用しないこと。

- ⑤本品を加工しないこと。

- ⑥本品を使用する際に磁石構造体へ傷をつけないこと。

- ⑦本品を用いて、対象となる器具が外れない場合は、磁石構造体を傷付けないように慎重に対象となる器具を取り外すこと。

- ⑧対象となる器具を取り外す際に、弾いたり飛び出したりする恐れがあるため、注意すること。

- ⑨製品の仕様については改良のため断りなく変更する場合がある。

- ⑩本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ①直射日光を避け、水濡れのない常温、常湿で保管すること。
- ②鉄粉、ほこり等のない環境に保管すること。
- ③酸、アルカリ等化学薬品にさらさないこと。

【取扱い上の注意】

- ①変形や欠損させないように取り扱うこと。

【保守・点検に係わる事項】

〔使用者による保守点検事項〕

- ①使用前に本品の状態を確認し、欠損等の問題がある場合には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者：愛知製鋼株式会社

住 所：〒476-8666

愛知県東海市荒尾町ワノ割 1 番地

電話番号：0120-34-0632（フリーダイヤル）