

エクセローデW TEH-O4DAW

再使用禁止

【警告】

＜適用対象（患者）＞

異常が発見された場合は、ただちに患者が安全であるように機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じてください。

＜使用方法＞

医師または医師の指示を受けた者以外は、本製品を使用しないでください。

【禁忌・禁止】

併用医療機器

**・磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）と併用しないでください。
[MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。]「相互作用」の項参照


使用方法

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状

図は TEH-O4DAW

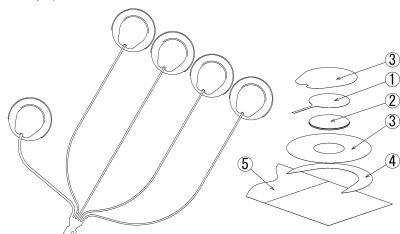

No	名称
1	電極
2	電解質
3	粘着テープ
4	セパレーター
5	ライナー

種類

No	型 式	備 考
1	TEH-O4DAW	一般用電極

No	型 式	収納電極 (1 セット)
1	A-180	TEH-O4DAW 1 袋
2	ASH-160	TEH-O4DAW 1 袋

1 セット毎にホルタ検査消耗品付（医療機器含まない）
・乾電池 ・鉛筆 ・行動記録カード
他の医療機器以外のものについては 1 セット収納袋へ記載

作動・動作原理

体表面に設置し、体表面の心電信号を心電波形処理装置（心臓の活動電位（1mV 程度の微弱な電圧）を波形グラフで表示する）に伝達する導体である。この活動電位を記録する一般的な装置は、心電計（ECG）である。本製品は単回使用である。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は体表に設置し、体表の電気信号を心電計に伝達する導体である。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- ECG モニタリング及び検査手順に従って、電極の貼付部位を選択し、皮膚の前処理をしてください。
- 皮膚の前処理は、電極の貼付部を清潔にし乾燥させ、脂分を取り除いてください。分けることが難しい濃い、あるいはカールした体毛部は除毛してください。
- 本製品のアルミ包装を破り、電極を取り出します。
- ライナーから電極をセパレーターごと剥がし、前処理した皮膚上にのせて、粘着テープにシワがよらないよう指で上から円を描くように押さえて肌に密着させます。中心部を強く押さないように注意してください。
- 更にセパレーターを円を描くように剥がし、粘着テープの外周にシワがよらないように指で押さえて肌に密着させます。
- 患者および被検者に電極を貼付した後、中継コードを電極に接続します。

- 電極を剥がす際は、皮膚の損傷を最小限に抑えるために、電極の端よりゆっくりと剥がしてください。

【使用上の注意】

重要な基本的使用注意

- **・指定の機器以外、接続しないでください。指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認するか、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。[本来の性能や機能が損なわれ、重大な事故を引き起こす可能性があります。]
- **・本製品は指定のフクダ電子製ホルタ心電計、中継コードとの組み合わせにより入浴が可能です。指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。
- ・入浴の際は湯温 40℃以下、10 分以内としてください。高温で長時間浴槽につかると発汗により電極剥がれやノイズの原因となります。
- ・入浴の際、電極部は手やタオルで強くこすらないでください。電極剥がれやノイズの原因となります。
- ・サウナ、ジャグジーバス、入浴剤を入れた浴槽、温泉地では使用しないでください。電極剥がれや誤作動の原因となります。
- ・皮膚障害のある部位への貼付は避けてください
- **・使用前に心電図の波形が正常に表示されることを確認してください。
- **・測定時には中継コード、機器、電極等が押さえつけられ、体を圧迫していないことを適宜確認して下さい。[血流を阻害し、圧迫壊死が生じることがあります。]
- **・ご使用の際には、アルミ包装に記載されている使用期限をご確認ください。
- ・アルミ包装を開封した後は、ゲルが乾燥しやすいので早めにご使用ください。
- **・皮膚処理後は、皮膚が乾燥しているのを確認してから電極を貼ってください。[電極剥がれの原因となります。]
- ・電極はシワがよらないように肌へ貼りつけてください。シワがよっていると電極剥がれの原因となります。
- ・ご使用中皮膚に発赤、腫れなどの症状が現れたときは使用を中止してください。
- **・万が一、誤飲されますと体内で滞留する可能性があるため、取り扱いにご注意ください。
- ・他の型式の電極と一緒に使用すると、安定した波形を得られないことがあります。
- **・本製品は滅菌できません。

**相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）	使用禁止	MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- **直射日光の当たる場所、水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所を避けて、指定温度範囲内の場所に保管してください。特に湿度、塩分、硫黄分の多い雰囲気には放置しないでください。
- ・保管温度：5～35℃

使用期限

アルミ包装に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 アイ・メデックス

連絡先（販売業者）

フクダ電子株式会社

〒113-8483 東京都文京区本郷 3-39-4

電話番号：03-3815-2121（代）