

類別:機械器具(58) 整形用機械器具
一般医療機器 一般の名称:脊椎手術用器械 70963001

販売名:アーセナル スパイナル フィクセーション システム器械セット

【禁忌・禁止】

〔適用対象〕(次の患者には使用しないこと)

- 1)骨髄炎や敗血症等の感染症の患者
〔患部に病巣が移り、良好な手術結果が得られないため〕
- 2)オステオポロシス等の骨質不良の患者で、医師が、本品を用いて埋植する医療機器を十分に支持できないと判断した患者
〔本品を用いて埋植する医療機器を適切に支持できず、良好な手術結果が得られないため〕

〔併用医療機器〕

本品は、製造販売業者が指定する医療機器以外と併用しないこと。
〔製造販売業者が推奨しない医療機器は、安全性が担保されず、不具合・有害事象の原因となるため〕(相互作用の項を参照)

【形状、構造及び原理等】

本品は、以下の構成品よりなる。

なお、本添付文書に該当する製品の製品番号、サイズ等については、包装表示ラベル又は本体に記載されているので、確認のこと。

原材料:ステンレススチール、シリコーン樹脂、ポリフェニルサルホン、ポリエーテルエーテルケトン

No	製品名	形状・構造例
1	ストップ オウル	
-	オウル	
2	ヤコブス ドリルビット	
-	ヤコブス ドリル	
-	ドリル	
3	ストレート プローブ ホールハンドル	
-	ストレート プローブ エッグハンドル	
-	カーブド プローブ ホールハンドル	
-	カーブド プローブ エッグハンドル	
4	ホールチップ プローブ	
-	ホールチップ プローブ カーブド	
5	タップ	
-	ヤコブス タップ	
-	ペディクルマーカ タップ	
6	ラチェッティング アクシヤルハンドル	
7	ポリアクシヤル スクリュードライバー	
-	リダクションスクリュー ドライバー	
-	ロックンク ポリアクシヤル スクリュードライバー	
-	ロックンク ポリアクシヤル リダクション スクリュードライバー	
-	セルフリテーニングドライバー	

No	製品名	形状・構造例
-	ブリッジインサーター	
-	ブリッジドライバー	
-	ダブルサイド セットスクリュー インサーター	
-	セットスクリュー ドライバー	
-	セットスクリュー インサーター	
-	ペディクルマーカ タップ インサーター	
8	ポリアクシヤル ヘッドアシヤスター	
9	トルク リミッティング T ハンドル	
-	トルク インディケイティング T ハンドル	
-	アルファテック ラチェッティング T ハンドル	
-	トルク リミッティング T ハンドル	
10	アンチトルク	
-	ブリッジ アンチトルク	
11	フレンチ ロッドベンダー	
-	In Situ ロッドベンダー	
12	マルチパーパス フォーセプス	
13	アクシヤルリデュサー	
-	リデュサー	
14	アクシヤルリデュサー アンチトルク アダプター	
-	ヘックスアダプター	
-	ドライバー アダプター	
-	リダクション ツール	
15	ロッドロッカー	
16	ロッドプッシャー	
-	リダクションスクリュー ロッドプッシャー	

取扱説明書を必ずご参照下さい。

No	製品名	形状・構造例
17	パレレル コンプレッサー	
18	パレレル デイストラクター	
-	スクリーシャック デイストラクター	
-	モジュラー ヒンジド デイストラクター	
19	ロッドテンプレート	
20	ボリアクシャルスクリュー リモビライザー	
21	ピストル パースエーター	
22	ロッドクリッパー	
23	ボリアクシャル プロビショナル ロッキング ツール	
24	ブリッジ ゲージ	
25	ブリッジ キャリパー	
26	リタクシオンスクリュー タブリング	
27	モジュラー コンプレッサー	
28	モジュラーチップ	
-	ワイド モジュラーチップ	
29	ドリルガイド	
30	カウンタートルク	
31	モジュラーヒンジド デイストラクター チップ	

原理: 脊椎固定術等において、脊椎材料を挿入/抜去するための補助をする手術器械である。

【使用目的又は効果】

脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる手術器械をいう。手動式のものに限る。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

本品は未滅菌であるため、使用前には適切な方法で洗浄し、下記条件又は各医療機関で検証された条件により高压蒸気滅菌を行う。

サイクル	プレバキューム
温度	132℃
時間	4 分以上
乾燥時間	30 分以上

使用方法（基本的手技の例）

1. スクリュー 刺入位置を決定し、オウル、プローブ、ペディクルサウンダーを用いて骨孔を作製する。
2. プローブやペディクルサウンダー等でスクリュー長を決定する。
3. 適切なサイズのタップを用いて、意図した深さまでタッピングする。
4. 適切なサイズのスクリーューを選択し、ドライバーを用いてスクリーューを刺入する。
5. ロッドテンプレートで適切な長さとし、適切な長さのロッドを選択する。必要に応じてロッドベンダーを用いて、適切な形状になるまでベンディングを行う。また、必要な場合は、ロッドカッターを用いて適切な長さに切断する。
6. 適切なサイズのロッドをインサーター又はフォーセプスを用いて挿入する。
7. セットスクリーューをドライバー又はインサーターを用いてスクリーューヘッドへ取り付ける。
8. 必要に応じて、ロッドプッシャー又はロッドロッカー又はリデュースャー又はパースエーターを用いて、ロッドのリダクション操作を行う。
9. 必要に応じて、コンプレッサー、デイストラクターを用いて整復操作を行う。
10. セットスクリーューに対してトルクレンチを用いて最終締結を行う。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

(1) 術前の注意

- 医師は、全ての医療機器が準備されていることを確認し、医療機器が適切に作動するか、確認すること。
- 医師は、患者へ手術に伴うリスクと得られる効果を具体的に説明し、同意を得ること。
- 医師は、脊椎手術の埋植技術を習得してから使用すること。手術手技は、時間と共に、より有効な手術方法が開発されていくため、学術論文や最新の手術手技書等から埋植技術について情報を入手し、手技に反映させること。
- 医師は、脊椎の MRI 画像、X 線画像診断等により、本品の使用が適切であるか、術前に判断すること。
- 本品と共に使用する医療機器の添付文書及び取り扱い説明書を熟読すること。
- 洗浄に際しては、隙間部を血液溶解剤で十分にすすぎ、超音波洗浄装置を用いて洗浄し、その後滅菌すること。【嵌合部の血液塊等異物が除去しきれない恐れがある】【保守・点検に係る事項】の項参照)

(2) 術中の注意

- 医療機器は、全て無菌的に取り扱うこと。
- 医師は、常に患者の血圧や麻酔の状態を観察し、手術を執刀すること。
- 医療行為であっても、医療機器の性能・能力を越える用途で使用しないこと。又、破損・折損等の不具合の原因となるため医療機器の状態を常に観察し、使用時に過度な力(応力)を医療機器に加えないこと。
- 創部の縫合前に、手術前に準備された医療機器が全て揃っているか、また医療機器の部品が脱落等していないか、確認すること。

(3) 術後の注意

- 本品の使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥する前に、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 医師は、患者にリハビリテーションのための運動や今後の治療方針、生活上の制限等についての注意事項を文書で患者に渡し説明すること。
- 定期的なフォローアップは必須であり、X 線診断、診察等を行い、本品を用いて、埋植した医療機器が適切に機能しているか確認すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に使用すること)

- (1) 糖尿病等の代謝障害のある患者
[感染が発生し、患部の遅延治療が発生しやすいため]
- (2) ステロイド療法、免疫抑制剤等の全身薬物療法を受けている患者
[オステオポロシス等が進行し、術後骨折が発生しやすいため]
- (3) う歯等の局所的な感染を有する患者[術後、局所感染部から患部に病巣が移ることがあり、本品を用いて埋植する医療機器を適切に支持できないため]
- (4) 患部に重度の変形のある患者[矯正が十分でなく、本品を用いて埋植する医療機器を適切に支持できないため]
- (5) 患部に骨腫瘍がある患者[本品を用いて埋植する医療機器を適切に支持できないため]
- (6) 肥満症及び体重過多の患者[患部に過度の負担がかかり、本品を用いて埋植する医療機器を適切に支持できないため]
- (7) 肉体的労働、活動性の高い患者[本品を用いて埋植する医療機器に過度な負担がかかり、マイグレーション、折損等が発生するため]

取扱説明書を必ずご参照下さい。

- (8) 医師の指導を守らない患者、アルコール、麻薬中毒患者及び精神障害のある患者〔術後管理が不十分になることが多いため〕
- (9) 他関節に障害のある患者〔患部に過度な負荷がかかり、本品を用いて埋植する医療機器を適切に支持できないため〕
- (10) オステオポローシスまたは骨質不良の患者〔本品を用いて埋植する医療機器を適切に支持できないため〕
- (11) 高齢者（「高齢者への使用」の項を参照すること）

2. 重要な基本的注意 *

- (1) 鋭利な部分のある医療機器は、取扱者が怪我をする可能性があり、また鋭利な部分は破損・変形しやすいため、特に取扱いに注意すること。
- (2) 使用後は、直ちに、骨片、血液・体液等を除去し、医療従事者への感染防止のため、洗浄・消毒すること。
- (3) 過度な力による変形、または経年の度重なる使用による力（応力）により疲労破壊を起こすことがあるので、使用前に点検を行い、異常が見られたら使用せず、適切な処置を行うこと。
- (4) 医療機関内において、正しく整備・校正及びバリデーションされた滅菌器を使用し、日本薬局方 高圧蒸気滅菌法を使用して滅菌すること。
- (5) 電気メスをを用いた接触凝固は、感電、火傷をする危険性あり、また医療機器を損傷するため、本品と共に電気メスは使用しないこと。
- (6) 錆取り・熱やけ除去作用のある洗剤により、表面光沢や陽極酸化皮膜が、変色することがある。
- (7) 汚れが付着したまま、医療機器を滅菌すると、汚れの固着や無菌性保証の低下がおこる。また、錆の原因にもなるため、滅菌前に汚染箇所を入念に洗浄し、汚れが付着していないことを確認すること。
- (8) ハイリスク手技又はプリオン病が疑われる患者に使用された器械には、「プリオン病感染予防ガイドライン」に記載の感染予防策を実施する。本品の再生処理として推奨する方法は、以下の通り。
 - 1) 中性洗剤による十分な洗浄を行い、器械表面に付着したプリオンを物理的に除去する。内腔・可動部のある器械には、超音波洗浄装置を使用する。
 - 2) 可能であれば、中性洗剤を使用したウォッシャーディスインフェクターによる洗浄を行う。
 - 3) プリバキューム式高圧蒸気滅菌（134℃/18 分間）を実施する。

3. 相互作用

併用禁忌・禁止（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
製造販売業者が推奨しない医療機器	機能不良、磨耗、破損、マイグレーション、再骨折等が発生する。	医療機器が、正しく設置できず、良好な手術結果を得られない。

4. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合・有害事象は、以下のとおりである。

- (1) 重大な不具合
 - 以下のような不具合が現れた場合は、適宜、必要な処置を行うこと。
 - ・破損、折損
 - ・動作不良
- (2) 重大な有害事象
 - 以下のような有害事象が現れた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。
 - ・早期、遅発性感染
 - ・塞栓（脂肪、血液等）
 - ・二次骨折
 - ・金属アレルギー等の過敏症
 - ・麻痺
 - ・マイグレーション
 - ・メタローシス
 - ・ストレスシールドディングによる骨吸収

5. 高齢者への使用

- (1) 過度のリリーングや力を加えることにより、術中、術後に骨折が発生する可能性が高いので、注意すること。
- (2) 本品を用いて埋植する医療機器によって骨吸収が発生しやすいため術後の観察を十分に行うこと。
- (3) 転倒等によって、再骨折する可能性が高いので、術後の観察を十分に行うこと。


6. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への使用

特に治療上の有益性が、手術によっておこる危険性を上回ると医師が判

断した場合のみ、使用すること。〔妊婦、産婦、授乳婦等に対する安全性は、確立していないため〕

【保守・点検に係る事項】

- (1) 本品使用後は、できるだけ早く以下の(9)に従って、洗浄、すすぎ等の汚染除去を行い、血液等異物が付着していないことを目視で確認したのち、【操作方法又は使用方法】の項に示す「滅菌方法」及び「滅菌条件」で滅菌を行い保管すること。
- (2) 汚染除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- (3) 本品使用前に必ず【操作方法又は使用方法】の項に示す「滅菌方法」及び「滅菌条件」で滅菌を行うこと。
- (4) 本品使用前に、きず、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ、接合不良等の不具合がないか、外観検査を実施すること。
- (5) 洗浄装置（超音波洗浄装置等）を使用するときには、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- (6) 超音波洗浄装置を使用するときには、洗浄時間、手順等は使用する装置の取り扱い 説明書を遵守し、器具の隙間部に異物等がないことが確認できるまで洗浄すること。
- (7) 洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- (8) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。洗浄にはやわらかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属たわし、クレンザー（磨き粉）は器具の表面が損傷するので汚染除去及び洗浄時の使用はしないこと。
- (9) 使用する前には隙間部を血液溶解剤で十分にすすぎ、超音波洗浄装置を用いて洗浄し、滅菌すること。〔嵌合部に付着した血液塊等異物が除去しきれない恐れがある〕特に隙間部は異物が残りやすいので、異物がないことを確認すること。
- (10) 中空の製品を使用する前に、中空部分を血液溶解剤で十分すすぎ、超音波洗浄装置にて洗浄し、滅菌すること。〔中空部に付着した血液塊等異物が除去しきれない恐れがある〕異物が残りやすいので、異物が無いことを確認すること。
- (11) 以下の図で例示するような製品を使用する前に、隙間部を血液溶解剤で十分すすぎ、超音波洗浄装置にて洗浄し、滅菌すること。〔嵌合部に付着した血液塊等異物が除去しきれない恐れがある〕特に隙間部分（→部）は異物が残りやすいので、異物が無いことを確認すること。

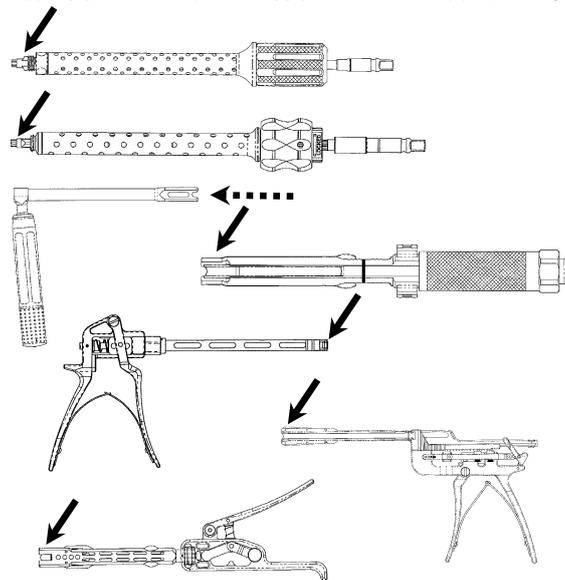

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】***、*

- ・製造販売業者：グローバスメディカル株式会社
電話番号：03-6402-3311
- ・製造業者：ALPHATEC SPINE INC.
国名：アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照下さい。