

インフュージョンカニューレ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品はディスポーザブル製品なので、1回使用のみで、絶対に再使用しないこと。

<有効期間>

本品の2次包装に別途記載。

【形状、構造及び原理等】

裏面参照

【使用目的又は効果】

眼科網膜硝子体疾患の治療において、薬液・灌流液・粘弾性物質等の注入又は吸引に用いる。

【使用方法等】

1272AD、1272BD、1272FD、1272GD、1272TFD、1272TGD：本品のコネクターに既存の注射筒またはチューブを接続する。眼球切開創を通してカニューレ先端部を硝子体部位へ挿入し、薬液・灌流液の注入又は吸引を行う。

1272ASD、1272BSD：本品のコネクターに既存の注射筒またはチューブを接続する。眼球切開創を通してカニューレ先端部を硝子体部位へ挿入し、粘弾性物質の注入又は吸引を行う。

1272H0.5：本品のコネクターに既存の注射筒またはチューブを接続する。穿刺針により眼強膜に切開創を作りカニューレを装着させる。カニューレを通してカニューレ先端部を硝子体部位へ挿入し、薬液・灌流液の注入又は吸引を行う。注入または吸引を行わない時はプラグによりカニューレを閉じる。

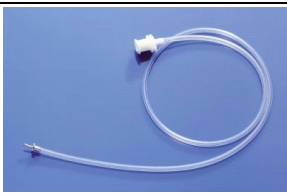
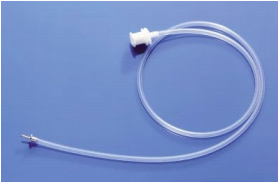
【使用上の注意】

- ・本品を眼球から脱去する際は、必ずシリコンチューブの接続部を鉗子等で把持して行うこと。
- ・チューブがチューブ保持部から外れる恐れがあるため、チューブを過度に引っ張らないこと。
- ・本品は眼科手術に使用すること。
- ・1次包装、2次包装されており、1次包装に汚れ、破損、開封等がない事を確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

直射日光、塵芥、高温、多湿を避けて保管すること。

 1272AD デイスホ° インフュージ° ヨンカニユレ 4. 0mm	 1272BD デイスホ° インフュージ° ヨンカニユレ 6. 0mm	 1272FD コロベ° ルニツク氏セルフリテイング° インフュージ° ヨンカニユレ 5. 0mm
 1272GD コロベ° ルニツク氏セルフリテイング° インフュージ° ヨンカニユレ 4. 0mm	 1272ASD デイスホ° インフュージ° ヨンカニユレ 4. 0mm シリコンオイル用	 1272BSD デイスホ° インフュージ° ヨンカニユレ 6. 0mm シリコンオイル用
 1272H0. 5 デイスホ° トロカールシステム 25G 用	 1272TFD デイスホ° トルナンベ° 氏セルフリテイング° インフュージ° ヨンカニユレ 5. 0mm 23G	 1272TGD デイスホ° トルナンベ° 氏セルフリテイング° インフュージ° ヨンカニユレ 4. 0mm 23G

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造業者 D. O. R. C. International b. v.

オランダ ドルク社

製造販売業者 アールイーメディカル株式会社



RE MEDICAL, Inc.

本 社：〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番29号

TEL (06)-4794-8220(代表)