

機械器具 4 7 注射針及び穿刺針

管理医療機器 単回使用眼科手術用カニューレ 34899032

眼科手術用滅菌済み注射針・カニューレ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品はディスポーザブル製品なので、1 回使用のみで、絶対に再使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

裏面参照

他に該当する一般の名称：

単回使用眼科手術用チューブ付カニューレ 34899022

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、眼科手術（網膜硝子体手術、白内障手術）において既存の注射筒又はチューブを接続し、薬液・灌流液等の注入又は吸引に用いる。

A：眼科手術前処置時の局部麻酔用注射針

B：前房内用灌流洗浄液注入針

C：水晶体囊切開用切開刀付注入針

D：水晶体核分離用注入針

E：皮質吸引用カニューレ

F：灌流・洗浄液の吸引と注入を行うカニューレ

G：水晶体囊研磨と灌流洗浄液吸引のための注入針

H：涙管用カニューレ

I：屈折矯正手術用の注入針

J：網膜硝子体手術用吸引注入カニューレ

【使用方法等】

- ・針基に既存の注射筒又はチューブを接続する。
- ・眼球切開創を通して注射針・カニューレ先端部又は先端チップを眼球内へ挿入し、薬液・灌流液等の注入又は吸引を行う。

【使用上の注意】

- ・ニードルに傷が付かないよう、取扱いや保管には充分注意すること。
- ・保護キャップは、実際に使用するまで取りはずさないこと。
- ・ニードルの眼内への挿入時に、先端を曲げないように注意すること。
- ・1次包装、2次包装されており、1次包装に汚れ、破損、開封等がないことを確認する。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・直射日光、塵芥、高温、多湿を避けて保管すること。

＜有効期間＞

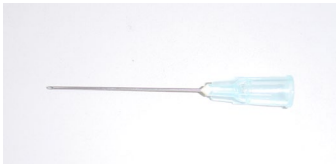
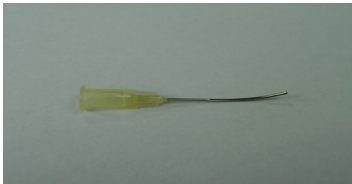
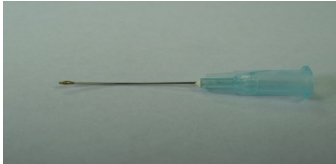
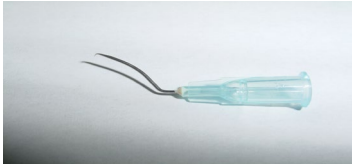
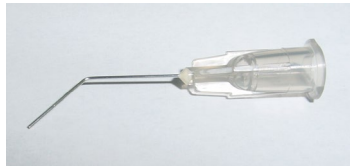
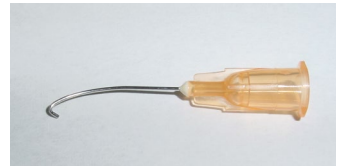
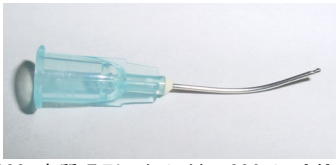
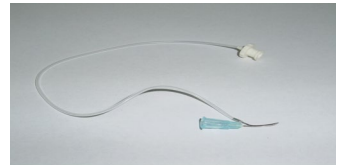
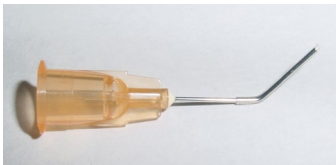
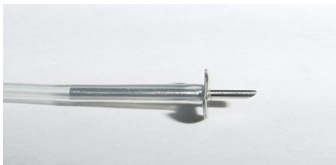
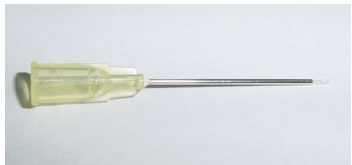
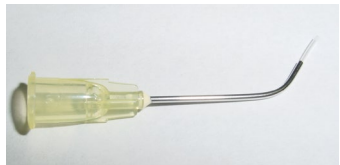
本品の2次包装に別途記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造業者＞

Hurricane Medical, Inc.

アメリカ ハリケーン メディカル社

 1023 眼球周囲麻酔針 フトキンソン氏 23G	 1320 テノン嚢下カニューレ 20G	 2520 前房モニター 20G
 2623 オリーブ型チップ カニューレ 23G	 3023 灌流 シストーム 23G	 3125 灌流 シストーム 逆 25G
 4025 ハイトロディセクター ピアース 平曲 25G	 4427 ハイトロディセクター ラウンド 曲 27G	 4625 ハイトロディセクション コリドン氏 25G
 5023 皮質吸引 エクストラクター 23G トップポート	 5425 J字型 皮質吸引 エクストラクター 曲 25G	 5623 I&A カニューレ シムコ 23G
 6025 ソフトチップ カニューレ 25G	 6323 J字型 カフセルホリッシャー ソートン氏 23G	 7127 イリゲーター 4ポート 平 27G
 7501 硝子体網膜注入カニューレ 20G 2.5mm	 7520 硝子体用ブラシ	 7720 網膜下液カニューレ 曲 20G (6mm)



製造販売業者
アールイーメディカル株式会社
 RE MEDICAL, Inc.
 本 社 :
 〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番29号
 TEL (06)-4794-8220(代表)