



* 2024年 2月（第3版）
2016年11月（第2版）新記載要領に基づく改訂

届出番号 13B1X00062SPC004

医療用品 30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 縫合糸ガイド（JMDN：36129000）

メドライン縫合糸ガイド

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

* 本品は、外科医の縫合の位置決めを容易にするために、鉗子の先端に装着して使用する。本品は、放射線不透過性である。

- スタンダード
- ラージ

〈カートリッジ〉

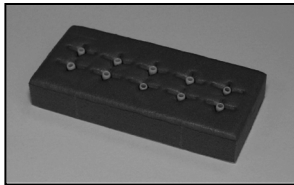

〈スーチャーブーツ〉



【使用目的又は効果】

外科医の縫合の位置決めを容易にするために開放創の上に配置する器具である。

【使用方法等】

- 本品を滅菌包装より無菌的に取り出す。
- カートリッジから剥離紙を取り除き、粘着テープ面を清潔な台などに貼り付け固定する。
- 適切な鉗子にスーチャーブーツを差し込み、鉗子の先端に装着し、カートリッジから外す。

本品はディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用のみで再使用できない。

【使用上の注意】

* 〈重要な基本的注意〉

- 使用前に、外観上の損傷、汚れがないことを確認すること。
- 適切なサイズを選択すること。[破損・落下の可能性ある]

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：水濡れに注意し、直射日光、紫外線、熱源、X線、高温多湿を避けて保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
メドライン・ジャパン合同会社
電話（03）5842-8800