



* 2024年12月（第2版）
2016年11月（第1版）

届出番号 13B1X00062SYR001

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 手動式生体用洗浄器（JMDN：34630000）

メドライン バルブシリンジ (バルブタイプ)

再使用禁止


【禁忌・禁止】
再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
メドライン・ジャパン合同会社
電話（03）5842-8800

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

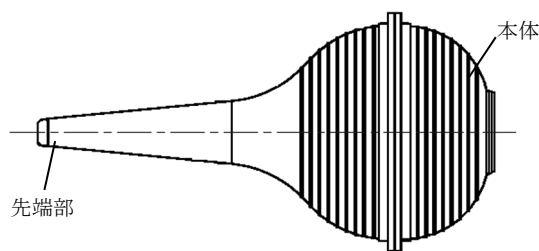

本体容量：30mL、60mL、90mL
材質：ポリ塩化ビニル

本品は、ポリ塩化ビニル(可塑剤：フタル酸ジ 2-エチルヘキシル)を使用している。

2.原理

本体の圧縮後、開放時の復元力を利用して生理食塩水または唾液等の吸引を行い、再度本体を圧縮することにより目的部位の洗浄または内容物の排出を行う。

【使用目的又は効果】

身体の一部に適用する液体を噴出する装置をいう。衛生状態の維持又は治療の一環として用いる。手動式である。

【使用方法等】

1. 本品はディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用のみで再使用できない。
2. 本体を握り圧縮した後、開放した時の復元力を利用して生理食塩水または唾液等の体液の吸引を行う。
3. 本体内部に吸引物がある状態で、再び圧縮すると吸引物が先端部より放出されることにより、患部の洗浄もしくは吸引物の排出を行う

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- * 1. 本品を使用する前に必要に応じてエチレンオキサイドガス滅菌を行うこと。
- 2. 使用前に、外観上の損傷、汚れや動作不良がないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：水濡れに注意し、直射日光、紫外線、熱源、X線、高温多湿を避けて保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。[自己認証(自社データ)による]