

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 (70887000)

再使用禁止

スキャンボディ

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止 (対象構成部品: カムログ スキャンボディ、コーンログ スキャンボディ、バーアバットメント スキャンキャップ)
- ・再滅菌禁止 (対象構成部品: カムログ スキャンボディ、コーンログ スキャンボディ、バーアバットメント スキャンキャップ)

【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造

本品は、歯科印象採得時に使用する医療機器である。

(1) スキャンボディ

① カムログ スキャンボディ (滅菌済み、単回使用)

直径	商品コード
3.3	K2610.3310
3.8	K2610.3810
4.3	K2610.4310
5.0-6.0	K2610.6010



② カムログ スキャンボディ マルチユース

直径	商品コード
3.3	K2630.3300
3.8	K2630.3800
4.3	K2630.4300
5.0-6.0	K2630.6000



③ コーンログ スキャンボディ (滅菌済み、単回使用)

直径	商品コード
3.3	C2600.3310
3.8/4.3	C2600.4310
5.0	C2600.5010



④ コーンログ スキャンボディ マルチユース

直径	商品コード
3.3	C2630.3300
3.8/4.3	C2630.4300
5.0	C2630.5000



(2) スキャンポスト

① カムログ スキャンポスト

直径	商品コード
3.3	K2620.3306
3.8	K2620.3806
4.3	K2620.4306
5.0	K2620.5006
6.0	K2620.6006



② コーンログ スキャンポスト

直径	商品コード
3.3	C2620.3306
3.8	C2620.3806
4.3	C2620.4306
5.0	C2620.5006



(3) バーアバットメント スキャンキャップ

① バーアバットメント スキャンキャップ
(滅菌済み、単回使用)

直径	商品コード
3.3/3.8/4.3	J2610.4300
5.0	J2610.6000



② バーアバットメント スキャンキャップ マルチユース

直径	商品コード
3.3/3.8/4.3	J2630.4300
5.0	J2630.6000



2. 原材料 **

名称	原材料
カムログ スキャンボディ コーンログ スキャンボディ バーアバットメント スキャンキャップ	PEEK
カムログ スキャンボディ マルチユース コーンログ スキャンボディ マルチユース スキャンポスト バーアバットメント スキャンキャップ マルチユース スクリュー	チタン合金

【使用目的又は効果】*

歯科印象採得に使用する医療機器である。

【使用方法等】*


1. 使用方法

(1) スキャンボディ

- ① 本品を作業模型内のインプラントアナログ (※a) あるいは口腔内のフィクスチャ (※b) にスクリューで装着する。
- ② デジタル印象を採得する。
- ③ デジタル処理によるワックスアップを行う。

(2) スキャンポスト

- ① 作業模型内のインプラントアナログ (※a) もしくは口腔内のフィクスチャ (※b) に、適切な直径の本品を装着する。
- ② スクリューを用いて固定する。
- ③ 本品の上にシロナ スキャンボディ (※c) を装着する。このとき、本品との間に隙間ができないようにしっかりと挿入すること。また、本品とシロナ スキャンボディのマークが一致になることを確認すること。

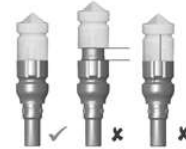

- ④ デジタル印象を採得する。
- ⑤ シロナ スキャンボディを取り外し、スクリューを緩めて本品を取り外す。

(3) スキャンキャップ

- ① 本品を作業模型内のアナログ (※d) あるいは口腔内のブリッジ用アバットメント (※e) に付属スクリューで装着する。
- ② デジタル印象を採得する。
- ③ デジタル処理によるワックスアップを行う。

※既承認・届出医療機器

	販売名	届出番号
a	インプラントアナログ	27B1X00027000081
b	カムログインプラント K-シリーズ	22200BZX00868000
	コーンログ インプラントシステム	22900BZX00154000

c	シロナ スキャンボディ	13B1X10118000028
d	カムログ インブランチ補綴用器具	27B1X00027000026
e	カムログアバットメント	21200BZY00583000

2. 滅菌方法**

通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。
推奨する滅菌温度及び時間は以下のとおり
121℃ / 20 分 もしくは 134℃ / 5 分

カムログ スキャンボディ、コーンログ スキャンボディ、パー
アバットメント スキャンキャップは滅菌済みのため、滅菌せず
に使用すること。

[使用方法に関連する使用上の注意]
折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221
製造業者： Altatec GmbH(アルタテック GmbH)
ドイツ