

2013年 7月 5日作成

医療用品 5 副木
一般医療機器 16210000
手・指用副木

製造販売届出番号 : 13B3X00474000001

呉氏副木

【禁忌・禁止】

使用方法

- 1) 再使用禁止
- 2) 本品をハサミでカットした場合、紙板のカット面に直接肌が触れないようすること。

〔怪我の原因となる〕


【形状・構造等】

1. 種類・規格

種 類	規 格	
	厚さ×幅×長さ	適応部位
特 大	3mm×6.6cm×38cm	手
大	3mm×5.5cm×33cm	手
中	3mm×4.5cm×29cm	手
小	3mm×3.5cm×24cm	手
極 小	3mm×3.5cm×21cm	手
特 小	3mm×3.5cm×19cm	手
紙 副 木	1.3mm×30cm×30cm	指・手

2. 構造

本品は楯板に和紙寒冷紗を接着させた呉氏副木である。

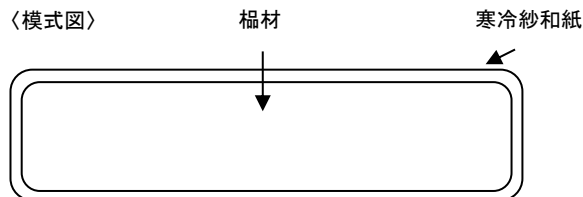

【性能・使用目的・効能又は効果】

手・指の骨折や挫傷等の固定に用いられる。

【操作方法又は使用方法等】

1. 適応サイズの選定

患部に応じて適切なサイズの本品を選定します。

2. 装着方法

- 1) 本品を曲げ、患部の形状に合うように成形します。
- 2) 必要に応じてハサミを使い、本品を適切な大きさにカットします。楯板をカットする場合はケバがでないように注意し、そのカット面はテープや包帯等で保護してください。
- 3) 和紙、寒冷紗面を肌側に当て、粘着テープや弾力包帯等を使用して患部に密着するよう固定します。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

患部に皮膚障害（感染創、潰瘍、発疹、腫脹等）がある患者。本品を使用する場合は、局所管理を十分に行い、慎重に使用してください。

〔症状を悪化させるおそれがあります〕

2・不具合・有害事象

本品使用中に皮膚障害と思われる症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置をしてください。

3・その他の注意

本品に破損、変形、汚染等がある場合は使用しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、室温保管してください。

【包装】

種 類	入 数
特大	1包装 200枚入り
大	1包装 250枚入り
中	1包装 250枚入り
小	1包装 250枚入り
極小	1包装 250枚入り
特小	1包装 250枚入り
紙 副 木	1包装 50枚入り

【製造販売業者及び製造業者の指名又は名称及び住所等】

1. 製造販売業者

株式会社 ア カ オ
東京都葛飾区青戸4-25-12

2. 連絡先

株式会社 ア カ オ
〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-25-12
お客様相談室: ☎03(3603)3605