

機械器具 35 医療用はさみ
一般医療機器 眼科用せん刀（JMDN コード：35327001）

網膜硝子体マイクロ剪刀

【禁忌・禁止】

- ・ 改造しないこと。
- ・ 本品に異常がある場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

①マイクロ水平剪刀（カーブ）



〔先端部形状〕



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2 3 G a	0.63mm	34.5mm	147.5mm
2 5 G a	0.5mm	30mm	143mm
2 7 G a	0.4mm	30mm	143mm

②マイクロ垂直剪刀



〔先端部形状〕



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2 3 G a	0.63mm	34mm	147.5mm
2 5 G a	0.5mm	29mm	142mm

③オオジ氏マイクロ水平剪刀（アングル）




〔先端部形状〕



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2 3 G a	0.63mm	34.5mm	147.5mm
2 5 G a	0.5mm	30mm	143mm

④クサカ氏マイクロ垂直剪刀

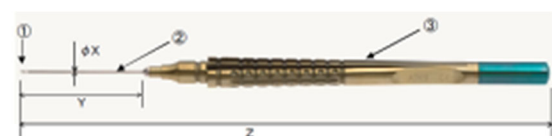

〔先端部形状〕



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2 3 G a	0.63mm	34mm	147mm

⑤クサカ氏マイクロ垂直剪刀（ロングブレード）



〔先端部形状〕



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2 3 G a	0.63mm	34mm	147mm

⑥サトウ氏マイクロ水平剪刀



〔先端部形状〕



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2 3 G a	0.6mm	30mm	143mm

⑦ホリオ氏マイクロ水平剪刀



〔先端部形状〕



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2 5 G a	0.5mm	30.5mm	143.5mm

【使用目的又は効果】

眼科手術において眼組織等を切断するために用いる。

【使用方法等】

1. 滅菌方法

本製品はエチレンオキシドガス滅菌器又は高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）を用いて滅菌を行う。
滅菌条件等の詳細は、取扱説明書を参照のこと。

2. 使用方法

- ・ ハンドル操作により、先端部をコントロールし、眼組織等の切断を行う。
- ・ 使用後は速やかに洗浄、消毒、滅菌を行う。
洗浄、消毒、滅菌の手順等の詳細は取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

- 使用前には外観上の損傷や動作不良がないことを確認すること。
- 包装から取り出す際、及び使用后、洗浄、消毒、滅菌時には先端部（刃先等）に十分注意して取り扱うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管すること。
- 直射日光や水漏れは避けるよう細心の注意を払うこと。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者： ルミバードメディカルジャパン株式会社
TEL 03-5859-0470
製造所： Katena Products, Inc. (カテナ社)
(アメリカ合衆国)