

2013 年 11 月 25 日
2019 年 4 月 15 日（第 2 版）
2025 年 6 月 23 日（第 3 版）
2025 年 10 月 22 日（第 4 版）

医療機器届出番号：13B2X10121000224

器 61 歯科用ハンドピース


歯科技工用電動式ハンドピース 70746000

一般医療機器


ミニモニターモバイル

【形状・構造及び原理等】


1.ミニモニターモバイル1セパレートタイプ

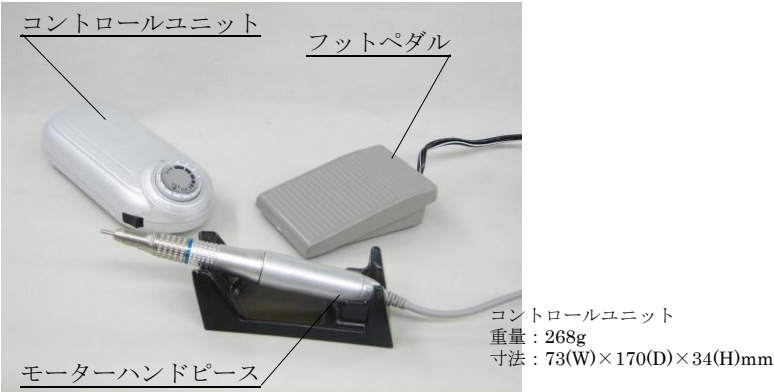

2.ミニモニターモバイル1スタンダードタイプ

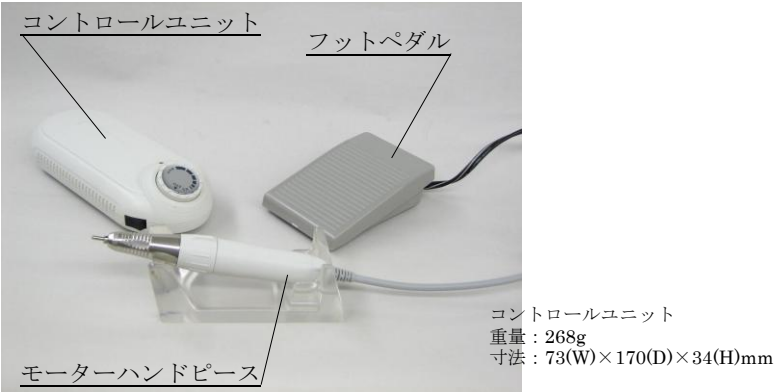

3.ミニモニターモバイル1ハイスピードタイプ

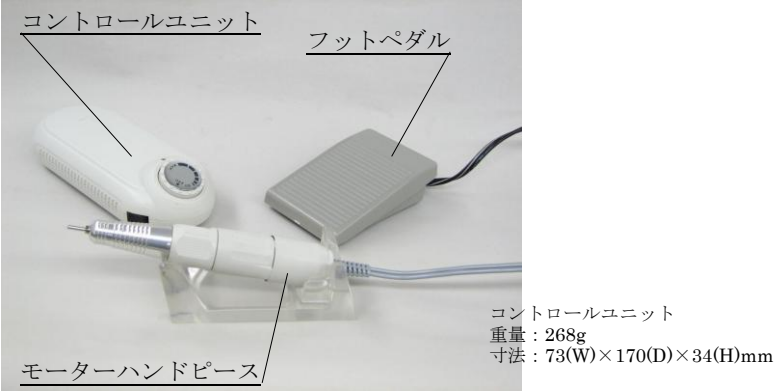

4.モバイル2 ワンピースタイプ (Pセット)



5.モバイル2 セパレートタイプ (Eセット)



【品目仕様等】

(1)コントロールユニット：(1・2・3)

電源入力・・・100V 50/60Hz

バッテリータイプ・・・Ni-Mh

コントロールユニット：(4・5)

電源入力・・・100～240V 50/60Hz

バッテリータイプ・・・Li-ion

(2)モーターハンドピース

(1・セパレートタイプ)

回転速度・・・0～25,000 回転/分

(2・スタンダードタイプ)

回転速度・・・0～20,000 回転/分

(3・ハイスピードタイプ)

回転速度・・・0～33,000 回転/分

(4・5 モバイル 2

ワンピース / セパレートタイプ)

回転速度・・・0～30,000 回転/分

【使用目的】

歯科技工における切削研磨作業に用いる。

【操作方法、使用方法】

- ①切削時は安全、健康のため防護めがね、研磨ボックス、バキューム等を使用すること。
- ②モーターハンドピースの表面は室温よりも 10～20 度くらい高く、内部は 60 度くらいの温度で作動しておりますが 作業内容や状況によってさらに高くなることもあります
- ③本機は室温 0 度から 40 度の範囲内でご使用ください。
- ④ご使用環境に可燃性のガス・液体・腐食性のガスなどがないことをご確認ください。
- ⑤専門技術者以外が修理・整備を行いますと事故の原因となりますので絶対に行わないでください
- ⑥定期的に消耗部品の交換・点検・保守・整備が必要です。ベアリングは消耗品ですので、1000 時間を目安に交換・整備に出してください。
- ⑦本機には給油を一切しないでください。加熱・故障の原因となります。
- ⑧本機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ⑨本機使用中熱くなりましたら休ませてください。過熱したままご使用になりますと本機の寿命が短くなる恐れがあります。加熱したモーターハンドピースを長く持っていますと低音やけどをする恐れがあります。
- ⑩工具の取り付け長さを厳守してください。スリーブ及び先端工具の軸は必ず最後（一番奥）まで差し込んでご使用ください。工具の軸取り付け長さは 13mm 以内とし、軸が曲がったり、キズのあるもの、芯の出ていない工具は使わないでください。傷害を負う恐れがあります。
- ⑪本機運転中にチャックの開閉をしてはいけません。部品が磨耗・寿命低下・破損します。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1)貯蔵・保管方法

水の掛からない場所に保管すること。

2)耐用期間

製造の日から、正規の保守点検を行った場合に限り 7 年間とする。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書を参照すること。

【包装】

1 箱の中に【形状・構造及び原理等】に示す構成品と付属品

【製造販売業者及び製造業者の氏名または住所等】

アルゴファイルジャパン株式会社

〒：101-0054

住所：東京都千代田区神田錦町一丁目 7 番地

錦町一丁目ビル 3 階

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129

SMT