

2026 年 4 月（第 1 版）

器 25 医療用鏡
一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具（38819001）

ディスポーザブル散布チューブ AL

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

1. 内視鏡視野が確保されていない状態で、本品を内視鏡に挿入しないこと。[粘膜損傷及び本品の破損が起るおそれがある]
2. 本品を内視鏡へ勢いよく挿入、抜去しないこと。[粘膜損傷による出血や内視鏡の破損のおそれ、又は付着した患者の血液や粘膜などの物質が飛散し、感染などに繋がるおそれがある]


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

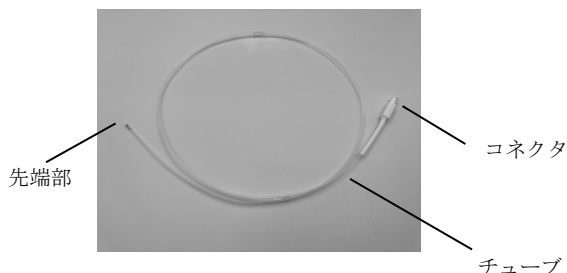

2. 先端部形状

噴霧タイプ



3. 先端部形状と挿入部有効長および最大径の組合せ表

先端部形状	製品番号	挿入部有効長 (mm)		挿入部最大径 (mm)	
		1600	2300	1.8	2.4
噴霧タイプ	AF-D2416PB	○			○
噴霧タイプ	AF-D1816PB	○		○	

＜原材料＞

ポリテトラフルオロエチレン、ステンレス鋼

＜原理＞

チューブの先端部に孔をあけたノズルを設けた製品であり、薬液等を送入することができる。

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡治療時に内視鏡とともに使用する器具で、人体の自然開口部を通じて薬用液の送入等の機械的作業に用いるものである。

【使用方法等】

1. 使用方法例

- 1) 本品を汚染に十分注意しながら包装内より取り出す。
- 2) 薬液等が入ったシリンジ等をコネクタに接続し、チューブ内を薬液等で満たす。（プライミング）
- 3) 内視鏡の鉗子口に本品を挿入し、内視鏡視野下で先端部を確認後、目的部位へ薬液等を散布する。
- 4) 散布後、本品を鉗子口から抜き取る。
- 5) 感染、汚染に注意しながら、安全に廃棄する

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- ・ 本品の包装や本品に何らかの異常がある場合、本品を使用しないこと。
- ・ 抵抗に反して本品を挿入しないこと。本品を内視鏡チャンネルに挿入するため角度の曲げを少なくすること。

＜組み合わせて使用する医療機器＞

本品と組み合わせて使用可能な医療機器は以下である。

本品の挿入部最大径 (mm)	併用する内視鏡のチャンネル最小径 (mm)
1.8	2.0
2.4	2.8

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 代替品を用意しておくこと。
2. 本品に過度の力をかけないこと。また本品の挿入部が曲がっていないことを確認すること。
3. 内視鏡の視野を確保した状態で、本品の先端の位置を確認しながら、ゆっくりと慎重に本品の挿入等の操作をすること。
[穿孔や粘膜損傷のおそれがある]
4. 本品を内視鏡チャンネル内に挿入している際、抵抗を感じたら内視鏡の角度をできるかぎりまっすぐにして挿入すること。
[内視鏡及び本品の破損のおそれがある]
5. 使用中に本品の先端部を内視鏡の先端部から出し過ぎないこと。[本品が折れて破損するおそれがある]
6. 本品を内視鏡からゆっくりと引き抜くこと。

＜不具合・有害事象＞

1. その他の不具合
本品の破損、変形、チューブのキンク、噴霧不良、コネクタの破損
2. 重大な有害事象
破損片の体内遺残、感染、穿孔
3. その他の有害事象
組織・皮膚の炎症、出血、裂傷、粘膜損傷

【保管方法及び使用期間等】

＜保管・貯蔵方法＞

直射日光を避け、涼しくて乾燥している場所での保管すること。

<有効期間>

使用期限は製品の包装に表示されている。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社アダチ

大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2番10号

TEL：06-6942-3371

製造業者

Alton (Shanghai) Medical Instrument Co., Ltd

(アルトン (シャンハイ) メディカル インスツルメント社)

国名：中華人民共和国