

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 34864000

ブラバンバン


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

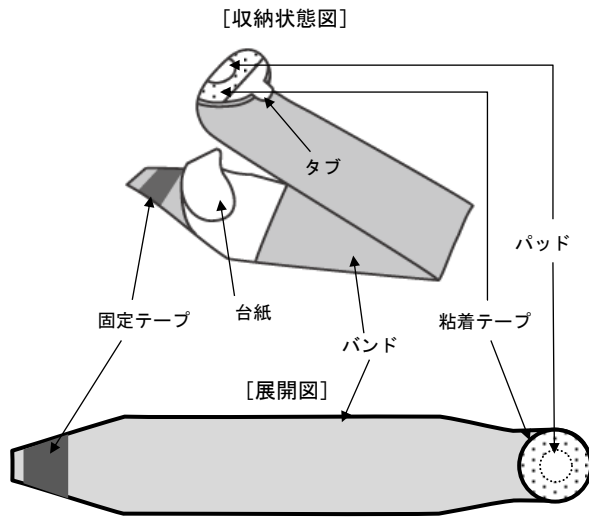

＜構造＞

本品は、接着剤を塗布した布製の絆創膏材にパッドを付し、さらに圧迫固定により止血操作を補助する伸縮性のバンドを備えたものである。

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

- ①袋を開けて本品を取り出す。
- ②タブを持って粘着テープを台紙から剥がす。
- ③創部がパッド部分の中心になるように貼り付ける。
- ④タブを取り除き、粘着テープを皮膚に密着させる。
- ⑤創部に適度な圧力がかかるようにバンドを巻き付ける。台紙を剥がし、巻き終わりを固定テープで固定する。
- ⑥必要時間が経過し、十分な止血を確認した後、ゆっくりとバンドを取り外す。
- ⑦粘着テープ、パッドを用いて引き続き創部の保護をする。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・本品使用中に皮膚障害（発疹・発赤・かゆみ等）が生じた場合には、直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- ・本品使用中に創傷部位に感染が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- ・本品使用中に、濡れたり汚れたりした場合や、血液や滲出液等のにじみが見られた場合、直ちに新しいものと貼り替えること。

- ・バンドを必要以上に伸ばして貼ると、うっ血の原因となるので注意すること。
- ・医療機関により定められた時間を過ぎてバンドを巻き続けないこと。
- ・剥がしたときは、止血していることを必ず確認すること。止血が不十分だった場合は、用手圧迫止血等の適切な処置を行うこと。

2. その他の注意

- ・粘着テープを剥がす際は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくり剥がすこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・高温・多湿、直射日光及び紫外線の当たる場所を避けて室温にて保管すること。
- ・水濡れに注意。

2. 有効期間

- ・外箱に表示〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売元＞

株式会社アグリス
〒834-0055 福岡県八女市鵜池 477-1
TEL 0943-30-1177