

再使用禁止

アルゴ医療用スポンジ

【警告】

1. 本品は未滅菌品です。本品を患者へ使用する場合、本品を（医療用）滅菌包装紙で包装し、エチレンオキシドガス滅菌をしてから患者へ使用すること。[未滅菌品の使用で患者へ感染等の重大な影響が発生する可能性がある。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。


【保管方法及び有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

本品を保管するときは、次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

【形状、構造及び原理等】

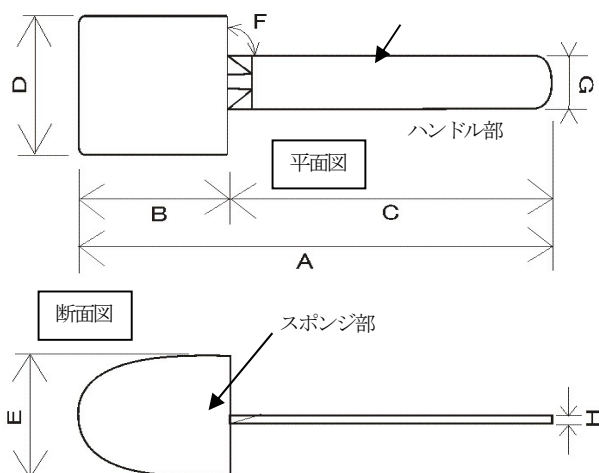

寸 法

箇所	単位	規格値	箇所	単位	規格値
A	mm	155±10%	E	mm	20～35±10%
B	mm	40～45±10%	F	mm	R90±10%
C	mm	115±10%	G	mm	15±10%
D	mm	40±10%	H	mm	3±10%

【使用目的又は効果】

本品は、様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる高分子製のスポンジである。

【使用方法等】

1. 本品を患者へ使用する場合、本品を（医療用）滅菌包装紙で包装し、エチレンオキシドガス滅菌をしてから患者へ使用すること。
2. 本品を患者へ使用する時、本品を清潔区域で使用し包装外側と接触しないように取り出す。
3. 本品のスポンジ部に薬物を浸漬させ、身体部位に薬物を塗布する。
また、身体部位の液を本品のスポンジ部へ吸収させて液を除去する。
4. 本品の使用を完了した場合、医療施設の所定手順に従い廃棄する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ・本品の材質及び粘着材を使用しているため、患者の個人差で皮膚刺激または皮膚に異常が見られた場合、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

【製造販売業者】

アルゴキュアシステム株式会社
愛知県豊田市花園町屋敷198-2
TEL 0565-51-0533 FAX 0565-51-0528
ホームページ <http://www.argocs.co.jp/>

【製造業者】

株式会社長谷川綿行 師勝工場
愛知県北名古屋市二子四反地977-2
ホームページ <http://www.hasemen.co.jp/>

【製造業者】

吾興株式会社 広島工場
広島県広島市安佐北区深川2-34-1

【製造業者】

吾興株式会社 九州工場
福岡県北九州市若松区響町1-42