


再使用禁止

アルゴ静脈ライン用フィルタ

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1.形状、構造

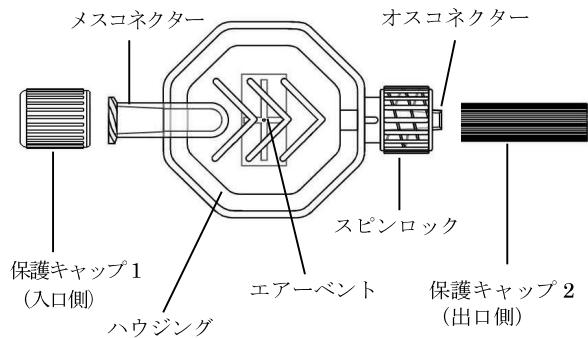

構成部品		材質
ハウジング		ABS 樹脂
親水性フ ィルター	A-6601	ポリエチレンテレフタレート 孔径 1.2μm
	A-6602	ポリエチレンテレフタレート 孔径 0.2μm
	A-6606	ポリエーテルスルホン 孔径 0.2μm
エアーベントフィルタ		ポリテトラフルオロエチレン

【使用目的又は効果】

輸液セット等に接続して、医薬品中の微小異物、細菌又は真菌の除去に用いる。

【使用方法等】

- 滅菌包装に損傷がないか確認する。
- 包装を開封し、本品を取り出す。
- プライミングを行う。
 - フィルタ入口側のメスアークネクターについている保護キャップ 1 を外す。
 - プライミングされた輸液セット、延長チューブ等の機器と速やかに接続する。
 - フィルタ出口側のオスアークネクターについている保護キャップ 2 を外す。
 - フィルタの出口側（オスアークロック側）を上垂直に保持し、徐々に空気を追い出しながらプライミングを行う。
- 薬液を注入する。
 - 本品内が薬液で完全に満たされたことを確認する。
 - カテーテルや留置針等の患者側に使用される機器のメスアークネクターに接続する。
 - 薬液の注入を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること
- 本品に衝撃を与えないこと。[破損する恐れがある。]
- 本品を脂肪乳剤を含む輸液剤に使用する場合は、A-6601 (PET 1.2μm) を使用すること。
- A-6602 (PET 0.2μm)、A-6606 (PES 0.2μm) は、脂

- 肪乳剤等のエマルジョン系薬剤、血液製剤等はフィルタを通らない。これらの薬剤を投与する場合は、フィルタ下流から行うこと。[これらの薬剤がフィルタに触れると、フィルタが詰まる可能性がある。]
- 吸着しやすい薬剤は、フィルタを通過するか確認のうえ、使用すること。
 - 輸液中、十分な流速が得られなくなったら新しいものと交換すること。
 - 本品は、急激な圧力又は耐圧（600kPa）を超えて圧力をかけないように注意すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 包装開封後は直ちに使用すること。
- 滅菌包装が損傷していないか確認し、包装に傷や穴がある場合には使用しないこと。
- 意図した性能を発揮しない恐れがあるので、ラベルの使用期限をよく確認すること。

＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用注意）＞

- フィルタ等のコネクター接続部分にひび割れが生じる可能性があるため、他の器具と接続する際は過剰な力を加えないように十分注意すること。[接続口が割れる恐れがある。]

＜不具合・有害事象＞

- 本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。以下のような事象が認められた場合は、直ちに適切な処置を行うこと。
- 液漏れ
 - 接続不良

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 本品を保管するときは次の事項に注意すること。
- 水漏れに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管すること。滅菌性能が担保できなくなる恐れがある。

＜有効期間＞

- 本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アルゴキュアシステム株式会社
問い合わせ先：0565-51-0533

製造業者
RoweMed AG-Medical 4 Life
ドイツ