

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器* 体表面用超音波プローブカバー （70014000）**
再使用禁止 **セーフアソニック超音波プローブカバー シリーズ**


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 本品を必ず適用プローブに装着すること。
2. 本品は滅菌品の為、包装紙から開封する際には素手で触らないこと。 **

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等 **

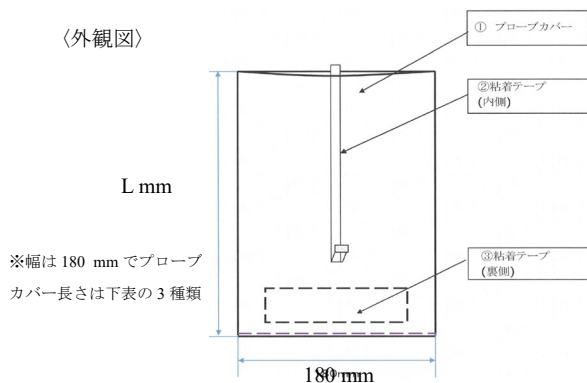

※

No	製品名	製品番号	大きさ (mm)L
1.	セーフアソニック超音波プローブカバーシングル	DAN-32803	300mm
2.	セーフアソニック超音波プローブカバーコンティ	DAN-32812	1200mm
3.	セーフアソニック超音波プローブカバーロング	DAN-32825	2500mm
4.	セーフアソニック超音波プローブカバーシングルプラス	DAN-32803-WG	300mm
5.	セーフアソニック超音波プローブカバーコンティプラス	DAN-32812-WG	1200mm
6.	セーフアソニック超音波プローブカバーロングプラス	DAN-32825-WG	2500mm

No.4～No.6 は滅菌済超音波ジェル(雑品)を同梱した製品であり、プローブカバーの形状・大きさ・材質・成分は No.1～No.3 と同じです。

【使用目的又は効果】**

超音波画像診断装置等のプローブ及びX線CT装置のCTハンドル等に装着し、診断手技を簡便にすると共に、二次感染を予防する目的で使用する。

【使用方法等】**

1. 本品を滅菌袋から取り出してください。



注) 直接本品を手で持たないように十分注意してください。
注) 本品は再使用禁止です。

2. 粘着テープ（裏側）の粘着部分を露出するために台紙を取り除いてください。



3. 粘着部分にプローブ先端部を貼り付けてください。



注) 本品の接着部にしわがよらないように注意をしてください。

4. プローブを本品で完全に覆ってください。



5. 本品をプローブケーブルの根元で絞り、粘着テープ（内側）により、本品の周りに巻き付けてください。



【使用上の注意】**

- ・ 使用後の本品は感染性廃棄物として廃棄処分すること。

【保管方法及び有効期間等】**

- ・ 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境は避けて保管すること。
- ・ 有効期間：本品の外箱の表示ラベルに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

〈製造販売業者〉

業者名：株式会社 ICST

T E L ： 048-857-8026

〈外国製造業者〉

業者名：Pharma-Sept Ltd.

国 名：イスラエル