

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣（71105001）

チュチュアンナ疲労回復リカバリーウェア（天竺前開き）

【禁忌・禁止】

- ・ 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常があるときは使用しないこと〔症状が悪化するおそれがある〕
- ・ 異常（かゆみ、かぶれなど）を感じたら、ただちに使用を中止すること〔症状が悪化するおそれがある〕


【形状・構造及び原理等】

＜概要＞

本品は体から放出される遠赤外線を吸収・輻射する鉱石を練りこむ加工が施された機能性繊維を利用した、衣料形状の器具である。上半身用及び下半身用がある。

＜形状・構造等＞


①ユニセックス（上半身用）

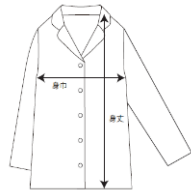

	S	M	L	XL	2XL
身幅	49.0	51.0	53.0	58.0	60.5
身丈	63.0	65.5	68.0	73.5	73.5

寸法：cm（±2 cm）


②レディース（上半身用）

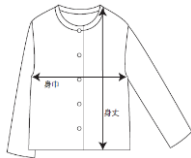

	S	M	L
身幅	46.0	48.0	50.0
身丈	63.0	65.5	68.0

寸法：cm（±2 cm）

③ユニセックス（下半身用）

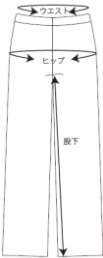

	S	M	L	XL	2XL
ウエスト	31.5	33.5	35.5	37.5	40.0
ヒップ	47.0	49.0	51.0	55.0	57.5
股下	66.0	67.0	68.0	70.0	70.0

寸法：cm（±2 cm）

④レディース（下半身用）



	S	M	L
ウエスト	31.5	33.5	35.5
ヒップ	47.0	49.0	51.0
股下	66.0	67.0	68.0

寸法：cm（±2 cm）

＜原理＞

本品は、遠赤外線を吸収・輻射する鉱石を練り込む加工を施した繊維を用いており、着用時に身体から放出される遠赤外線を吸収・輻射することで、血行促進作用をもたらす。

【使用目的又は効果】

本品は、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

【使用方法等】

1. 包装から取り出し、破損がないことを確認する
2. 初回の着用前に洗濯ネットを使用し洗濯することを推奨する。
3. 通常の衣類と同じように、素肌に直接着用する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- ・ 破損がある場合は、着用を控えること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・ 蛍光増白剤入りの洗剤を使用しないこと〔劣化のおそれ〕
- ・ タンブラー乾燥はしないこと〔破損・劣化のおそれ〕
- ・ 洗濯時は洗濯ネットの使用を推奨する〔破損・劣化のおそれ〕

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・ 直射日光、高温、多湿な環境を避けて保管すること。

<耐用年数>

1 年[自己認証(チュチュアンナ社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

業者名：株式会社 I C S T

TEL：048-857-8026

<外国製造業者>

業者名：Qingdao Qingxin Vip Fashion Co., Ltd

国 名：中華人民共和国

<販売業者>

業者名：株式会社チュチュアンナ

TEL：0120-576-755