



【E-31A-R10】

**2025 年 4 月（第 10 版）

*2025 年 2 月（第 9 版）

承認番号：22800BZX00252000

- 医療用品 4 整形用品 高度管理医療機器 靱帯固定具（JMDN コード：36174003）
 *（医療用品 4 整形用品 高度管理医療機器 非吸収性人工靱帯（JMDN コード：35717003））
 *（医療用品 4 整形用品 高度管理医療機器 非吸収性人工腱（JMDN コード：32869003））

FiberTak アンカー（手術器械なし）

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 適用対象：患者
 - 骨量または骨質が十分な患者〔適切に固定ができない〕。
 - 患部の血流が十分でない患者または患部に感染を有する患者〔治癒が妨げられ、不具合が発生するおそれがある〕。
 - インプラント材料に対する異物感受性がある患者。
 - 骨格が十分成熟していない患者〔成長軟骨板を損傷するおそれがある〕。
 - 活動性の感染を有する患者〔病状が悪化する可能性がある〕。
- 使用方法
 - 再使用禁止、再滅菌禁止。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表製品：FiberTak アンカー FW CL 2 号（1 本付）

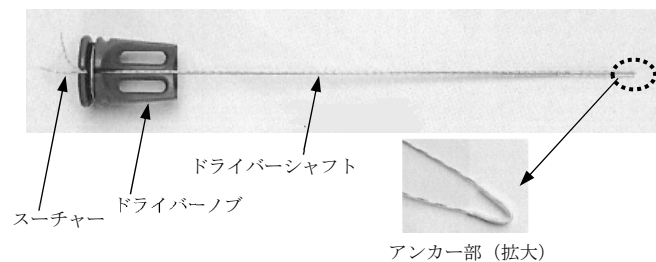

* 2. 構成品

- * 1) スーチャー、テープを結紮または別のアンカーで固定するタイプ
- ・FiberTak アンカー FW CL 2 号（1 本付／2 本付）
 - ・FiberTak アンカー FW 2 号（1 本付／2 本付） TigerTail
 - ・FiberTak アンカー SutureTape（1 本付／2 本付）
 - ・2.6 FiberTak アンカー SutureTape（2 本付／3 本付）
 - ・2.6 FiberTak アンカー FW CL 2 号（2 本付／3 本付）
 - ・FiberTak DR アンカー LabralTape（白／白黒／白青）FW 2 号 各 1 本付
 - ・DEX FiberTak アンカー（FW 1 号／SutureTape）1 本 針付
 - ・FiberTak Biceps インプラント
 - ・SP 2.6 FiberTak アンカー SutureTape（2 本付／3 本付）
 - ・SP 2.6 FiberTak アンカー FT（白黒 ST 白青／青 ST 白黒／FT 黒青 ST 青）
- * Hip FiberTak アンカー FW CL 2 号 1 本付
- * Hip FiberTak アンカー SutureTape（1 本付／2 本付）
- * 2) ノットレス（スーチャーを結紮せずに固定する）タイプ：スーチャーの付属しないタイプ
- ・Knotless FiberTak アンカー
 - ・2.6 Knotless FiberTak アンカー
 - ・Hip Knotless FiberTak アンカー
 - ・SP 2.6 Knotless FiberTak アンカー
 - ・1.8 Knotless FiberTak アンカー Gen2
 - ・DEX Knotless FiberTak アンカー
 - ・1.8 Knotless Hip FiberTak アンカー w/ MTS
 - ・SP 2.6 Knotless FiberTak アンカー FT（白黒 FW 青／青 FW 白黒／黒青 FW 青黒）
- * 3) ノットレス（スーチャーを結紮せずに固定する）タイプ：スーチャーの付属するタイプ
- * Knotless FiberTak Biceps インプラント

4) アンカーにスーチャーが付いていないタイプ

・FiberTak Button インプラント

3. 原材料

アンカー： ポリエステル

スーチャー及びシャトルスーチャー： 超高分子量ポリエチレン、
 ポリエステル、ポリアミド、シリコン、シアノア
 クリレート系接着剤、Skin Marker Ink

ドライバースhaft部： ニッケルチタン合金（Ni-Ti 合金）、
 ステンレス鋼

針： ステンレス鋼、シリコン

* 4. 原理

骨孔または骨表面にアンカーを埋植し、アンカーに取り付けられたスーチャー、テープを用いて軟部組織又は人工靱帯を骨固定することにより患部の修復を行う。アンカーにシャトルスーチャーが取り付けられたノットレスタイプは、シャトルスーチャーのループ部にアンカーから出るスーチャー末端を通し、スーチャーのスプライス部を通過させることで、スプライス部に引き込まれたスーチャーが保持され、結紮せずとも軟部組織又は人工靱帯を固定できる。本品は肩関節²、足／足関節、膝関節²、手／手関節、肘関節²、股関節¹に用いる。

¹ DEX FiberTak アンカー（FW 1 号／SutureTape）1 本 針付及び DEX Knotless FiberTak アンカーは除く。

² DEX FiberTak アンカー（FW 1 号／SutureTape）1 本 針付及び DEX Knotless FiberTak アンカーは 2 個以上使用する。

【使用目的又は効果】

本品は、靱帯、腱等の軟部組織又は人工靱帯の断端を骨に結合するために用いる。


**【使用方法等】

* 1. 使用方法

1) 本品はディスプレイ製品であるため、使用は 1 回に限り、再使用することはできない。手技においては、付属の術器具、および必要に応じて専用の術器具を使用すること。

2) 標準的な使用方法

- （1）挿入部を新鮮化し、必要に応じ下穴を作製する。
- （2）ドリルガイドにアンカーを挿入し、ドライバーノブの先端がドリルガイドのハンドルの後端に当たるまで（矢印①参照）、軽くたたきながら下穴にアンカーを挿入する。

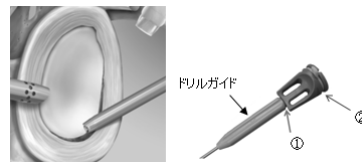

*（3）スーチャー、テープを保持しているオリングを外すことでスーチャー、テープを解放し（矢印②参照）、アンカーからドライバーを取り外す。

*【スーチャー、テープを結紮または別のアンカーで固定するタイプ】

（4）スーチャー両端を軽く引っ張ってアンカーを固定し、スーチャーの滑りを確認する。




手術手技書を必ずご参照ください。

- * (5) スーチャー、テープを軟部組織又は人工靱帯に通し結紮または別のアンカーとともにスーチャー、テープを下穴に挿入することで骨と結合し、余分なスーチャー、テープを切断する。



Bankart修復術例

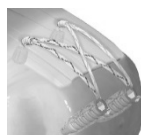

腱板断裂修復術例


- *【ノットレス（スーチャーを結紮せずに固定する）タイプ：スーチャーループの付属しないタイプ】
- (4) 下穴から出ているすべてのスーチャー末端を軽く引っ張り、アンカーを固定させる。



- (5) スーチャーを軟部組織又は人工靱帯に通し、スーチャー末端をシャトルスーチャーのループ部に通す。



- (6) スーチャー末端近辺の紫色の印からスーチャーを二つ折りにし、スーチャーがスプライス部を通過し、カニユーラの外に出るまでシャトルスーチャーを少しずつ引っ張る。

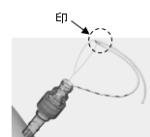

- (7) スーチャー末端を引き、必要な張力が得られたらスーチャーを切断する。



- *【ノットレス（スーチャーを結紮せずに固定する）タイプ：スーチャーループの付属するタイプ】

- * (4) 下穴から出ているすべてのスーチャー末端を軽く引っ張り、アンカーを固定させる。



- * (5) 軟部組織にスーチャーループを貫通させ、スーチャーを骨側から軟部組織に回り込ませた後、スーチャーループ内にスーチャーを通す。



- * (6) スーチャー末端近辺の紫色の印からスーチャーを二つ折りにし、スーチャーがスプライス部を通過し、カニユーラの外に出るまでシャトルスーチャーを少しずつ引っ張る。




- * (7) スーチャーループ末端の自由端、およびスーチャーを交互に引き、必要な張力が得られたらスーチャーを切断する。




【アンカーにスーチャーが付いていないタイプ】

- (4) シャトルスーチャー両端を軽く引っ張ってアンカーを皮質骨上に固定し、シャトルスーチャーの滑りを確認する。

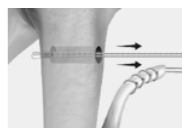

- (5) 軟部組織に縫い付けたスーチャー（ファイバーループ 2 号 ACL グラフト用（青）直針付または自社指定品）末端をシャトルスーチャーのループ部に通し、アンカー内部を通過するまでシャトルスーチャーを少しずつ引っ張る。

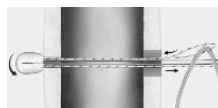

- (6) スーチャーにテンションをかけて軟部組織を骨と結合し、結紮して余分なスーチャーを切断する。



2. 使用方法に関連する使用上の注意

- **1) 下穴の作製には当社が指定するドリル等（販売名：肩関節再建用手術器械 届出番号：13B1X10093A08001、販売名：関節手術用手術器械S 届出番号：13B1X10093150001、又は、販売名：単回使用関節手術用手術器械 認証番号：224ADBZX001320000、販売名：単回使用関節・靱帯・腱手術用器械P1 認証番号：301ADBZX00079000）を使用すること〔指定よりも小さな径のドリルを用いて下穴を開けると、挿入時にインプラントを破損するおそれがある〕。
- 2) 適用部位の骨が硬く肥厚していてドリルの穿孔に時間を要するような場合は、無理に穿孔を継続せず、骨屑を除去したり、穿孔部やドリルに注水して冷やしたりする等、慎重に穿孔を行うこと〔無理な穿孔を続けると、穿孔部で発熱し、骨や周囲組織に障害が発生するおそれがある〕。
- 3) 下穴を穿孔中及びアンカーを挿入中は、ドリルガイドの先端を骨表面から離さないこと〔アンカーを意図した深さまで挿入できないおそれがある〕。
- 4) 下穴はドリルガイドの上部にドリルのストッパーが接触するまで穿孔すること〔アンカーを意図した深さまで挿入できないおそれがある〕。
- 5) アンカーを挿入する際には、アンカーの先端が下穴に入っていることを確認し、下穴の向きに合わせて挿入すること〔意図した深さまで挿入できない又は製品が破損するおそれがある〕。

- 6) アンカーを骨に挿入する際にアンカーがドライバーシャフト先端凹部に挿入されていることを確認すること。
- 7) アンカーを骨に挿入する際には優しく力を加えること〔製品が破損するおそれがある〕。
- 8) アンカーを骨に挿入する際にスーチャーに緩みがないことを確認すること〔アンカーとシャフト先端の嵌合が不完全になったり、嵌合部にスーチャーが挟まり損傷するおそれがある〕。
- 9) シェーバーを使用して過度に皮質骨を新鮮化しないこと〔アンカーの固定力が弱くなるおそれがある〕。
- 10) 本品に過剰な力を加えないこと。
- 11) 針子または持針器のような手術用器具を使用するときに、針又はスーチャーを押しつぶしたり、切断したりしないように注意すること。
- 12) 標準的な結紮法に従ってすべての結節をしっかりと確保し、確認すること。
- 13) 使用するインプラントは同じ材質を使用すること。
- 14) セルフパンチングが可能なシャフトを用いた製品であっても、適用部位の骨が硬くインプラント挿入が難しい場合は、アンカーを挿入する前に下穴を作成すること。
- 15) FiberTak Buttonインプラントを使用する場合は、テノデシススクリューを追加で用いることを検討すること。
- * 16) 本品を把持するために用いる機器で本品に損傷を与えないこと〔組織を損傷するおそれがある〕。
- * 17) スーチャー、テープの結紮は許容された方法を用い、術式によっては追加回数結紮すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - 1) 糖尿病などの生活習慣病患者、関節リウマチの患者〔骨形成が阻害され骨癒合が遅れることにより不具合等発現の可能性がある〕。
 - 2) 肥満体の患者〔患者の体重負荷のため、骨との固定が不良となったり、インプラント材料の変形や破損により不具合発現の可能性がある〕。
 - 3) 適用部位の骨が硬い患者〔無理にインプラントを挿入することでインプラントの破損もしくはから回りするおそれがある〕。
2. 重要な基本的注意
 - 1) 本品は体重負荷、荷重を支持するように設計されていないため、癒合するまで適当な外部支持を加える等してインプラント部に過度の負荷をかけないよう活動を制限すること。本品への過剰な負荷を防ぐため、患者には術者によって計画される術後管理を厳格に従わせること。
 - 2) 遷延治癒、偽関節、骨癒合不全などにより、過度の負荷が生じ、インプラントが破損する危険性があるため注意すること。
 - 3) 本品を使用する患者に対し、考えられる不具合等の可能性について書面で十分に説明を行うこと。
 - 4) 癒合が得られた後にインプラントを抜去するかしないかについては、必ず術前に検討を行い、抜去する場合は適切と思われる抜去時期を計画し、計画通りに実施すること。
- * 5) 尿や胆汁などの含塩溶液に長時間接触すると、結石が形成されるおそれがあるので注意すること。
- * 6) 材料に対する異物感受性が疑われる患者には埋め込み前に適切な試験を行い、感受性がないことを確認すること。
- * 7) 本品は非吸収性であるが、周囲の結合組織内部で被包化する可能性がある。
3. 不具合・有害事象
 - 1) 重大な不具合
 - (1) 製品の変形・破損
 - (2) 製品の移動・抜け
 - (3) スーチャーの損傷・断裂

- (4) スーチャーの詰まり

2) 重大な有害事象

本品の使用において患者の状態、適用部位の状態などにより次のような有害事象がまれに現われることがあるので、その場合は直ちに適切な処置を行うこと。

- (1) 術後神経障害
- (2) 軟骨・軟部組織損傷
- (3) 骨壊死
- (4) 偽関節・遷延癒合・癒合不全
- (5) アレルギー反応・異物反応
- (6) 血行障害
- * (7) 適用部位の骨・周囲組織への穿孔時の発熱による障害
- (8) 骨折
- (9) 感染症
- (10) 骨吸収
- (11) 骨変形
- (12) 体内遺残
- (13) 肩関節脱臼／亜脱臼
- * (14) 縫合不全
- 3) その他の有害事象
 - (1) 痛み・不快・違和感
 - ** (2) 軽度の急性炎症組織反応（痛み・浮腫・紅斑など）

4. 高齢者への適用

高齢者は一般に骨量・骨質が十分でないことが多いので、慎重に使用し、治療の経過にも十分に注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への適用

レントゲン、透視撮影時のX線照射が胎児に影響を与える可能性を十分に考慮すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 1) 包装にきずや破れが生じないように、取り扱い及び保管に注意すること。
 - 2) 本品は高温多湿や直射日光を避け、水に濡れないよう注意し、清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間

直接の包装及び外装に記載〔自己認証(当社データ)による〕。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： Arthrex Japan 合同会社
 電 話： 03-4578-1000
 製 造 元： Arthrex, Inc. (アメリカ合衆国)

