

Univers Revers 人工肩関節 MGS Augment

再使用禁止

【警告】

1. 使用方法

- 1) 本品の使用にあたっては、本品により期待できる治療効果やリスクの他、中長期的な臨床成績が十分に明らかになっていない点などについて患者に十分に説明し、理解したことを確認した上で使用する。

【禁忌・禁止】

1. 適用対象：患者


- 1) 活動性の感染を有する患者[病状が悪化する可能性がある]。
- 2) 骨格が十分成熟していない患者[成長軟骨板を損傷するおそれがある]。
- 3) 骨量または骨質が不十分な患者[適切に固定ができない]。
- 4) インプラント材料に対する異物感受性がある患者。
- 5) 三角筋又は外旋筋が機能不全である患者[本品による機能改善が得られない]。
- 6) 関節神経疾患等の神経筋疾患を有する患者[本品による機能改善と疼痛緩和が十分に得られないおそれがある]。
- 7) 骨粗しょう症、骨軟化症[本品を適切に固定できないおそれがある]。
- 8) 高度の骨欠損あるいは骨萎縮又は骨変形のある患者[本品を適切に固定できず良好な埋植結果が得られないことがある]。
- 9) 原因不明の赤血球沈降速度上昇、白血球数上昇、又は著しい白血球分類計数の変動が認められる患者[血液を過剰に失い、術後回復が遅れるおそれがある]。
- 10) インプラント設置部位に感染を引き起こす可能性のある遠隔感染症病巣を有する患者[症状の増悪のおそれがある。また、患部に病巣が移り、本品による機能改善と疼痛緩和が得られず、再置換術が必要となるおそれがある]。
- 11) 上腕神経叢に重篤な損傷がある患者[本品による機能改善が得られないおそれがある]。
- 12) 患部の血流が十分でない患者または患部に感染を有する患者[治癒が妨げられ、不具合が発生するおそれがある]。

2. 使用方法

- 1) 再使用禁止、再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

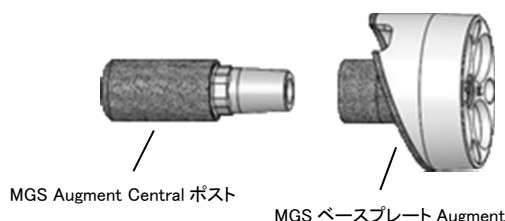

2. 組成

チタン合金

コーティング：純チタン

3. 原理

肩関節関節窩を置換し、関節機能を再建する。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は、腱板断裂性関節症、腱板広範囲断裂などの腱板機能不全を呈する症例に対して用いる人工肩関節である。

【使用方法等】

1. 使用方法

本品は、以下の人工肩関節のリバーstype関節窩コンポーネントと併用して使用できる。

構成品名	販売名	承認番号
上腕骨コンポーネント：全て	Univers Revers 人工肩関節	30700BZX00109000
関節窩コンポーネント：グレンスフィア（スクリュー含む）、ペリフェラルスクリュー		
全て	Univers Revers 人工肩関節 Monoblock	30700BZX00110000
全て	Univers Revers 人工肩関節 Revision Stem	30700BZX00279000

<関節窩の前処置>


- 1) 関節窩を露出し、手術器械*で表面の軟骨を除去する。
- 2) ベースプレートサイズに合ったサイザー／ピンガイド*を用いてガイドピン*を設置する。
- 3) ガイドピン*越しにグレンスフィアサイズガイド*を挿入し、グレンスフィア*のサイズを決める。

<Full Augment の場合>

- 4) Full Augment サイザー*をハンドル*に取り付け、骨欠損が最も大きい箇所にペンや電気メスで印を付ける。
- 5) 反対側にも同様に印を付ける。
- 6) 前ステップの Augment サイズに合ったアングルドリマースリーブ*にリーマーシャフト*をセットする。
- 7) アングルドリマーアッセンブリ*をガイドピン*越しに挿入し、リーマー*の線と刻印を合わせる。
- 8) リーマー*の点線は特定した欠損の反対側に位置させる。線の位置を維持しながら関節窩面が平らになるまでリーミングする。
- 9) 色と角度の合った適切な Augment トライアル*をハンドル*にセットしてガイドワイヤー*越しに挿入し、関節窩面上でのフィット感を確認する。必要に応じてリーミングを繰り返す。
- 10) Full Augment デプスゲージ*を用いてセントラルポストの深さを測定後、対応するドリル*でドリルのカラーが関節窩面に達するまでドリリングする。

<Half Augment の場合>

- 4) パレオリーマー*をガイドピン*越しに挿入し、関節窩前方（パレオ側）を平らにリーミングする。ガイドピン*の位置に到達したらリーミングを終える。
- 5) 図中の中心線を境に(a)がネオ側、(b)がパレオ側を示す。

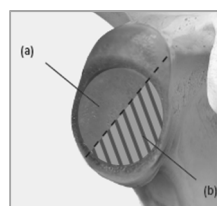

- 6) 適切な Half Augment サイザー*をハンドル*に取り付け、ガイドピン*越しに挿入し、サイザー*の半円をパレオ側に着座させる。サイザー*のアームを骨欠損が最も大きい箇所に位置させ、アーム位置とその反対側に印を付ける。アームが関節窩に触れてなければ Augment 角度を大きくする等で対応する。
- 7) 35° Half Augment を使用する場合は、後傾ピンガイド*を用いて、元のガイドピン*の位置から 10° 傾斜した位置に再設置する。
- 8) 前ステップの Augment サイズに合ったアングルドリーマースリーブ*にリーマースhaft*をセットする。
- 9) アングルドリーマースリーブ*のスロットに Half Augment 用デプスストップ*を挿入する。
- 10) リーマーアセンブリ*をガイドピン*越しに挿入し、リーマ*の点線を特定した骨欠損の反対側の刻印と一致させる。
- 11) デプスストップ*が関節窩のパレオ切断面に達するまでリーミングする。ガイドピン*がネオとパレオのリーミング面の中心にあることを確認する。
- 12) 色と角度の合った適切な Augment トライアル*をハンドル*にセットしてガイドワイヤー*越しに挿入し、関節窩面上でのフィット感を確認する。必要に応じてリーミングを繰り返す。
- 13) 35° Half Augment を使用する場合は、一度ガイドピン*を抜去し、緑色の 35° トライアル*を使用してガイドピン*をニュートラル位置に再挿入してから、前述のトライアル確認を行う。
- 14) Half Augment デプスゲージ*を用いてセントラルポストの深さを測定後、対応するドリル*でドリルのカラーが関節窩面に達するまでドリリングする。

<インプラントの設置>

- 15) ベースプレートに適切な長さのポストを連結する。その際、6 角形状が正しく合うよう注意する。テーパーの締め付けには専用のテーパーアセンブリ*を用いる。
- 16) 適切なインサーター／インパクト*にベースプレートを正しく取付ける。ベースプレートの最大 Augment 部と最大骨欠損部の刻印が一致する位置でハンマー*で打ち込んで着座させる。
- 17) ロッキング又はノンロッキング用のドリルガイド*をベースプレート*のスクリューホールに設置し、ドリルシャフト*上のデプスマークに合わせてドリリングする。ラチェットハンドル*を付けたドライバー*でスクリュー*を挿入する。
- 18) スクリューヘッド*がベースプレート上面より下にあることを確認する。スクリュー*は SI 位置に 2 本以上使用し、Standard ベースプレートの SI 位置にはロッキングスクリュー*を用いる。Augment に係るホールには 24mm 長以上のスクリュー*を使用する。
- 19) ペリフェラルリーマ*でベースプレート周囲の軟部組織と骨を除去する。
- 20) インサーター*でグレンスフィアのトライアル*をベースプレートに設置する。必要に応じてトライアル整備を行う。
- 21) インサーター*でグレンスフィア*をベースプレート上に正しく設置し、嵌合するまで押し込む。インサーターの抜去後、インパクト*で数回グレンスフィアを叩いて挿入する。グレンスフィア用スクリュー*をドライバー*で挿入して確実にロックさせる。

*本品に含まれない。手術器械は自社指定品を用いること。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 本品に併用するインプラントはシステム特有にデザインさ

れたものに限る。

- 2) インプラントの互換性については手技書を参照のこと。
- 3) 手術器械は手術手技書で指定するものを使用し、手術手技書に従って正しくインプラントを設置すること[軟部組織や関節面を損傷する可能性がある]。
- 4) 選択したベースプレートの Augment 角度により対応するドリルも異なるため注意すること。
- 5) スクリューを骨に挿入する際には優しく力を加えること。抵抗を感じた場合は、無理に挿入せず、その原因を取り除くこと[製品が破損するおそれがある]。
- 6) スクリューを骨に挿入する際にスクリューとインサーター又はドライバー先端が完全に嵌合し、スクリュー中空に曲がらずに挿入されることを確認すること[スクリューまたはドライバーが破損するおそれがある]。
- 7) スクリューが皮質骨表面より突き出した状態で留置すると、術後に軟部組織の炎症や疼痛を生じる可能性がある。
- 8) 使用時に衝撃や必要以上の力を加えないこと[患者へのダメージ又は本品が破損するおそれがある]。
- 9) 本品および本品の包装に不正に手加えられた形跡、あるいは損傷や水分の混入などの異常がないか確認すること。異常が認められる場合には使用しないこと。

(術前)

- 1) 手術計画は術前 X 線画像に基づいて行う。
- 2) 手術技術の知識とインプラントの適切な選択と配置を含む、術前準備及び手術手順は、本品を使用する上で重要な項目であり、以下の手術状況下では、早期の緩みや合併症が発生する可能性がある。
 - 骨床を準備する際の骨構造の極度の弱体化
 - 不適切なインプラントサイズ選定
 - 埋植前の不十分な骨床の洗浄
 - インプラントの設置又は固定の際の過度な力による破裂骨折等の可能性
- 3) ベースプレートの Oblique と Standard ではペリフェラルスクリューホールと Augment 部の配置が異なるため注意すること。

(術中)

- 1) インプラントの挿入前は特に取り扱いに注意すること[インプラントの関節面を傷付けると早期の緩みや合併症が発生するおそれがある]。
- 2) モジュラー型の構成品間に骨や軟部組織が干渉しないよう正しい手順で行うこと。
- 3) モジュラー型構成品間での機械的干渉を防ぐために、すべてのネジを適切に締めて確実に組付けること。
- 4) 隙間腐食や不適切なテーパー接合を避けるために、モジュラー構成品の取付け前にテーパー部を確実に清潔にして乾燥させること。
- 5) 35° Half Augment を使用する際、リーミングには 25° の青色スリーブを使用するため、デプスストップを使用する際は 35° 用のデプスストップを使用すること。
- 6) ペリフェラルスクリューの挿入時には、スクリューヘッドがベースプレートとグレンスフィアの接合面より下に沈んでいることを確認すること。
- 7) グレンスフィアをベースプレートに打ち込む際に、グレンスフィアインサーターを用いて叩かないこと。[インサーターが破損するおそれがある。]
- 8) グレンスフィアとベースプレート間のテーパー接続はグレンスフィア鉗子で完了させること。
- 9) Oblique タイプの Augment ベースプレートでは、関節の最上位と最下位置でペリフェラルスクリューを 2 本以上設置すること。ロッキングスクリューとノンロッキングスクリ

ューはどちらも使用できる。ベースプレートのオーギュメントのホールには長さ 24mm 以上のペリフェラルスクリューを使用する。オーギュメントの無い部分のホールは任意長でよい。

- 10) Standard タイプの Augment ベースプレートでは、関節の最上位と最下位置でロッキングペリフェラルスクリューを 2 本以上設置すること。残りのホールにはロッキングスクリューとノンロッキングスクリューのどちらも使用できる。ベースプレートのオーギュメントのホールには長さ 24mm 以上のペリフェラルスクリューを使用する。オーギュメントの無い部分のホールは任意長でよい。

(術後)

- 1) 医師は、患者に適切なリハビリの計画を立て実施する。
- 2) 医師は患者に、患者の体重、活動レベルがインプラントの寿命に影響することを説明し、インプラントの寿命を最大限とするための日常生活の注意事項を適切に説明する。
- 3) 医師は、定期的な経過観察を行い、インプラントの摩耗や緩みなどの早期発見に努め、適切な措置をとる。

【使用上の注意】

1. 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)

- 1) 重労働、激しいスポーツ等の活動性の高い患者 [患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、摩耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となることがある]。
- 2) アルコールまたは薬物依存の患者 [術後管理が不十分になり、回復が遅れることがある]。
- 3) 繰り返しの負荷や外傷で骨折のリスクがある患者、又は転倒などの外傷リスクを増やす病状がある患者。
- 4) 糖尿病などの生活習慣病患者、関節リウマチの患者 [骨形成が阻害され骨癒合が遅れることにより不具合等発現の可能性はある]。
- 5) ステロイド療法、免疫抑制療法等の全身薬物療法を受けている患者 [術後骨折が発生しやすい]。
- 6) 腱板断裂関節症、広範囲腱板断裂以外 (関節リウマチ、人工関節置換術後の再置換症例、上腕骨近位端骨折、腫瘍切除後の再建術等) の症例においては、患者の選択ならびに他の治療法も含めて慎重に検討する [腱板断裂関節症等と比較して合併症発生率や再手術率が高く、予後予測が困難である]。
- 7) 肥満体 [患者の体重負荷のため、骨との固定が不良となったり、インプラント材料の変形や破損により不具合発現のおそれがある]。
- 8) 支持骨に骨腫瘍のある患者 [インプラント固定が不良となり、良好な埋植結果が得られないことがある]。
- 9) 適用部位の骨が硬い患者 [無理にインプラントを挿入することでインプラントの破損もしくは設置不良のおそれがある]。
- 10) コーティング処理された部分には触れないよう注意すること [骨との固定性が低下し本品の有効性を損なうおそれがある]。

2. 重要な基本的注意

- 1) チタンは、他の金属材料に比べて骨組織との親和性が高いため、術後長期間経過後には、インプラントと骨が強固に固着した状態になることがある。その様な状態で抜去しようとする、抜去に必要なトルクがインプラントや器具の設計上の強度を上回り、抜去途中で破損するおそれがある。癒合が得られた後にインプラントを抜去するかしないかについては、必ず術前に検討を行い、抜去する場合は適切と思われる抜去時期を計画し、計画通りに実施するこ

と。

- 2) 癒合が得られた後に補強用インプラントを抜去しない場合は、異物反応や痛み・不快・違和感を感じたり、インプラントの腐食や、移動、変形、破損、圧力遮蔽による骨吸収、感染症等の不具合・有害事象を生じるおそれがある。また、術後外傷による負傷リスクや、曲がり破損等で抜去が困難になる可能性がある。インプラントを抜去すべきかどうかを決定する時は、リスクとベネフィットを慎重に検討した上でインプラントの抜去を決定すること。抜去する場合は適切と思われる抜去時期を計画し、計画に従い行うこと。
- 3) インプラント材料に対する異物感受性が疑われる患者には埋め込み前に適切な試験を行い、感受性がないことを確認すること。
- 4) 遷延治癒、偽関節、骨癒合不全などにより、過度の負荷が生じ、インプラントが破損する危険性があるため注意すること。
- 5) 本品を使用する患者に対し、考えられる不具合等の可能性について書面で十分に説明を行うこと。
- 6) 非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示されている [自己認証 (当社データ) による]。
当該構成品を装着した患者に対して、以下に示される条件においては、安全に MR 検査を実施することが可能である：
・静磁場強度 $T \rightarrow 1.5T$ もしくは $3.0T$
・静磁場強度の勾配 $T/m \rightarrow 30T/m (3,000Gauss/cm)$ 以下
・MR 装置が示す全身最大 SAR (Specific Absorption Rate) $\rightarrow 0.5W/kg$ (通常操作モード)
上記条件で継続して 60 分間スキャンできる。
本品が $3.0T$ の MR 装置における勾配磁場エコー法による撮像で生じ得るアーチファクトは本品の実像から最大で約 60 mm である。
3. 不具合・有害事象
 - 1) 重大な不具合
 - (1) 製品の変形・破損
 - (2) 製品の移動・弛み・抜け
 - 2) 重大な有害事象
 - (1) 術後神経障害
 - (2) 骨壊死
 - (3) 骨折
 - (4) 骨吸収・変形治癒・癒着不能
 - (5) 感染症
 - (6) 血行障害
 - (7) アレルギー反応・異物反応
 - (8) 出血が原因で引き起こされる各種身体障害
 - (9) 脱臼・亜脱臼
 - (10) 軟部組織の炎症・損傷
 - (11) 使用材質の摩耗粉による組織反応
 - (12) 敗血症
 - (13) 静脈血栓症・肺塞栓症・心停止などの心血管疾患
 - (14) 偽関節・遷延癒合
 - (15) 腋窩部のびらん
 - (16) 創傷血腫と創傷治癒の遅延
 - (17) 体内遺残
 - 3) その他の有害事象
 - (1) 痛み・不快・違和感
 - (2) 可動域不良
 - (3) 上腕骨コンポーネントと肩峰間のインピンジメント

4. 高齢者への適用

高齢者は一般に骨量・骨質が十分でないことが多いので、慎重に使用し、治療の経過にも十分に注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

レントゲン、透視撮影時のX線照射が胎児に影響を与える可能性を十分に考慮すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 包装にきずや破れが生じないように、取り扱いおよび保管に注意すること。
- 2) 本品は高温多湿や直射日光を避け、水に濡れないよう注意し、清潔な場所に32℃以下で保管すること。

2. 有効期間

ラベルまたは包装に表示〔自己認証（当社データ）による〕。

【承認条件】

肩関節置換術に対する十分な知識・経験を有する医師が、適応を遵守し、講習の受講等により、本品の操作に関する技能や手技に伴う合併症等に関する知識を得た上で、本品が用いられるよう、関連学会と連携の上で必要な措置を講ずること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : Arthrex Japan 合同会社
電話 : 03-4578-1000
製造元 : アースレックス社（アメリカ合衆国）
Arthrex, Inc.

