

2019年8月1日(第7版)


機械器具 71 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 (JMDNコード: 35065000) 製造販売届出番号: 18B3X10016FLT001


リーディンググラスFLT001

【禁忌・禁止】
視力補正度数が合わないものは使用を止めてください。

【形状・構造及び原理など】

＜形状＞

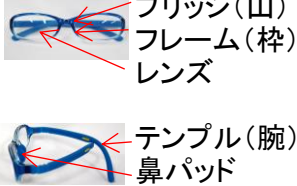

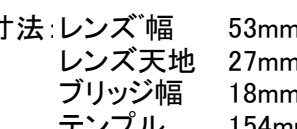

寸法: レンズ幅 53mm
レンズ天地 27mm
ブリッジ幅 18mm
テンプル 154mm






寸法: レンズ幅 52mm
レンズ天地 30mm
ブリッジ幅 18mm
テンプル 154mm





寸法: レンズ幅 52mm
レンズ天地 27mm
ブリッジ幅 17mm
テンプル 154mm

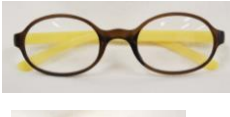



寸法: レンズ幅 48mm
レンズ天地 36mm
ブリッジ幅 23mm
テンプル 154mm





寸法: レンズ幅 52mm
レンズ天地 30mm
ブリッジ幅 18mm
テンプル 154mm





寸法: レンズ幅 50mm
レンズ天地 35mm
ブリッジ幅 19mm
テンプル 154mm





寸法: レンズ幅 50mm
レンズ天地 37mm
ブリッジ幅 19mm
テンプル 154mm





寸法: レンズ幅 51mm
レンズ天地 27mm
ブリッジ幅 18mm
テンプル 154mm





寸法: レンズ幅 50mm
レンズ天地 28mm
ブリッジ幅 18mm
テンプル 154mm





寸法: レンズ幅 50mm
レンズ天地 31mm
ブリッジ幅 18mm
テンプル 154mm






寸法: レンズ幅 45mm
レンズ天地 39mm
ブリッジ幅 23mm
テンプル 154mm

材質:	枠 旧型式1	ポリカーボネート	
	枠 新型式2	TR 90	
	鼻パッド 旧型式1	サーモプラスチック ラバー	
	鼻パッド 新型式2	シリコン	
	腕	ペバックス(ポリエーテルブロックアミド共重合体)	
度数:	レンズ	プラスチック[アクリル、ポリカーボネート(ハードコーティング)]	
		+1.00	+2.00
		+1.50	+2.50
		+3.00	

＜原理＞

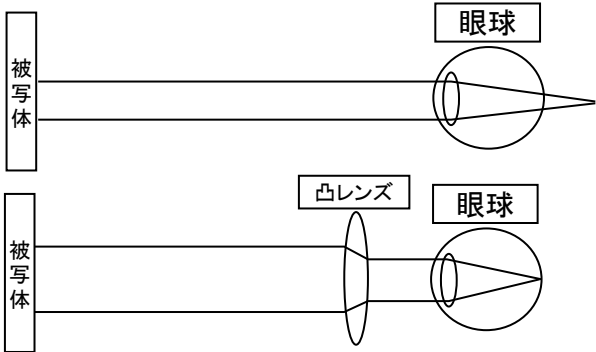

裸眼の状態で見えた像がぼやける状態を、眼鏡により、視力を補正する原理。

【使用目的、効能又は効果】

見えづらくなった手元の文字や細かい物を見る際に、視力を補正し見えやすくする効果を目的とする。

【品目仕様等】

- 1. レンズ・枠に破損、歪みがないこと
- 2. レンズ度数が適正である事。
誤差が0.125ディオプリー以内
- 3. 耐性温度
旧型式1 ポリカーボネート枠 70度
新型式2 TR 90 90度
鼻パッド 旧型式1 サーモプラスチックラバー 70度
鼻パッド 新型式2 シリコン 100度
腕 80度
レンズ 80度

【使用上の注意】

- 1. この商品は視力補正用のメガネです。見えづらくなった手元の文字などを見やすくする事を目的に作られております。運動時や歩行時は必ず外して下さい。
- 2. 階段の上り下り、段差のある所での使用は避けて下さい。
- 3. 慣れないうちは、頭痛やめまい・ゆがみを感じる場合があります。

【貯蔵・保管方法及び有効期限等】

＜貯蔵・保管方法＞

- 1. 直射日光の当たらない場所でケース等に入れて保管する。
- ＜有効期限＞
- 有効期限はないが注意する事。
- 1. 補正度数が本人の視力と合わなくなった場合は使用を止める事。
 - 2. フレーム、レンズに破損などが生じた場合は直ちに使用を止める事。

【包装】

レンズ枠一枚・テンプル2対・鼻パッド2対
※販売方法に応じて包装内容は変わる

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者: アルファ株式会社
住所: 〒916-0022 福井県鯖江市水落町7-28-6
電話: 0778-52-3453

【操作方法又は使用方法】

一般に付ける眼鏡の使用方法と同じ。
鼻パッド、テンプルが脱着可能。

