

2025年4月10日（第1版）

機械器具 71 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡（JMDNコード：35065000）製造販売届出番号：18B3X10016FLT006

リーディンググラスFLT006

【禁忌・禁止】
視力補正度数が合わないものは使用を止めてください。

【形状、構造及び原理】

＜形状＞


寸法: レンズ幅 46mm レンズ天地 39mm ブリッジ幅 22mm テンプル 155mm	寸法: レンズ幅 44mm レンズ天地 39mm ブリッジ幅 24mm テンプル 155mm	寸法: レンズ幅 44mm レンズ天地 29mm ブリッジ幅 23mm テンプル 155mm
---	---	---

度数: +1.00 +2.00 +3.00
+1.50 +2.50

＜構造＞

この眼鏡は複数の着脱可能な部品によって構成されている
購入後に自身でテンプル(腕)の着脱が可能

＜原理＞

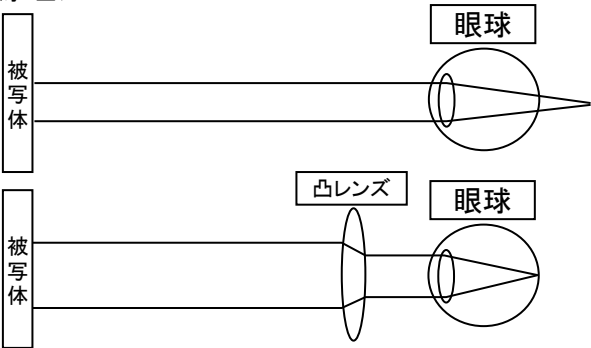

裸眼の状態では網膜に映す像がぼやける状態を、
眼鏡により、視力を補正する原理。

【原材料】

枠 プラスチック (TR 90)
鼻パッド プラスチック (シリコン樹脂)
腕 プラスチック (エラストマー樹脂)
レンズ プラスチック (アクリル)

【使用目的又は効果】


見えづらくなった手元の文字や細かい物を見る際に、視力を補正し見えやすくする効果を目的とする。

【性能及び安全性に関する規格】

1. レンズ・枠に破損、歪みが無いこと
2. レンズ度数が適正である事。
誤差が0.125ディオプトリー以内
3. 耐性温度 枠 90度
 鼻パッド 100度
 腕 80度
 レンズ 80度

【使用方法】

一般に付ける眼鏡の使用方法と同じ。
購入後に自身でテンプル(腕)の着脱が可能

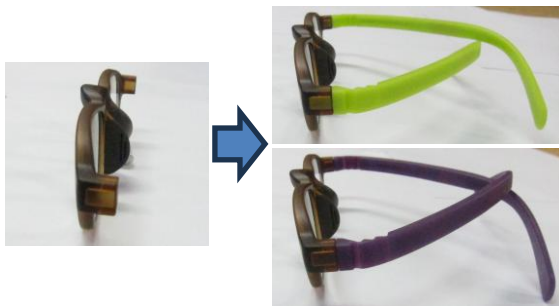

【保管方法及び有効期間】

＜保管方法＞

1. 直射日光の当たらない場所でケース等に入れて保管する。

＜有効期間＞

有効期限はないが注意する事。

1. 補正度数が本人の視力と合わなくなった場合は使用を止める事。
2. フレーム、レンズに破損などが生じた場合は直ちに使用を止める事。

【使用上の注意】

1. この商品は視力補正用のメガネです。見えづらくなった手元の文字などを見やすくする事を目的に作られております。運動時や歩行時は必ず外して下さい。
2. 階段の上り下り、段差のある所での使用は避けて下さい。
3. 慣れないうちは、頭痛やめまい・ゆがみを感じる場合があります。

【備考】

この商品は自身で着脱可能な部品から構成されており、フレーム、テンプル(腕)それぞれ単品での販売も行う。

【包装】

レンズ枠1枚・テンプル1対

※販売方法に応じて包装内容は変わる

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者：アルファ株式会社

住所：〒916-0022 福井県鯖江市水落町7-28-6

電話：0778-52-3453