

メディレーサー電極

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 再使用禁止〔刺激ケーブル(腓腹神経及び肘部神経用)を除く〕

【形状・構造及び原理等】


本品は、Mediracer末梢神経診断装置に接続して使用する電極であり、手根管用と、腓腹神経(肘部管)用がある。

手根管用は刺激電極と記録電極(一体で形成され使用時に切り離す。いづれも再使用禁止。)、腓腹神経用は記録電極(再使用禁止)と刺激ケーブル(再使用可能)からなり、肘部管用は手根管用の記録電極と腓腹神経用の刺激ケーブルを使用する。

(1) 手根管用(肘部神経用)

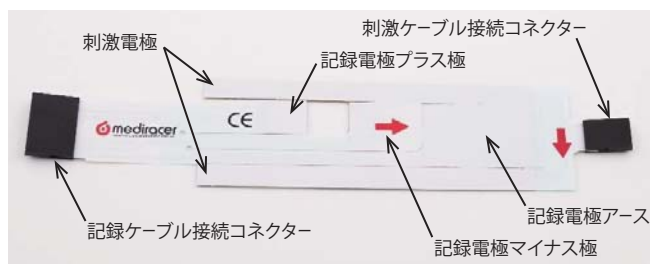

(2) 腓腹神経用記録電極

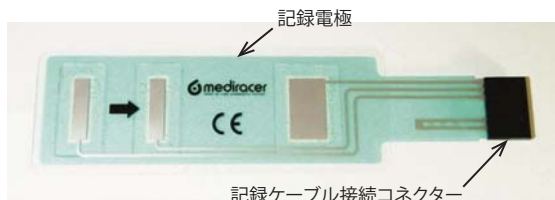

(3) 刺激ケーブル(腓腹神経及び肘部神経用)



【使用目的又は効果】

組織に電流を流すため、体表面に用いる導体で、陰極と陽極の両方を備える。

【使用方法等】

(1) 手根管用

1. 刺激電極と記録電極を切り離し、Mediracer末梢神経診断装置の使用方法に従って使用する。
2. 使用後は廃棄する。〔刺激ケーブル(腓腹神経及び肘部神経用)を除く〕

(2) 腓腹神経用

1. 刺激電極及び記録電極は、Mediracer末梢神経診断装置の使用方法に従って使用する。
2. 使用後、記録電極は廃棄し、刺激ケーブルは電極をアルコール等で洗浄し保管する。

(3) 肘部神経用

1. 刺激電極と記録電極を切り離し、Mediracer末梢神経診断装置の使用方法に従って記録電極のみ使用する。
2. 使用後、記録電極は廃棄し、刺激ケーブルは電極をアルコール等で洗浄し保管する。

【使用上の注意】

1. 手根管用及び腓腹神経用記録電極

- ・ 包装を開封したら、すぐに使用すること。
- ・ 開封時に有効期限を確認し、包装及び製品に破損等がある場合は使用しないこと。

2. 本品共通

- ・ 使用前にMediracer末梢神経診断装置の取扱説明書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

使用期間

- ・ 本製品の連続使用期間は24時間20回までを限度とすること。(刺激ケーブルを除く)
- ** ・ 水濡れに注意し、25℃以下で直射日光および高温多湿を避けて保管すること。
- ・ 医療従事者以外の方の手の触れない場所に保管すること。

有効期限

- ・ 外箱及び個包装に記載〔自己認証(当社データ)により設定〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

- ・ 製造販売業者: アズテック株式会社 TEL: 03-3526-2122
- ・ 製造業者: Mediracer Oy (フィンランド)