


プレジジョン Wireless Z

【禁忌・禁止】

- ・ 本製品は湿気のあるところでの保管および使用はしないこと。[故障のおそれがあります]
- ・ 目に直接照射しないこと。
[目に重篤な重傷を負う可能性恐れがあります]

【形状、構造及び原理等】

1. 寸法

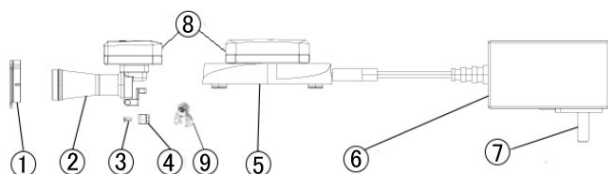

①フィルター、②ヘッドライト、③ねじ、④ジョイントパーツ、
⑤バッテリー充電器、⑥アダプター、⑦プラグ、
⑧バッテリー、⑨ヘッドライト取付クリップ（別売り）

2. 原理

光源をレンズにより集光させ作業野に投入する。

3. 仕様

＜ヘッドライト＞

照度：10000±20%lux（焦点距離 350mm）

35000±20%lux（最大）

色温度：3000K～7300K

演色評価数（CRI）：Ra≥90%

入出力：DC 6.2V 200mA（max）

質量：30±1g（ヘッドライト、バッテリー1 個、フィルター）

4. 電氣的規格及び機器の分類＞

＜バッテリー＞

電池種類：リチウムイオン充電電池 DC3.8V

電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器

規格容量：600 mAh

充電時間：1.4 時間、（2 個同時充電の場合、2.6 時間）

連続使用時間：2.5 時間（最大照度）

＜AC アダプター＞

電源入力：100-240 V 50/60 Hz, 0.35A

入力電圧：5V=1A

出力：DC 3.8V 200mA（max）

【使用目的又は効果】

双眼ルーペのフレーム部に装着するよう設計された装置（ランプ）をいう。双眼ルーペに取り付けて術者の前頭部に配置し、手術、診断、治療中に視野を直接照明する。

【使用方法等】

○ 使用前準備

1. 付属ケーブルをバッテリー充電器に接続し、コンセントにアダプターを差し込みます。バッテリー充電器の赤と緑のランプが交互に点灯していれば、充電可能状態となります。
2. バッテリー裏面のマグネットポストと、バッテリー充電器のマグネットホールを合わせて充電します。赤色のランプが点灯し充電が開始されていることを確認してください。
3. 緑色のランプが点灯し、充電完了後、バッテリーを取り外します。

○ 操作方法

1. ヘッドライトとバッテリーを取り付けます。
2. バッテリースイッチをオンにします。
3. バッテリーのタッチパッドに軽く触れるとライトが点灯します。
4. タッチパッドを長押しし、明るさを調整します。
5. タッチパッドに軽く触れ、ライトを消灯します。

【使用上の注意】

- ライトを直接患者の目にあてないこと。
- 光を直接見ないこと。また、人の目に向けないこと。
- 液体・埃等をヘッドライト部内に侵入させないこと。
- 濡れた手でアダプターを抜き差ししないこと。
- バッテリーからの液漏れ、外装の部分的な変色・変形、異臭などの異常が発生した時は、使用を中止すること。
- 分解・修理や改造は行わないこと。
- 高圧蒸気滅菌を行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜耐用期間＞

正規の保守点検を行った場合に限り、4 年間

＜保管条件＞

- 温度：-20℃～+55℃
- 相対湿度（結露不可）：20%～80%
- 気圧：70kPa～106kPa
- 直射日光、高温、多湿、水分（水濡れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 本器を流水で洗浄しないこと。
- 滅菌は行わないこと。
- レンズ以外の部分は、水または少量の 75%アルコールで湿らせたクリーニングクロスで清拭すること。
- レンズは、95%アルコールに浸した清潔な綿棒またはレンズクリーナーで拭いて洗浄/消毒し、乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

Angelus Japan 株式会社

電話番号：072-657-7756

＜製造業者＞

チャンジャウ シファリ メディカル テクノロジー

Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd

（国名：中華人民共和国）

取扱説明書を必ず参照してください。