

ハンドモーターチャック3

【禁忌・禁止】


- I. バーは滅菌されていることを確認してから使用すること。
- II. 本体は防水仕様でないため、オートクレーブ等の高温滅菌には未対応。

【形状・構造及び原理等】

本品は動力式（電池）の器具でアタッチメント（チャック）を備えたモーター器具である。

単3乾電池（1本）の電気エネルギーをモーターに供給し、動作ボタンを押すことでチャックを回転させる。

チャックにバー（棒ヤスリ）が接続できる機構を持っている。

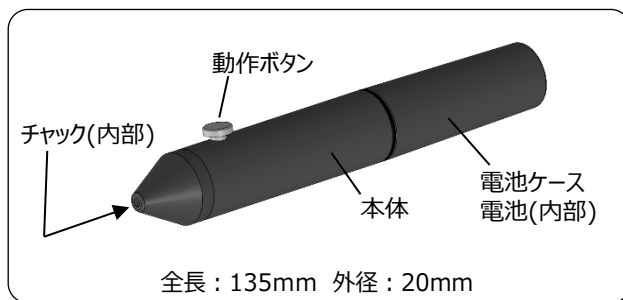

【使用目的又は効果】

本品は、チャックに接続したバー（棒ヤスリ）を回転させ、身体組織等の搔爬に使用する。

【使用方法等】

1. 本品は防水性ではない為、本体が濡れた際は清浄な布等で乾拭きして下さい。
2. 使用前にバー（棒ヤスリ）に破損、異常等が無いことを確認すること。
3. 本品に電池を入れ、バーを挿入する。動作ボタンを押し、バーが回転することを確認すること。
4. 動作ボタンを押し、バーを回転させ、使用する部位に軽く押し当て、身体組織等の搔爬を行う。
※バーは強く押し付けないこと。
5. 使用後は施術部位に適切な処置を施行すること。
6. バーが破損した場合は直ぐに使用を中止し、滅菌済みのバーに交換すること。（別売）
販売名：バー（棒ヤスリ）
製造販売届出番号：13B2X00206000087
7. 使用後、バーを本体より引抜き、本体を清浄な布等で乾拭きすること。
8. 電池を交換する際は本体後部（電池ケース）を回転させ、本体後部を外し、電池を新品と交換すること。

【使用上の注意】

1. 本体にはモーターが内蔵されており、落下等による破損に注意すること。
2. 本品及び患者に異常があった場合は使用を中止し、適切な処置を講じること。

3. バーを強く押し付けないこと。（回転が停止します）
4. バーが回転しない状態で動作ボタンを押し続けけないこと。
5. 本体は防水性ではないため水洗い等は禁止。
6. 医療に精通した医師以外の使用を禁止。

【保管方法及び有効期間等】

常温、常湿、埃の少ないところに保管すること。
（濡れた状態で保管しないこと）

【保守・点検に係る事項】

1. 本体はオートクレーブ滅菌には未対応。また、本体の水での洗浄はできません。清浄な布等で乾拭きして下さい。
2. 使用前に汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常が無い事を点検すること。
3. バーの劣化を感じた際は新品に交換すること。
バーは別売りとなります。
4. バーの取扱いに関しては販売名：バー（棒ヤスリ）の添付文書に準拠すること。
5. 故障、破損や極端に汚れた場合は修理に出して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

株式会社アマネセール

〒950-0911

新潟県新潟市中央区笹口1丁目18番地9 サンセーヌA

Tel: 025-383-8240、Fax: 025-383-8244

E-mail: amanecer@futuro.co.jp