

器55医療用洗浄器
一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000（JMDNコード）

ナザピュア


【禁忌・禁止】

- ・洗浄後には鼻をかむ必要があるため、鼻をかむことができない方や乳幼児は使用しないでください。
- ・使用時に耳に痛みや圧迫感を感じる場合は、水圧を弱めてください。
- ・使用中または使用後に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・お子様を使用する場合は、必ず保護者の指導・監督のもとで行ってください。
- ・使用直後に鼻を強くかむと耳の痛みや中耳炎の原因となることがあるため、避けてください。
- ・鼻づまりが著しい場合や耳に疾患がある場合は、事前に医師に相談してください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

＜本体＞

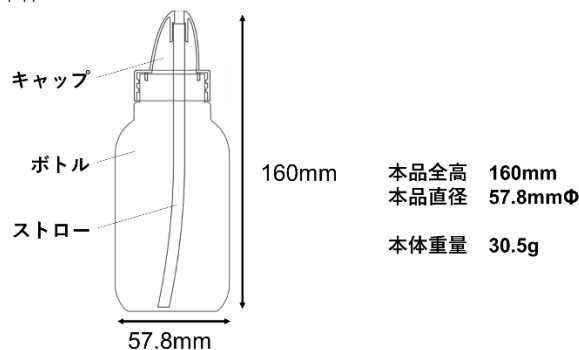

＜付属品＞

「ナザピュア 専用洗浄パウダー」

成分：塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、難消化性デキストリン

洗浄液の濃度を調整するために1回分（220mL）に1包を入れて使用。



2. 原理

ボトルに約 220mL の洗浄液を注入し、ボトル中央部を押すことで、キャップ先端の吐出口から洗浄液が噴出します。押す力の強弱により、水流の圧力を調整することができます。

【使用目的または効果】

本品は鼻腔内の洗浄を目的とした手動式の洗浄器であり、衛生状態の維持または治療の一環として使用する。

【使用方法等】

《準備》

- ・使用前にボトルをよく洗い、器具内部を清潔にしてください。
- ・キャップを左に回して取り外します。
- ・ボトルの 220mL の目盛線まで 37～40℃のお湯を入れます（お湯が熱すぎないことを確認してください）。
- ・「ナザピュア専用洗浄パウダー」を1包入れてよく溶かします。
- ・キャップを閉めてからキャップ上部を押さえたうえで内容物が完全に溶けるまでよく振ってください。

《洗浄》

- ・洗面所や浴室で行うか、洗面器を用意してください。
- ・前かがみになり、鼻にやさしくフィットするようにキャップの先端をあててください。
- ・リラックスして「アー」と声を出しながら、ボトルを半分ほど押して洗浄します。
- ・左右の鼻を交互に行い、洗浄液がなくなるまで繰り返してください。

《洗浄後》

- ・洗浄後は片方ずつ優しく鼻をかんでください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・洗浄には必ず付属の「ナザピュア専用洗浄パウダー」を使用してください。
- ・使用時は洗面所などで前かがみになり、衣服や床が濡れないようにしてください。
- ・洗浄液の温度が高すぎるとやけどの原因になります。必ず 37～40℃程度のお湯を使用してください。
- ・洗浄の際にボトルを強く押しすぎると耳に痛みを感じることがあります。適度な力でご使用ください。
- ・洗浄後に強く鼻をかむと、耳の痛みや中耳炎を引き起こすおそれがあります。鼻は優しくかむようにしてください。
- ・原則として本人以外の使用は避けてください。やむを得ず使用する場合は、器具を十分に洗浄・消毒してください（感染症予防のため）。
- ・ボトルにひび割れや変形などの破損がある場合は使用しないでください。
- ・ストローは着脱可能です。使用時には必ずキャップにしっかり取り付けてください。
- ・洗浄液は一度の使用ごとに使い切り、残った液は再使用せず必ず廃棄してください。
- ・本体全体のつけ置き消毒や煮沸（熱湯）消毒は行わないでください。
- ・キャップを鼻の孔に突っ込みすぎて鼻の粘膜に触れないようにご注意ください。

【保管方法及び有効期限等】

〈保管方法〉

〈使用後〉

- ・ 使用後はストローおよびボトル全体を十分に洗浄してください。
- ・ 水垢やカビの発生を防ぐため、毎回洗浄を必ず行ってください。

〈長期間使用しない場合〉

- ・ 本体をよく乾燥させ、涼しく乾燥した風通しの良い場所に保管してください。
- ・ 直射日光や高温多湿の場所での保管は避けてください。
- ・ 使用を再開する際は、本体を再度十分に洗浄してからご使用ください。

〈有効期間〉

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：i CURE X株式会社

住所：鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番40号

電話番号：099-285-8497