

機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 13929001（JMDNコード）

CHITOSLA シリンジ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は液体又はガスを注射・注入するか引き抜くために用いる器具である。本体はバレル、プランジャー、ピストン、ノズルキャップにて構成されている。

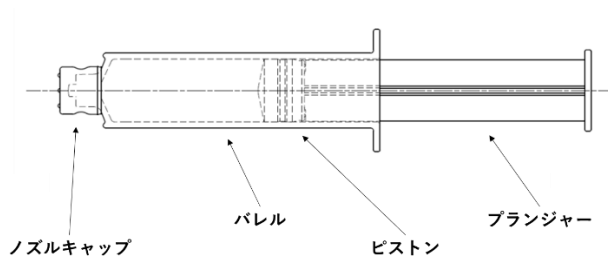

(寸法)

バレル	全長 102mm (101-103mm)
プランジャー	全長 102mm (101-103mm)
ピストン	全長 15mm (14-16mm)
ノズルキャップ	全長 13.5mm (13-14mm)

(原材料)

バレル	環状ポリオレフィン (COP)
プランジャー	ポリプロピレン (PP)
ピストン	塩素化ブチルゴム、フッ素樹脂フィルム 複合材料
ノズルキャップ	塩素化ブチルゴム、フッ素樹脂フィルム 複合材料

2. 原理

シリンジのプランジャーを引くことでシリンジ内に液体又はガスが充填され、シリンジのプランジャーを押すことでシリンジ内の液体又はガスが注入される。

【使用目的または効果】

本品は液体又はガスを注射・注入するか引き抜くために用いる器具である。

【使用方法等】

一般的な使用方法

- ・ プランジャーを引き、液体等を引き抜く。
- ・ 注入回路等を本品に接続する。
- ・ 使用後、患者との接続を外し、適切な方法で廃棄する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品を鉗子等で挟んだり、はさみ等の鋭利な器具により傷をつけないよう注意すること。
2. 製品に破損、亀裂、変形、汚染等の異常が認められる場合は使用しないこと。
3. 使用にあたっては、本品が目的とする用途に適合した製品であることを確認すること。
4. 他の医療機器や医薬品と併用する場合は、それぞれの添付文書を確認し、使用方法及び使用上の注意に従って使用すること。
5. 他の医療機器と接続又は組み合わせて使用する場合は、確実に接続又は取り付けが行われていることを確認したうえで使用すること。
6. 使用中は、本品の破損、接続部の緩み、空気混入、液漏れ、詰まり等の異常がないか定期的に確認すること。
7. プランジャーはまっすぐ引くこと。斜めに引いた場合、ピストン部の密着性が低下し、液漏れや空気混入が発生する可能性がある。
8. 運搬・操作時には、落下、強い衝撃、振動等を与えないよう注意すること。

【保管方法及び有効期限等】

＜保管方法＞

水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

＜有効期間＞

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：i CURE X株式会社

住所：鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番40号

電話番号：099-285-8497