

器 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 胸腹呼吸センサ (70073000)
腹部呼吸センサー

再使用禁止 (腹圧センサー)

【警告】

＜使用方法＞

- 1) 腹圧センサーを使用する場合は、連続的に SaO₂ のモニター及び本装置とは独立した換気回数モニター及び無呼吸を検出する機器を併用すること。
 [本装置のアラーム機能が機能しない等の非常事態に備える]

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- 1) 腹圧センサーは再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

- 1) トランスデューサーインターフェース



- 2) 腹圧センサー (ディスポーザブル品)

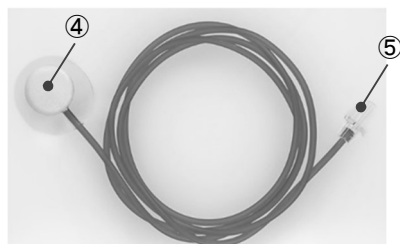

- | | |
|----------------------|----------------|
| ① 腹圧センサーコネクタ | ④ センサー |
| ② インジケータ | ⑤ コネクタ (①部へ接続) |
| ③ コネクタ (小児用人工呼吸器へ接続) | |


【使用目的又は効果】

本品は、患者の腹部に固定し腹圧を感知するセンサーであり、小児人工呼吸器に接続し患者の呼吸をモニタリングするために使用する。

【使用方法等】

〔使用準備〕

- 1) トランスデューサーインターフェースに腹圧センサーを接続し、トランスデューサーインターフェースのコネクタを、弊社指定の人工呼吸器に接続します。
- 2) センサーを指でやさしく圧迫し、トランスデューサーインターフェースのインジケータが点灯することを確認します。
- 3) センサーの固定に適したテープを下記の通りセンサーに貼ります。
 ①テープはセンサーのラインと直角に貼ります。
 ②センサーは患者の臍部（へそ）と胸骨剣状突起の中間に貼り付けます。
 ③腹部側面に配置することが必要な場合があります。

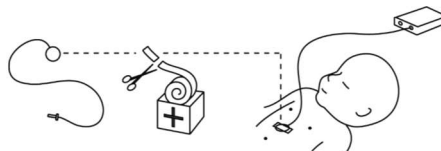

- 4) 腹圧センサーが正しく貼られていることを確認し、自発呼吸を観察します。

〔使用中〕

- 1) 定期的に動作の点検を行ってください。

〔使用後〕

- 1) トランスデューサーインターフェース、腹圧センサーを取り外す。
- 2) 腹圧センサーは再使用せずに、廃棄する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 本品を患者に接続する前に必ず、小児人工呼吸器の使用前点検を実施すること。

【保守・点検に係る事項】

〔使用者による保守点検事項〕

- 1) 中性洗剤又は液体消毒剤を使って、トランスデューサーインターフェースの外表面を清拭する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：エア・ウォーター・メディカル株式会社
 製造業者：Vyair Medical, Inc. (米国)