

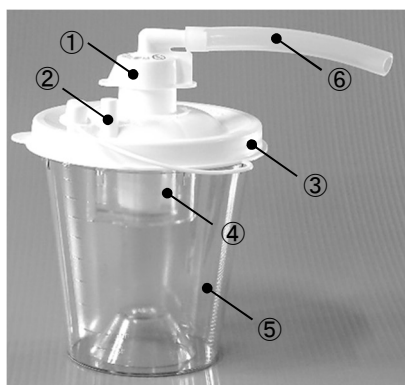
器 32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用ボトル (38476000)
バキューエイド 吸引ボトル

【警告】**<使用方法>**

- 1) フィルターカートリッジは水で濡らさないこと。
[吸引力が低下し、吸引不能になるため]

【禁忌・禁止】**<使用方法>**

- 1) 本品は患者個人の使用に限り、複数の患者に使用しないこと。[感染のおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】**<形状>**

- | | |
|---------------|------------|
| ① フィルターカートリッジ | ④ フロート |
| ② 吸引チューブ接続口 | ⑤ 容器 |
| ③ 蓋 | ⑥ シリコンチューブ |

<原理>

電動式可搬型吸引器で陰圧を発生させ、吸引ボトルの蓋に接続した吸引チューブから、患者の吸引物を吸引ボトルへ排液する。また、吸引物が吸引ボトル内に満水になると、停止フロートが自動的に吸引圧力を遮断し、吸引が停止される。

【使用目的又は効果】

本品はプラスチック製で、蓋によって密閉でき、体液の回収のために吸引器とともに使用する容器である。本品は再使用可能である。

【使用方法等】**[使用準備]**

- 1) 吸引ボトルを吸引器本体に装着する。
- 2) フィルターカートリッジに接続されたシリコンチューブを吸引器のチューブコネクタに接続する。
- 3) 吸引チューブ(別売品)を蓋のチューブ接続口に差込む。

[使用]

- 1) 吸引器本体の取扱説明書に従い操作する。
- 2) 必要に応じて吸引カテーテル(別売品)を吸引チューブに接続して吸引を開始する。
- 3) 吸引ボトル内が満水、つまり吸引ボトルの作動停止フロートレベルに達すると吸引は自動的に停止する。停止フロートが作動した場合は、ボトルの内容物を廃棄する。

[使用後]

- 1) 吸引器本体と本品をつなぐシリコンチューブ及び吸引チューブを外す。
- 2) 吸引ボトルを吸引器本体から取り出す。
- 3) 吸引ボトルの蓋からフィルターカートリッジを取り外す。
- 4) 保守・点検に係わる事項の通り、洗浄または交換する。

【組み合わせて使用する医療機器】

本品は下記医療機器と併用して使用します。

販売名：バキューエイド Q S U

認証番号：225AFBZX00105000

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 1) 吸引中は、吸引ボトルに溜まった吸引物の量を確認し、吸引物はできるだけ早く捨てること。[吸引ボトルに吸引物が一杯になると、自動的に吸引が停止するため。]
- 2) 吸引ボトル内の停止フロートが働いた場合には、直ちに電源を OFF にし、吸引ボトル内の吸引物を捨てること。[そのままの状態ですぐに吸引を続けると、吸引ポンプの故障の原因となるため。]

【使用上の注意】**<重要な基本的注意>**

- 1) 使用前には吸引ボトルにひび割れや漏れがないことを確認すること。
- 2) フィルターカートリッジはボトル洗浄時には必ず取り外すこと。1~2 ヶ月毎、または吸引物がフィルターに吸い込まれた場合には必ず交換すること。
- 3) 蓋のフロート(ボール)は取り外さないこと。

【保守・点検に係る事項】**<使用者による保守点検事項>****[吸引ボトル]**

- 1) 使い終わるたびに、吸引ボトル内の吸引物を捨てる。
- 2) 蓋からフィルターカートリッジを取り外す。
- 3) ボトルと蓋は、食器用洗剤を入れた温水中で洗い、温かい流水ですすぐ。
- 4) 食酢 1 に対して温水 3 の割合の混合液で洗い、温かい流水ですすぎ、十分に乾燥させる。
- 5) 使用頻度に応じ、適切に交換する。

[フィルターカートリッジ]

- 1) フィルターカートリッジは洗浄できない(水で濡れてしまうと、吸引不能となる)。
- 2) 使用 1~2 ヶ月毎、または吸引物がフィルターに吸い込まれたり、濡れたりした場合に交換する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：エア・ウォーター・メディカル株式会社

製造業者：DeVilbiss Healthcare (米国)

吸引器本体の取扱説明書がありますので、必ず確認してください。