

器 06 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路セット (70566000)
ファビアン呼吸回路セット

再使用禁止

【警告】

<使用方法>

- 1) ウォータートラップ容器内の液体がいっぱいになる前に液体を捨てること。[回路内に液体が流入し、流量抵抗の増大により患者に危険が生じる可能性があるため]

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 1) 再使用禁止
- 2) 内側に内筒があるコネクタには接続しないこと。
[回路が閉塞する可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】


<原理>

人工呼吸器から患者に送気されるガスを、中空（中が空洞）の、自在に曲がるチューブ内部を通して送ることができる。

<形状>


[本体]

F11 回路

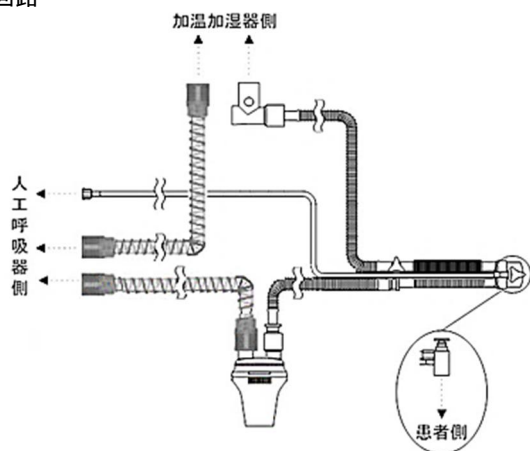


[付属品]

- 1) コネクタ
- 2) Y ピース

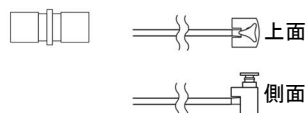

[オプション品]

HF0 用コネクタ

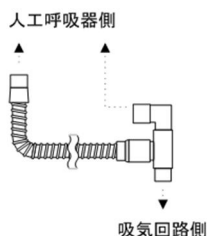

【使用目的又は効果】

本品は、器械換気を行っている小児・新生児等の患者に使用する、ヒーターワイヤー及びモニタリングチューブ付の呼吸回路セットである。

【使用方法等】

[使用準備]

- 1) 使用する直前に包装を開封する。
- 2) ひび割れ等の損傷がないことを確認する。
- 3) Y ピースについているセーフティキャップを外し、人工呼吸器及び加温加湿器に適切に取り付ける。
- 4) 使用前にテストバッグを用いて回路の漏れ、閉塞、異常等がないかを確認する。

[使用中]

- 1) ウォータートラップに貯留した液体は、水受け容器（透明）を左回しに捻り、容器を外して排水する。排水後は、水受け容器を取り付け右回しに捻って固定し、漏れがないことを定期的に確認すること。

[使用后]

- 1) 患者から人工呼吸器、加温加湿器、本品を取り外す。
- 2) 本品は単回使用品のため、廃棄する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 消毒・滅菌処理しないこと。[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があるため]
- 2) 本品の接続はリーク、緩み、外れ等が生じないように確実に接続すること。
- 3) モニタリングチューブに水滴が流入しないよう、チューブの差込口が常に上になるように設置すること。
- 4) モニタリングチューブに水滴が見られた場合は速やかに取り除くこと。[水滴によりチューブ内が閉塞し、適正な換気が維持されない、人工呼吸器アラームの誤作動等のおそれがある]
- 5) ウォータートラップの水抜き作業後は、水受けが適切に接続され、漏れが無いことを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：エア・ウォーター・メディカル株式会社

製造業者：Intersurgical Limited (英国)