

** 2017 年 7 月 改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）
* 2010 年 8 月 改訂（第 2 版）

医療機器届出番号 : 09B1X00004000116

機械器具 47 注射針及び穿刺針
一般医療機器 通気針 70199000

ディスポーザブルエアーク

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]


- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

[使用期限]

**●包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

【形状・構造及び原理等】

<本品の代表図>

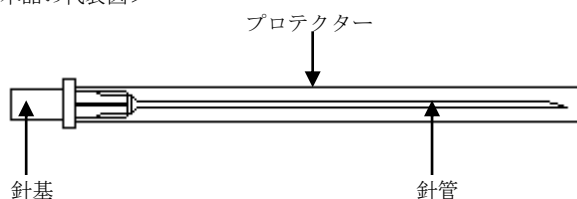

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

フォルテ グロウ メディカル 株式会社
電話番号 0283-22-2801

* [販売元]

株式会社 ユニバーサル技研
電話番号 0465-32-5005

【使用目的又は効果】

- 本品は、通常、輸液瓶等から輸液する際、瓶内に通気されるために使用する針をいう。チューブ及びフィルタ付きもある。
- 本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

本品は 1 回限りの使い捨て製品（ディスポーザブル）であって再使用しないこと。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 針の針管部には直接手を触れないこと。
- プロテクターを外すとき、針先がプロテクターに触れないように注意すること。（プロテクターが針に触れると刃先が変形し、穿刺しづらくなる場合がある。）
- 針をバイアルのゴム栓に穿刺する場合は、針をなるべく刺通面に垂直に刺し、同一部位に穿刺されることが無いように使用すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。
- 使用後は誤刺に注意し、プロテクターを針にまっすぐにかぶせること。（傾けてかぶせると、針がプロテクターを突き抜けることがある。）