

機械器具(74) 医薬品注入器

一般医療機器 耳鼻咽喉科用空気圧式アプリケーター (33466000)


パブライザー®

【形状・構造及び原理等】

※※1. 概要

本品は、サルコート®カプセル外用50 μ g(承認番号:22100AMX01301000)専用の散粉器で、カプセルに入っている粉末の薬剤を、患部(口腔)に直接噴霧するために用いる。

※※2. 外観

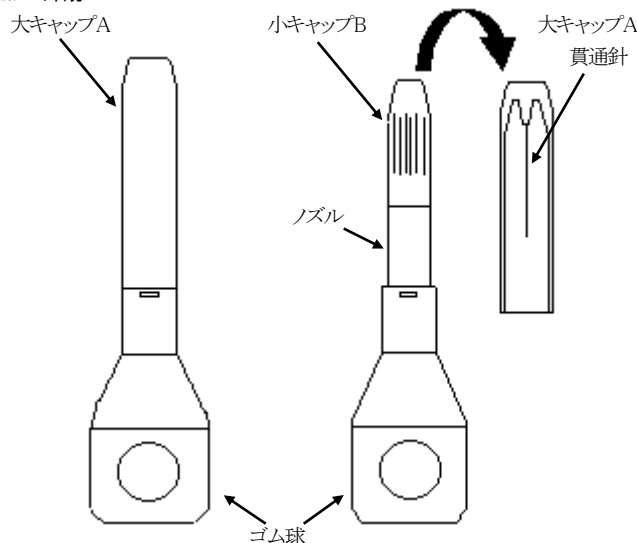

3. 同梱物

- パブライザー本体
- 小型噴霧器(パブライザー)の使い方説明書
- 掃除用ブラシ
- 携帯袋

※※4. 原理

粉末薬剤入りカプセル両端に穴をあけ、その一端から圧縮した空気を送ることにより、反対側の穴から薬剤が噴霧される。

※※【使用目的又は効果】

吹込空気を用いて粉末薬を咽喉に投与するアプリケーターをいう。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

詳細は「小型噴霧器(パブライザー)の使い方説明書」を参照すること。

※※1. 噴霧の準備

- (1)大キャップAを引き抜くようにはずし、小キャップBを左にねじってはずす。
- (2)粉末薬剤入りカプセルを乾いた指でつまみ、小キャップBの下端部からキャップ内に差し入れる。
- (3)小キャップBを、中に入れたカプセルを落とさないように、元通りにノズルに取り付ける。
- (4)大キャップAをノズルのもとまで、しっかりとかぶせる。
この操作により、大キャップA内部の貫通針によりカプセル両端に穴が開けられる。なお、大キャップAの中には貫通針があるので、指等を入れないこと。
- (5)もう一度大キャップAをはずせば、噴霧の準備ができあがる。

※※2. 噴霧の方法

- (1)口をあけ、小キャップBの先端部を患部に向けながら、ゴム球を強く押さえると、口腔内に薬剤が噴霧される。
- (2)小キャップBの先端部は、口にふれて湿らさないようにすること。
- (3)噴霧後は、空カプセルを取り出すこと。

【使用上の注意】

※※1. 重要な基本的注意

- 本品は、医師の処方及び指示に従って使用すること。
- 本品に異常が認められた場合は、使用しないこと。
- 本品は、サルコート®カプセル外用50 μ g専用であるため、他の薬剤の噴霧に使用しないこと。
- 一度使用したカプセルは再度使用しないこと。
- カプセル剤が湿るとうまく噴霧できないことがあるので、乾いた指でカプセルをつまむこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

※※【保守・点検に係る事項】

- ゴム球は洗ったりせず、内部を湿らせないように注意すること。
- 週1回程度、以下の要領で清掃すること。
小キャップBの奥側と、ノズルの奥側にたまった粉末は、添付のブラシで清掃すること。
その後、噴霧器を硬いものの上で数回たたいて、ノズルに残っている粉末を取り除くこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801

提供

帝人ファーマ株式会社