

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 送気送水チューブ 70356000

ウォーターチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


●再使用禁止

<使用方法>

- 逆止弁については、高濃度の薬液の投与に使用しないこと。
[弁機能が作動しなくなるおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

<代表的な構成図>

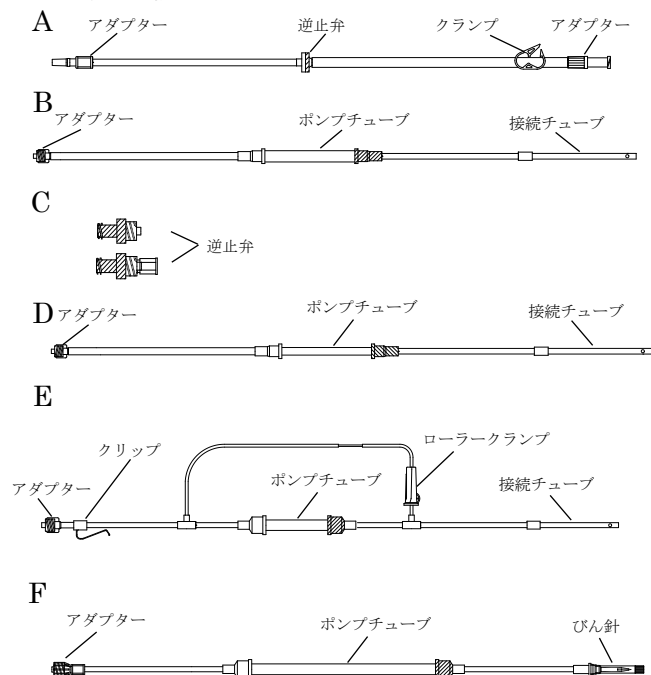

- 本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用している。
- 各構成品は、省略又は追加される場合もある。

【使用目的又は効果】

- 本品は、送水装置又は送気装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等との接続に用いる柔軟性のあるチューブである。

【使用方法等】

<組み合わせて使用する医療機器>

- 本品は、下記の医療機器と組み合わせて使用することができる。

- 内視鏡用送水装置 : ウォーターブリーズ 2 WP2S
(認証番号: 302AGBZX00071000)
もしくは上記送水機器と同形のポンプ機構を持つ送水ポンプで、必要送水量が得られる装置。
- 内視鏡用送水タンク : ウォータータンク
(届出番号: 09B1X00004000130)
(届出番号: 14B2X10038000004)

①本品を使用する前に、包装及び本品に汚れ、破損等がないことを確認し、汚染に十分注意し、包装内から本品を取り出す。

②使用前に、接続する器具の径と本品の径が合うことを確認する。

[鉗子口からの送水]

③B または E の接続チューブを「ウォータータンク」のチューブガイドにしっかりと接続する。

④ポンプチューブを「ウォーターブリーズ 2 WP2S などの送水装置」のポンプヘッドに装着する。(識別マークに合わせて装着する。)

⑤A を使用して鉗子口から送水する場合、アダプターを内視鏡鉗子チャンネルにそれぞれしっかりと接続する。

フットスイッチを操作して、送水を行う。送水量調整ボリュームで適切な送水量を設定する。(E を使用する場合はローラークラップを閉塞させて使用する。)

[副送水口からの送水]

③D または E の接続チューブを「ウォータータンク」のチューブガイドにしっかりと接続する。

④ポンプチューブを「ウォーターブリーズ 2 WP2S などの送水装置」のポンプヘッドに装着する。(識別マークに合わせて装着する。)

⑤D または E を使用して副送水口から送水する場合、逆止弁 C を先に内視鏡の副送水チャンネルの口にしっかりと接続する。アダプターと逆止弁 C を接続する。フットスイッチを操作して、送水を行う。その時に送水量調整ボリュームで適切な送水量を設定する。(E を使用する場合はローラークラップを開放させて使用する。)

[薬液バッグからの送水]

③F を使用し、びん針を薬液バッグ等のゴム栓にしっかりと挿し込む。

④ポンプチューブを「ウォーターブリーズ 2 WP2S などの送水装置」のポンプヘッドに装着する。(識別マークに合わせて装着する。)

⑤アダプターを鉗子口、副送水口または併用する内視鏡用処置具の送水口に接続して、送水量調整ボリュームで適切な送水量に設定する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 本品は、「ウォータータンク」と「ウォーターブリーズ 2 WP2S」または「ウォーターブリーズ 2」と同形のポンプ機構を持つ送水ポンプで、必要送水量が得られる装置」と組み合わせて使用することができる。その他の医療機器と組み合わせて使用する場合はしっかりと接続し使用すること。
- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意すること。
- 可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがあるので注意すること。
- 使用中は本品の破損、接合部の緩み、液漏れ等について定期的に確認すること。万一異常が認められた場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 使用中はチューブのねじれやキックによる閉塞に注意すること。
- 乱暴な取扱いをすると、破損・亀裂のおそれがあるので、製品の取扱いは十分注意すること。
- アルコール等の有機溶剤を含む消毒剤を使用するとアダプター等のひび割れについて注意すること。[薬液によりひび割れが生じ、液漏れのおそれがある。]
- 内視鏡鉗子チャンネルのゴムキャップ(栓)部が弱っている場合及び傷んでいる場合に液を送水すると、ゴムキャップの部分より液が漏れるおそれがあるので注意すること。
- ローラークレメンを全開にして操作した場合、送水できない場合があるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

[使用期限]

- 包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

フォルテグロウメディカル株式会社

電話番号 0283-22-2801

[販売元]

ORT メディカル株式会社

電話番号 045-534-7015