

* 2017 年 7 月 改訂（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2009 年 10 月 作成（第 1 版）

届出番号 : 09B1X00004000132

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000
(滅菌済み手動式生体用洗浄器 34629009)

「ミストシリンジ」の付属品 (ミストアダプター)


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ミストシリンジの付属品である。

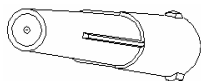

【使用目的又は効果】

本品は、液体噴霧用のアダプターである。
ミストシリンジは、身体の一部に適用する液体（滅菌済みの場合もある）を手動で噴出する装置であり、衛生状態の維持又は治療の一環として用いる。

【使用方法等】

1. 必要に応じて、手袋を着用する。
2. 汚染に十分注意し、ブリストアパックを開封する。
3. パックに入れたまま本品のメスルアー部を押し出し、ミストシリンジのオスルアー部（ロック先）に確実に嵌合させる。
4. パックを取り除いて使用する。

※その他、詳細な使用方法については、ミストシリンジの添付文書を参照のこと。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 嵌合時は、以下の事項を遵守すること。
 - ・過度な締め付けをしないこと。[筒先に破損が生じ、液漏れ等を引き起こす可能性がある。]
 - ・筒先をアダプターに対してまっすぐ入れ、横方向の力を加えないこと。[筒先に曲がりや破損が生じ、液漏れ等を引き起こす可能性がある]
- 接合部に緩みがないことを確認してから使用すること。また、使用中は定期的に緩みや外れがないことを確認すること。
- 本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。]

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 本品は、エチレンオキシドガス滅菌済みであり、一回限りの使用で再使用しないこと。
- 使用前、包装や内容物に破損や汚損、水ぬれ等の異常がないことを確認すること。
- 使用中は本品の破損、接合部の緩みや薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- 開封後はすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して、安全な方法で適切に処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 水ぬれに注意し、直射日光・高温多湿を避けて保管すること。

【使用期限】

- *●包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801

【販売元】（お問い合わせ先）

前田産業株式会社
電話番号 06-6440-4556