

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 輸液用延長チューブ 12170001

ニュートロン延長チューブ付

再使用禁止

【警告】

- 本品の接続部は、使用前及び使用中にかかわらず、緩みがないことを常に確認すること。[嵌合が緩み、液漏れを起こす可能性がある。]
- 混注操作を行う場合は、操作前に混注口を消毒薬等で消毒すること。[感染の可能性がある。]
- 内径が 1.549mm 未満の形状をした製品を本品のメスルアーに接続しないこと。プレフィルドシリンジ、ディスポーザブル 1mL シリンジ、ディスポーザブル注入ポンプの一部の製品はオスルアー内径が 1.549mm 未満の場合があり、本品のメスルアーとの接続に不適合な場合がある（本品内部部品を破損させて薬液漏れや汚染の可能性がある）。

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 針やエンドキャップを使用しないこと。本品は通常閉鎖状態である。
- 注射器等の金属針又はニードルレスカニューラを本品のメスルアー部へ差し込まないこと。[メスルアー内シリコーンシールを破損させて薬液漏れや汚染の可能性がある。]
- 本品のメスルアーに保護キャップをはめないこと。[メスルアー内導管を破損させて閉塞、薬液漏れ、汚染の可能性がある。]
- 本品はポリカーボネートを使用しているため油性の薬剤、アルコールを含む薬剤、脂肪乳剤などを使用する場合は注意すること。[破損する可能性がある。]

【保管方法及び有効期間等】


【保管方法】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

【使用期限】

包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

【形状・構造及び原理等】

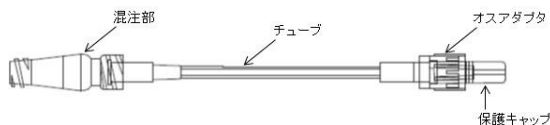

- 本品は内径が 1.549mm より大きい ISO オスルアーに対応している。
- 本品は天然ゴムラテックスを含有していない。
- 本品は DEHP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を含有していない。

【使用目的又は効果】

本品は輸液などのラインを延長するために用いるチューブである。

【使用方法等】

1. 本品を使用の前には、包装および本品に汚れ、破損等がないことを確認すること。万一異常が認められた場合は使用しないこと。
2. 本品をパッケージから取り出し、メスルアーにフラッシュ用シリンジを取り付ける。プライミングのためのフラッシュ溶液を注入する。本品を接続相手のメスルアー等に取り付け、残りのフラッシュ溶液を注入してデバイスをアクティブにする。
3. フラッシュ用シリンジを取り外し、廃棄する。
4. 本品のメスルアーにシリンジ等を取り付ける場合は、本品のメスルアーを 70 % のイソプロピルアルコールで強く円を描くようにふく。
5. 毎回使用後は生理食塩水で、または施設のプロトコルに従って本品をフラッシュする。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801

【製造元】

アイシーユーメディカル ICU Medical de Mexico, S. A. de C. V.
(メキシコ合衆国)