

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ（JMDN コード：35384000）

インジェクションアダプター

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止、再滅菌禁止

<使用方法>

- (1) 持続的な輸液注入は行わないこと。[輸液ラインが外れるおそれがある。]

* 【形状・構造及び原理等】

<構造図>

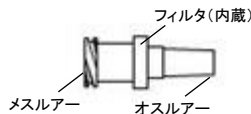

* <血液・体液に接触する部分の原材料>

IA-B6017 及び B6017

-アクリル樹脂[オスルアー、メスルアー、アダプタ（本体）]

-ポリアミド[フィルタ（内蔵）]

本品は、電子線滅菌済みである。

<原理>

本品は、注射筒等のオスルアー部に本品を接続することで、輸液、薬液投与、混注又は採液時における流路となる。流体に異物が混入していた場合、フィルタ（内蔵）により捕捉される。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は、注射筒などに接続して使用するオス、メスコネクタである。

【使用方法等】

1. 包装を 1/3 程度開封する。
2. 包装に入ったままの状態、本品のオスルアー部を保持する。
3. 包装の入口から本品のメスルアーに接続する医療機器を入れ、包装内で接続する。
4. 接続した医療機器を持ち、包装を取り除き、使用する。
5. 使用後は接続を外さず、接続した機器と共に廃棄する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- (1) 本品のルアー部に直接手を触れないこと。
- (2) 本品に接続した他の器具との接続を解除する場合、オスルアー側を切り離すこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) 開封時に本品が包装内から飛び出す場合がある。ゆっくりと開封すること。
- (2) プレフィルドシリンジ等、既に薬液が充填されている器具に本品を接続する場合、接続時に薬液が漏れないように注意すること。
- (3) 一度シリンジ等に接続した本品を取り外さないこと。
- (4) 本品を接続したシリンジをニードルレスコネクタに接続する場合は、接続を外す時に本品がニードルレスコネクタ側に残らないように注意すること。[ニードルレスコネクタ側の閉鎖機能が作動せずに液漏れ、感染のおそれがある。]
- (5) 造影剤注入等、高圧で使用しないこと。
- (6) 本品に内蔵されているフィルタはアンブル破片等を除去するためのものである。輸液フィルタとしては使用しないこと。

<相互作用>

- (1) 本品に接続するシリンジ等はロックタイプの製品を使用すること。[スリップタイプを使用した場合、接続したシリンジ等が外れるおそれがある。]
- (2) 油性の薬剤、アルコールを含む薬剤、脂肪乳剤などを使用する場合は注意すること。[ロックリングなどにひび割れ等が生じ、液漏れが発生するおそれがある。]
- (3) ひび割れが確認された場合、直ちに使用を中止し、新しい製品と交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- ・医療従事者以外の方の手の触れない場所に保管すること。

<有効期間>

外箱に表記してある滅菌有効期限を必ず守ること。
[自己認証（製造元データ）により設定]

<使用期間>

本品は一人の患者一回使用を限度とすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号：0283-22-2801

外国製造所：アイシーユーメディカル ICU Medical, Inc.
国名：米国

販売業者：テルモ株式会社
電話番号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター