

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 輸血・カテーテル用延長チューブ 12170012

エクステンションチューブ

（PVCフリー）

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

輸液・輸血に用いる延長用のチューブとして使用する。

＜本品の代表図＞

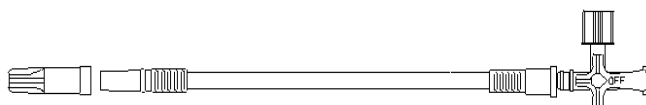

- フタル酸エステル系の溶出の恐れはない。
- 品種により各構成部品は、省略または追加される場合もある。

【使用目的又は効果】

- 本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

1. 汚染に十分注意し、包装内から取り出す。
2. キャップの付いている製品については、キャップを取り外す。
3. 接続する輸液セット等を確実に接続する。
4. 三方活栓付の場合には、使用目的に合わせてコックを回転させ、流路を切り替えて使用する。（コックの位置が閉塞した流路となる。）

【使用方法に関する使用上の注意】

1. 包装から取り出す際や、接続する際には、汚染に十分注意すること。
2. 接続部はアルコールを含む医薬品等で消毒しないこと。
3. 使用中は接続部に緩みのないことを定期的に確認すること。
4. テーパー部に薬液を付着させないこと。〔嵌合部に緩み等が生じる可能性がある。〕

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 滅菌包装開封後は直ちに使用し、使用後は医療用廃棄物として処分すること。
- 使用中に液漏れ、つまり等の異常が認められた場合は、使用を中止し新しい製品と交換すること。
- 圧力のかかるラインには使用しないこと。〔破損する可能性がある。〕
- チューブが折れ曲げられたり、引っ張られた状態で使用しないこと。〔チューブ結合部等の破損、外れが生じる可能性がある。〕
- 乱暴な取扱いをすると、破損・亀裂の恐れがあるので、製品の取扱いには注意すること。

- 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、三方活栓及びコネクタのひび割れについて注意すること。〔薬液により三方活栓及びメスコネクタにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。〕
- 三方活栓接続部に多少の白化現象の見られる場合がありますが、この白化は機能的にも安全性にも問題ありません。
- 三方活栓接続部表面に微細なキズ（以下「クレージング」という）が見られる場合がありますが、クレージングは液漏れや空気混入の心配はありません。
- 逆流防止弁の付いている製品において、逆流防止弁の先端チューブ内に多少のシリコンオイルが付着している場合がありますが、このシリコンオイルは医療用シリコンのため、安全性に問題ありません。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管のこと。

＜使用期限＞

- 包装（ラベル）に使用期限を表示している。〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売元

フォルテ グロウ メディカル 株式会社
電話番号 0283-22-2801

■販売元

株式会社 ユニバーサル技研
電話番号 0465-32-5005