

\*\* 2017 年 7 月 改訂（第 4 版）（新記載要領に基づく改訂）  
\* 2009 年 10 月 改訂（第 3 版）

承認番号 : 16300BZZ00163000

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 血液回路補助用延長チューブ 12170022

## 補助回路

（圧モニター用プロテクター）

### 再使用禁止

#### 【警告】


- \* ・ヘパリンナトリウムなどの血液凝固阻止剤を希釈若しくは溶解して持続投与を行う場合には、ルアーロックタイプの注射筒や注入ラインを使用し、血液回路と接続すること。[注射筒等との接続が外れ、血液漏れや空気混入の危険性があるため。]
- \* ・動脈側回路及び静脈側回路上に輸液等の接続投与を行う場合にはルアーロックタイプの輸液セット等を使用し、接続すること。[輸液セット等の接続が外れ、血液漏れや空気混入の危険性があるため。]

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品を透析装置等の連結部に取り付ける際には、無菌的に行うこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

<本品の代表図>

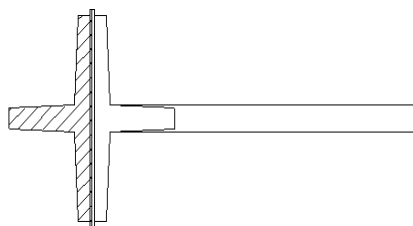

- 本品のチューブ部分はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。
- 品種により構成部品が異なる場合がある。

#### 【使用目的又は効果】

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

#### 【使用方法等】

- 本品の使用に際しては、医師の指示に従って使用すること。
- 本品を滅菌袋より無菌的に取り出し、透析装置及び透析回路等の特定部分に漏れ・外れ等が無いようにしっかり取り付ける。
- 透析装置及び透析回路等の関連機器の使用に際しては、それぞれの添付文書に従い使用すること。

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ①本品は逆流した血液がハウジング全面に充满した場合、作用しなくなるので注意すること。
- ②本品を清浄するためには、次の手順に従って行うこと。
  - ②-1. 本品に漏れが無いことを確認する。
  - ②-2. 血液モニタリングラインをクランプで止める。
  - ②-3. 本品を血液透析器から外し、注射筒等を接続して空気により加圧する。
  - ②-4. 空気により加圧している間は、血液モニタリングラインを開けておく。
  - ②-5. 本品が清浄された後、モニタリングラインを閉じて再び透析装置等に取り付け、血液モニタリングを開ける。
- ③本品は 45℃以上の温度では使用しないこと。
- ④本品は気体濾過用のフィルターであり、液体（水または有機媒体）はろ過できない。

#### 【使用上の注意】

##### 【重要な基本的注意】

- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して、適切に処分すること。
- フィルターが破損するおそれがあるので、化学薬品等は使用しないこと。
- 使用中は異常が無いことを常時監視すること。
- 本品の使用で、血液や透析液の侵入が生じた場合には、直ちに医師の指示に従って処置すること。
- \* ●脂溶性の医薬品等では品種により、可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので注意すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 【保管方法】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

##### 【使用期限】

包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### 【製造販売元】

フォルテグロウメディカル株式会社  
TEL : 0283-22-2801